



歯周治療 PERIODONTAL

シッケルスケラー（鎌形）	Sickle Scalers	C2
スケラー／キュレット	Scalers/Curettes	C5
ユニバーサルキュレット	Universal Curettes	C6
グレイシーキュレット	Gracey Curettes	C12
レジン8カラー	Resin 8 Colors	C20
部位特定キュレット	Area-Specific Curettes	C22
インプラケアII	Implacare® II Scalers	C24
ホースケラー／チゼルスケラー	Hoe Scalers/Chisel Scalers	C25
ファイルスケラー	File Scalers	C26
インストルメントシャープニング	Instrument Sharpening	C28
教育用モデル	Educational Materials	C32





エバーエッジ2.0テクノロジー
EVEREDGE® 2.0 TECHNOLOGY

エバーエッジ2.0 発表！

従来のエバーエッジテクノロジーが付与された
スケーラーもシャープですが、
エバーエッジ2.0テクノロジーを応用した
スケーラーは、さらにシャープさが向上しました。

エバーエッジ2.0テクノロジーが付与されたスケーラーは、
新たに開発された熱処理工程を用いて製造されているため、
丈夫でシャープなエッジを長期間にわたって維持します。

ヒューフレディ社独自の熱処理と複雑な製造工程は、
効率的な処置と継続的な使用に必要な、
耐久性を兼ね備えています。

更に繊細になった最終研磨仕上げ

長期間維持されるシャープな切れ味

コーティングなしの高性能

新しい
テクノロジー



よりシャープ
になった
ブレード



ダイヤモンド
柄のハンドル
デザイン



コーティング
なしの高性能



更に鋭く、
更に長持ちする
シャープな
カッティング
エッジ



革新的な
検査
システム



紫色の
グリップ



レジン8カラー
シリーズでも
エバーエッジ2.0
テクノロジーを
展開



作業部の材質:エバーエッジ(EVEREDGE®)

#9E2 エバーエッジ(EE2.0)



#9 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー(EE2.0)



#C8 レジン8カラー



作業部の材質:イミュニティスチール(IMMUNITY STEEL®)

両 頭

#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#4 丸 柄



#2 角 柄



片 頭

#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#1 角 柄



カタログの見方

手根管症候群の予防

手指にかかるストレス軽減の方法の一つとして、異なるサイズのハンドルを使い分けることが、神経外科専門医によって推奨されています。太めのハンドル(#6,#7,#C8,#9,#C8E2,#9E2)は、軽い力で把持することができます。色々なハンドルサイズを組み合わせ、軽く把持することで、手根管症候群の予防になります。

※出典:
L・J・ガーワトスキー、D・B・マクフォール、D・スタック:
歯科衛生士のための手根管症候群予防法。歯科衛生学会誌、1992年2月

インスツルメント名	* ネビィ 3 臼歯用		インスツルメント名	
	Nevi 3 Posterior		インスツルメント英名	
おすすめ品	#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SCNEVI39E2	5,800円
ハンドル番号	#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SCNEVI3C8E2	5,300円
		ハンドルの名称	掲載商品のパートコード	標準価格



シックルスケーラー (鎌形)

SICKLE SCALERS

歯肉縁上の歯石除去に使用します。



曲のシックルスケーラー

曲線上のブレードの両側にあるカッティングエッジが先端まで伸び、鋭利な先端を形成しています。

直のシックルスケーラー

まっすぐなブレードの両側にあるカッティングエッジが先端まで伸び、鋭利な先端を形成しています。ジャケットスケーラーとしても知られています。

おすすめ品



★ 衛生士用 H6/H7 H6/H7 Hygienist

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SH6/79E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SH6/7C8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SH6/77	5,300円
#6	(サテンスチール)	SH6/76	5,300円
#2	(角柄)	SH6/7	4,900円

超薄型コントラアングルのデザイン。隣接歯間部に適しています。シャンクのアングルにより前歯および小臼歯に対応できます。



★ 衛生士用 H5/33 H5/H33 Hygienist-Jacquette

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SH5/339E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SH5/33C8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SH5/337	5,300円
#6	(サテンスチール)	SH5/336	5,300円
#2	(角柄)	SH5/33	4,900円

非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。前歯の歯頸部や歯間部のスケーリングに適しています。



204S

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	S204S9E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	S204SC8E2	5,300円

白歯歯肉縁上の隣接歯間部用。



★ 204SD

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	S204SD9E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	S204SDC8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	S204SD7	5,300円
#6	(サテンスチール)	S204SD6	5,300円
#2	(角柄)	S204SD2	4,900円

コントラアングルのシャンクデザインにより、白歯部遠心面に適しています。



ターナー 15 U15 Towner

#6	(サテンスチール)	SU156	3,800円
----	-----------	-------	--------



ターナー/ジャケット 15/33 U15/33 Towner-Jacquette

#9	(エバーエッジ)	SU15/339	5,800円
----	----------	----------	--------

ネビィシリーズ

NEVI® SERIES

シックルスクレーパーネビィシリーズは40年以上のキャリアを持つベテラン職人と口腔解剖学を熟知した臨床家達の手によって共同開発されたスクレーパー群です。



ネビィ1:左側切歯の舌側面



ネビィ2:左側第二大臼歯の遠心面



ネビィ3:左側第一大臼歯の近心面



ネビィ4:右側第二大臼歯の遠心面



★ ネビィ 1 前歯用 Nevi 1 Anterior

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SCNEVI19E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SCNEVI1C8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SCNEVI17	5,300円
#6	(サテンスチール)	SCNEVI1	5,300円

曲のシックルスクレーパーとスプーン型の作業部で、前歯に使用します。特に舌側面のスクレーピングに有効です。



ネビィ 2 臼歯用 Nevi 2 Posterior

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SCNEVI29E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SCNEVI2C8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SCNEVI27	5,300円
#6	(サテンスチール)	SCNEVI2	5,300円

曲のシックルスクレーパーで、臼歯に使用します。細いブレードなので、隣接歯間部に使いやすく、シャンクも歯面に適合させやすいデザインです。



★ ネビィ 3 臼歯用 Nevi 3 Posterior

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SCNEVI39E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SCNEVI3C8E2	5,300円

細くスレンダーな両面カッティングエッジ(両刃)。狭小なコンタクトや隣接歯間部に適しています。コントラアングルのシャンクデザインにより臼歯へ適合させやすいデザインです。



ネビィ 4 臼歯用 Nevi 4 Posterior

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SCNEVI49E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SCNEVI4C8E2	5,300円

先端に従って細くなっていくテーパー型の両面カッティングエッジ(両刃)。長いブレードが、臼歯の歯冠形態に沿うため、遠心・近心面への到達性に優れています。



シクルスケーラー (鎌形)

SICKLE SCALERS



前歯用 137

#9	(エバーエッジ)	SN1379	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SN137C8	5,300円

小型の前歯用シクルスケーラーとユニバーサルキュレットの組み合わせです。



モース 前歯用 0/00

#9	(エバーエッジ)	SM0/009	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SM0/00C8	5,300円

叢生や重なりあっている前歯部用の小型ブレード。ステイン除去に適用です。

ポピュラータイプ



ポピュラータイプ 1

#1	(角柄)	SPSDE1	3,800円
----	------	---------------	---------------



ポピュラータイプ 2

#1	(角柄)	SPSDE2	3,800円
----	------	---------------	---------------



ポピュラータイプ 3

#1	(角柄)	SPSDE3	3,800円
----	------	---------------	---------------

クレイン・カプラン



クレイン・カプラン 6

#6	(サテンスチール)	SCK66	5,300円
----	-----------	--------------	---------------

マッコール



ユニバーサルキュレット マッコール 17/18
17S/18S Curette

#9E2 (エバーエッジ EE2.0) **SM17/189E2** 5,800円



スケーラー M23
M23 Scaler


#9 (エバーエッジ) **SM239** 5,800円



ユニバーサルキュレット M23A
M23A Scaler

#9 (エバーエッジ) **SM23A9** 5,800円

ゴールドマンフォックス

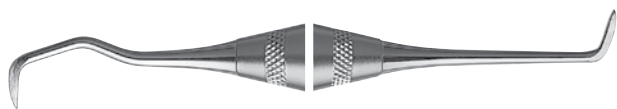

スケーラー ゴールドマンフォックス 1
GF-1 Universal Scaler

#6 (サテンスチール) **SGF16** 5,300円


歯肉縁上および歯肉縁下の強固な歯石除去用です。
歯周外科手術の際の隣接歯面や隣接歯間部での使用に適しています。



ユニバーサルキュレット ゴールドマンフォックス 2
GF-2 Curette

#6 (サテンスチール) **SGF26** 5,100円

前歯および小白歯の歯石除去用です。

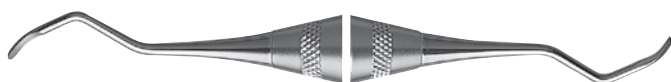

ユニバーサルキュレット ゴールドマンフォックス 3
GF-3 Curette

#6 (サテンスチール) **SGF36** 5,100円

臼歯の隣接歯間部に適しています。




ユニバーサルキュレット ゴールドマンフォックス 4
GF-4 Curette

#6 (サテンスチール) **SGF46** 5,100円

シャンクがさらに屈曲しており、臼歯の歯石除去が容易に行えます。



ユニバーサルキュレット UNIVERSAL CURETTES

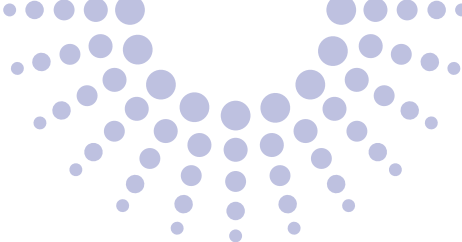

おすすめ品

ランガー



★ 1/2 1/2 Langer			
#9 (エバーエッジ)	SL1/29	5,800円	
#C8 (レジン8カラー)	SL1/2C8	5,300円	
#7 (サテンスチールカラー)	SL1/27	5,300円	
#6 (サテンスチール)	SL1/26	5,300円	
リジッド 1/2 1/2 Langer Rigid			
#6 (サテンスチール)	SL1/2R6	5,600円	

アフターファイブ 1/2 1/2 Langer After Five			
#6 (サテンスチール)	SL1/2AF6	5,600円	
ミニファイブ 1/2 1/2 Langer Mini Five			
#6 (サテンスチール)	SL1/2MF6	5,600円	

下顎臼歯用



★ 3/4 3/4 Langer			
#9 (エバーエッジ)	SL3/49	5,800円	
#C8 (レジン8カラー)	SL3/4C8	5,300円	
#7 (サテンスチールカラー)	SL3/47	5,300円	
#6 (サテンスチール)	SL3/46	5,300円	
リジッド 3/4 3/4 Langer Rigid			
#6 (サテンスチール)	SL3/4R6	5,600円	

アフターファイブ 3/4 3/4 Langer After Five			
#6 (サテンスチール)	SL3/4AF6	5,600円	
ミニファイブ 3/4 3/4 Langer Mini Five			
#6 (サテンスチール)	SL3/4MF6	5,600円	

上顎臼歯用



★ 5/6 5/6 Langer			
#9 (エバーエッジ)	SL5/69	5,800円	
#C8 (レジン8カラー)	SL5/6C8	5,300円	
#7 (サテンスチールカラー)	SL5/67	5,300円	
#6 (サテンスチール)	SL5/66	5,300円	
リジッド 5/6 5/6 Langer Rigid			
#6 (サテンスチール)	SL5/6R6	5,600円	

アフターファイブ 5/6 5/6 Langer After Five			
#6 (サテンスチール)	SL5/6AF6	5,600円	
ミニファイブ 5/6 5/6 Langer Mini Five			
#6 (サテンスチール)	SL5/6MF6	5,600円	

上顎および下顎前歯用





17/18 17/18 Langer			
#9 (エバーエッジ)	SL17/189	5,800円	
#C8 (レジン8カラー)	SL17/18C8	5,300円	
#7 (サテンスチールカラー)	SL17/187	5,300円	
#6 (サテンスチール)	SL17/186	5,300円	
リジッド 17/18 17/18 Langer Rigid			
#6 (サテンスチール)	SL17/18R6	5,600円	

リジッド 17/18 17/18 Langer Rigid			
#6 (サテンスチール)	SL17/18R6	5,600円	

上顎および下顎臼歯用

ランガー使用部位チャート

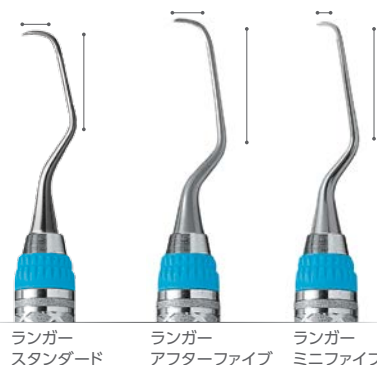
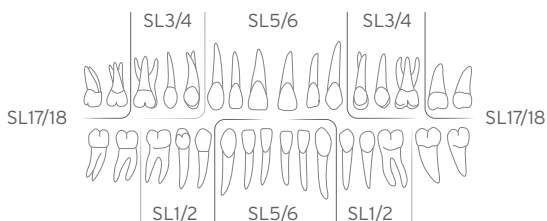


・アフターファイブ (After Five®) およびミニファイブ (Mini Five®) の第一シャンクは通常のランガーより3mm長く、5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザインです。


・ブレードが10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の腫脹を軽減します。

・ミニファイブ (Mini Five®) はブレードがアフターファイブ (After Five®) や通常のランガーの半分のサイズで、狭いポケットや根分岐部に適しています。

ランガーキュレットはグレーシーキュレットのシャンクのデザインとユニバーサルキュレットのブレードの組み合わせです。これらのインストルメントですべての歯面のスケールリングが可能です。

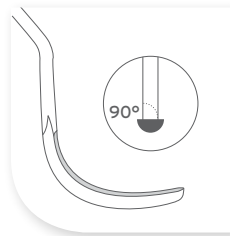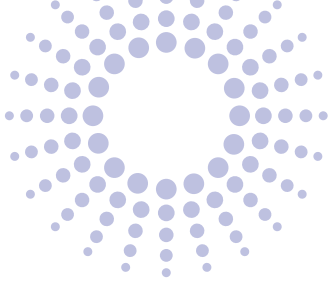

ユニバーサルキュレットの
ブレード角度

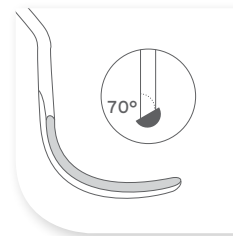

グレイシーキュレットの
ブレード角度



コロンビア大学型



2R/2L
2R/2L Columbia

#9 (エバーエッジ)
#C8 (レジン8カラー)

SC2R/2L9
SC2R/2LC8

5,800円
5,300円

前歯用



★ 4R/4L
4R/4L Columbia

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)
#C8E2 (レジン8カラー EE2.0)

SC4R/4L9E2
SC4R/4LC8E2

5,800円
5,300円

臼歯用



★ 13/14
13/14 Columbia

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)
#C8E2 (レジン8カラー EE2.0)

SC13/149E2
SC13/14C8E2

5,800円
5,300円

ユニバーサル

バーンハルト



1/2
1/2 Barnhart

#9 (エバーエッジ)

SBH1/29

5,800円



5/6
5/6 Barnhart

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)

SBH5/69E2

5,800円



ユニバーサルキュレット
インディアナ大学型



13/14 前歯用
IU13/14 Indiana University

#6	(サテンスチール)	SIU13/146	5,300円
#2	(角柄)	SIU13/14	4,900円



17/18 臼歯用
IU17/18 Indiana University


#6	(サテンスチール)	SIU17/186	5,300円
#2	(角柄)	SIU17/18	4,900円

ユニバーサルキュレット
ヤンガーグッド



7/8
YG7/8 Youger-Good

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SYG7/89E2	5,800円
------	----------------	-----------	--------

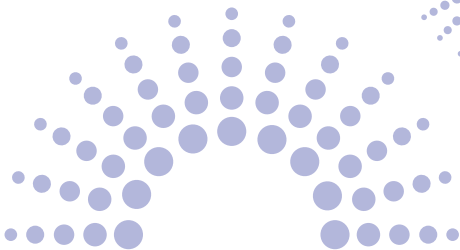



1940年代後半、ミシガン大学の革命的な考えを持つ歯科医師、クレイトン・グレイシーにはあるビジョンがありました。彼は、「歯周ポケットが深くても浅くても、歯肉を傷つけることなく痛みも伴わないように、すべての歯科医師が簡単に治療できる」ことを願っていたのです。

Dr.グレイシーが、ヒューフレディ社の創始者であるヒューゴ・フリードマンにそのアイデアを持ちかけたところ、支持を得ることができました。そして、共に彼らは、歯根面から付着物を取り除く14種類の部位特定片頭インスツルメントを開発したのです。

Dr.グレイシーのデザインは、今日の新しいインスツルメントの基礎を築きました。現在、グレイシーキュレットは、ハンドルの種類も豊富になり、両頭インスツルメントとして広く利用されています。

ヒューフレディ社では現在、Dr.グレイシーが開発したオリジナルのグレイシーキュレットの他に、第一シャンクが長くブレード幅が薄いアフターファイブ (After Five®) や、アフターファイブ (After Five®) の特徴に短いブレードを組み合わせたミニファイブ (Mini Five®)、ミニファイブのブレードを薄くし、歯肉への挿入がより容易で組織への負担を軽減するマイクロミニファイブ (Micro Mini Five®)、そして15/16 (FIT11/12) や17/18 (FIT13/14) など、様々なタイプのグレイシーキュレットを製造しています。シャンクがリジッドタイプのもも揃っています。

ヒューフレディ社は、既存の製品を改良する新しい道を常に模索しています。そして、その成功はビジョンを現実にし、現在の歯科治療になくてはならないものを創ったDr.クレイトン・グレイシーをはじめとする歯学のパイオニア達に捧げられています。



Dr. クレイトン・グレイシー




ヒューゴ・フリードマン





ブレードとシャンクの形状

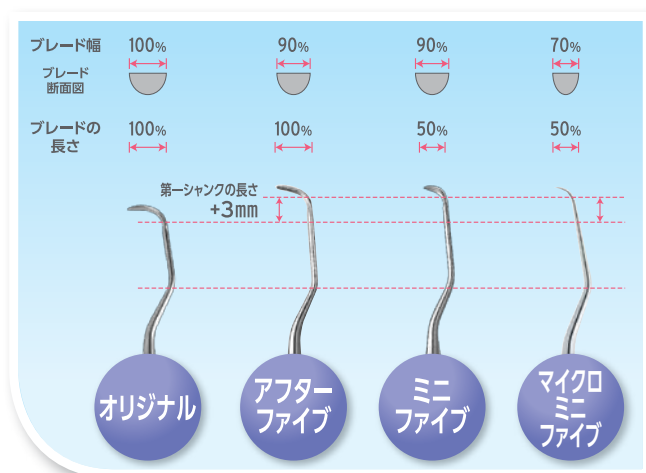

オリジナル (Original)

現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。

アフターファイブ (After Five®)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。


ミニファイブ (Mini Five®)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブ (After Five®) の半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

マイクロミニファイブ (Micro Mini Five®)


5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルより30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。

シャンクの硬さ

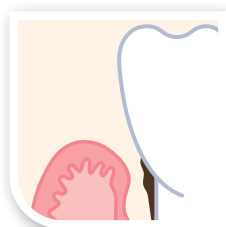


スタンダード (Standard)

細く柔軟性に富み、感覚が伝わりやすい。超音波スケーリング後の仕上げとして細かなスケーリングやルートプレーニングに使用。

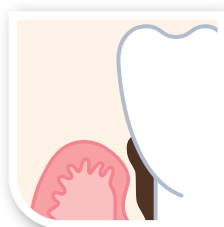


リジッド (Rigid)

スタンダードシャンクに比べ太くて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。

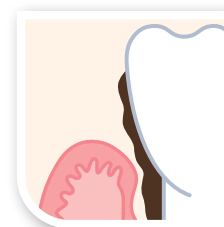


エクストラリジッド (Extra Rigid)

エクストラリジッドシャンクのグレイシーキュレットは殆どしなりがないので、全体の初期スケーリングや強固な歯石除去に使用。

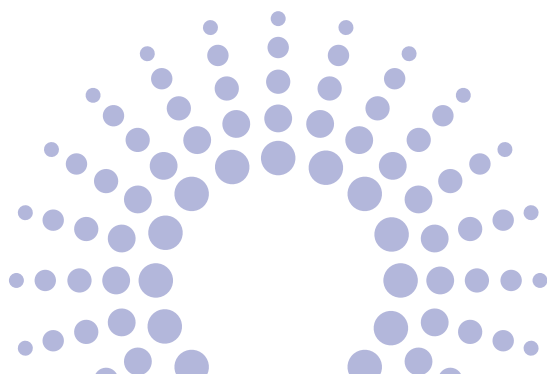



使用部位

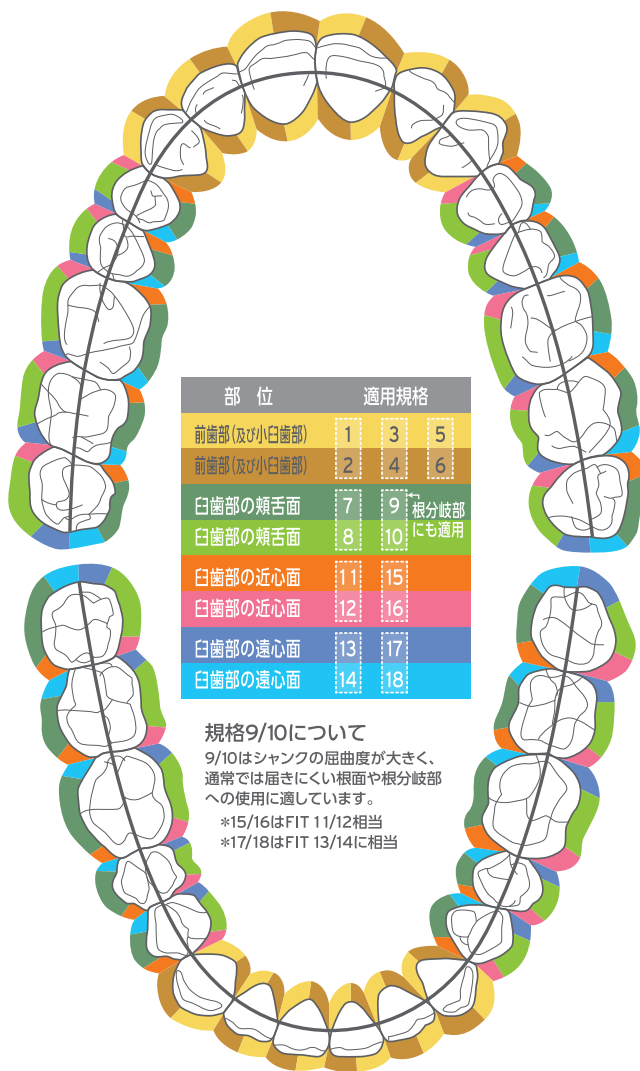

部 位	適用規格		
前歯部 (及び小臼歯部)	1	3	5
前歯部 (及び小臼歯部)	2	4	6
臼歯部の頬舌面	7	9	根分岐部 にも適用
臼歯部の頬舌面	8	10	
臼歯部の近心面	11	15	
臼歯部の近心面	12	16	
臼歯部の遠心面	13	17	
臼歯部の遠心面	14	18	

規格9/10について

9/10はシャンクの屈曲度が大きく、通常では届きにくい根面や根分岐部への使用に適しています。

- *15/16はFIT 11/12相当
- *17/18はFIT 13/14に相当



1/2



13/14



7/8



15/16 (FIT11/12)






11/12



17/18 (FIT13/14)

グレーシーキュレットのデザイン・断面図と名称

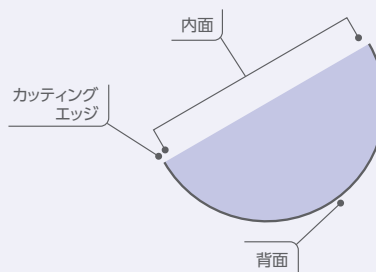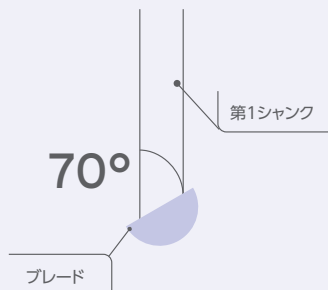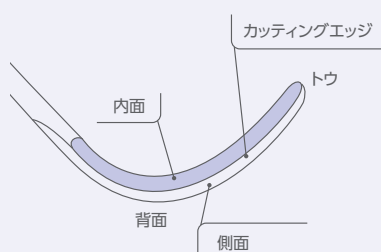



グレイシーキュレット オリジナル

GRACEY CURETTE ORIGINAL

現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。特定の部位に適合するようデザインされています。

おすすめ品



1/2 【スタンダード】

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)	SG1/29E2	5,800円
#C8E2 (レジン8カラー EE2.0)	SG1/2C8E2	5,300円
#7 (サテンスチールカラー)	SG1/27	5,300円
#6 (サテンスチール)	SG1/26	5,300円
#2 (角柄)	SG1/2	4,900円

1/2 【リジッド】

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)	SG1/2R9E2	5,800円
#C8E2 (レジン8カラー EE2.0)	SG1/2RC8E2	5,300円
#7 (サテンスチールカラー)	SG1/2R7	5,300円
#6 (サテンスチール)	SG1/2R6	5,300円
#2 (角柄)	SGR1/2R	4,900円

前歯用



3/4 【スタンダード】

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)	SG3/49E2	5,800円
#C8E2 (レジン8カラー EE2.0)	SG3/4C8E2	5,300円
#7 (サテンスチールカラー)	SG3/47	5,300円
#6 (サテンスチール)	SG3/46	5,300円
#2 (角柄)	SG3/4	4,900円

3/4 【リジッド】

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)	SG3/4R9E2	5,800円
#C8E2 (レジン8カラー EE2.0)	SG3/4RC8E2	5,300円
#7 (サテンスチールカラー)	SG3/4R7	5,300円
#6 (サテンスチール)	SG3/4R6	5,300円
#2 (角柄)	SGR3/4R	4,900円

前歯用



★ 5/6 【スタンダード】

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)	SG5/69E2	5,800円
#C8E2 (レジン8カラー EE2.0)	SG5/6C8E2	5,300円
#7 (サテンスチールカラー)	SG5/67	5,300円
#6 (サテンスチール)	SG5/66	5,300円
#2 (角柄)	SG5/6	4,900円

5/6 【リジッド】

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)	SG5/6R9E2	5,800円
#C8E2 (レジン8カラー EE2.0)	SG5/6RC8E2	5,300円
#7 (サテンスチールカラー)	SG5/6R7	5,300円
#6 (サテンスチール)	SG5/6R6	5,300円
#2 (角柄)	SGR5/6R	4,900円

前歯および小臼歯用

5/6 【エクストラリジッド】

#7 (サテンスチールカラー)	SG5/6ER7	5,600円
-----------------	-----------------	---------------



★ 7/8 【スタンダード】

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)	SG7/89E2	5,800円
#C8E2 (レジン8カラー EE2.0)	SG7/8C8E2	5,300円
#7 (サテンスチールカラー)	SG7/87	5,300円
#6 (サテンスチール)	SG7/86	5,300円
#2 (角柄)	SG7/8	4,900円

7/8 【リジッド】

#9E2 (エバーエッジ EE2.0)	SG7/8R9E2	5,800円
#C8E2 (レジン8カラー EE2.0)	SG7/8RC8E2	5,300円
#7 (サテンスチールカラー)	SG7/8R7	5,300円
#6 (サテンスチール)	SG7/8R6	5,300円
#2 (角柄)	SGR7/8R	4,900円

臼歯の頬舌側面用

7/8 【エクストラリジッド】

#7 (サテンスチールカラー)	SG7/8ER7	5,600円
-----------------	-----------------	---------------



9/10 【スタンダード】

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SG9/109E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SG9/10C8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SG9/107	5,300円
#6	(サテンスチール)	SG9/106	5,300円
#2	(角柄)	SG9/10	4,900円

9/10 【リジッド】

#7	(サテンスチールカラー)	SG9/10R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SG9/10R6	5,300円
#2	(角柄)	SGR9/10R	4,900円

臼歯の頬舌側面・根分岐部用



★ 11/12 【スタンダード】

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SG11/129E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SG11/12C8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SG11/127	5,300円
#6	(サテンスチール)	SG11/126	5,300円
#2	(角柄)	SG11/12	4,900円

11/12 【リジッド】

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SG11/12R9E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SG11/12RC8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SG11/12R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SG11/12R6	5,300円
#2	(角柄)	SGR11/12R	4,900円

臼歯の近心面用

11/12 【エクストラリジッド】

#7	(サテンスチールカラー)	SG11/12ER7	5,600円
----	--------------	-------------------	---------------



★ 13/14 【スタンダード】

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SG13/149E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SG13/14C8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SG13/147	5,300円
#6	(サテンスチール)	SG13/146	5,300円
#2	(角柄)	SG13/14	4,900円

13/14 【リジッド】

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SG13/14R9E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SG13/14RC8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SG13/14R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SG13/14R6	5,300円
#2	(角柄)	SGR13/14R	4,900円

臼歯の遠心面用

13/14 【エクストラリジッド】

#7	(サテンスチールカラー)	SG13/14ER7	5,600円
----	--------------	-------------------	---------------



15/16 (FIT11/12) 【スタンダード】

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SG15/169E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SG15/16C8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SG15/167	5,300円
#6	(サテンスチール)	SG15/166	5,300円
#2	(角柄)	SG15/16	4,900円

15/16 (FIT11/12) 【リジッド】

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SG15/16R9E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SG15/16RC8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SG15/16R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SG15/16R6	5,300円
#2	(角柄)	SGR15/16R	4,900円

臼歯の近心面用
(シャンクの角度が
13/14と同じです)



17/18 (FIT13/14) 【スタンダード】

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SG17/189E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SG17/18C8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SG17/187	5,300円
#6	(サテンスチール)	SG17/186	5,300円
#2	(角柄)	SG17/18	4,900円

17/18 (FIT13/14) 【リジッド】

#9E2	(エバーエッジ EE2.0)	SG17/18R9E2	5,800円
#C8E2	(レジン8カラー EE2.0)	SG17/18RC8E2	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SG17/18R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SG17/18R6	5,300円
#2	(角柄)	SGR17/18R	4,900円


臼歯の遠心面用
(ブレードはやや小さく、
第一シャンクは、やや長めに
デザインされています)



グレイシーキュレット アフターファイブ

GRACEY CURETTE AFTER FIVE

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

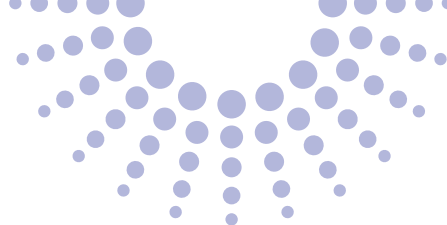

★ おすすめ品



1/2【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SRPG1/29	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRPG1/2C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRPG1/27	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRPG1/26	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG1/2	4,900円

1/2【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SRP1/2R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRP1/2RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRP1/2R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRP1/2R6	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG1/2R	4,900円



3/4【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SRPG3/49	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRPG3/4C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRPG3/47	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRPG3/46	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG3/4	4,900円

3/4【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SRP3/4R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRP3/4RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRP3/4R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRP3/4R6	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG3/4R	4,900円



★ 5/6【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SRPG5/69	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRPG5/6C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRPG5/67	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRPG5/66	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG5/6	4,900円

5/6【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SRP5/6R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRP5/6RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRP5/6R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRP5/6R6	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG5/6R	4,900円

5/6【エクストラリジッド】

#7	(サテンスチールカラー)	SRP5/6E7	5,600円
----	--------------	----------	--------



★ 7/8【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SRPG7/89	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRPG7/8C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRPG7/87	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRPG7/86	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG7/8	4,900円

7/8【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SRP7/8R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRP7/8RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRP7/8R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRP7/8R6	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG7/8R	4,900円

7/8【エクストラリジッド】

#7	(サテンスチールカラー)	SRP7/8E7	5,600円
----	--------------	----------	--------



★ 11/12 【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SRPG11/129	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRP11/12C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRPG11/127	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRPG11/126	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG11/12	4,900円

11/12 【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SRP11/12R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SP11/12RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRP11/12R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRP11/12R6	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG11/12R	4,900円

11/12 【エクストラリジッド】

#7	(サテンスチールカラー)	SRP11/12E7	5,600円
----	--------------	-------------------	---------------



★ 13/14 【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SRPG13/149	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRP13/14C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRPG13/147	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRPG13/146	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG13/14	4,900円

13/14 【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SRP13/14R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SP13/14RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRP13/14R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRP13/14R6	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG13/14R	4,900円

13/14 【エクストラリジッド】

#7	(サテンスチールカラー)	SRP13/14E7	5,600円
----	--------------	-------------------	---------------



15/16 (FIT11/12) 【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SRPG15/169	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SRP15/16C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRPG15/167	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRPG15/166	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG15/16	4,900円

15/16 (FIT11/12) 【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SRP15/16R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SP15/16RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SRP15/16R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SRP15/16R6	5,300円
#2	(角 柄)	SRPG15/16R	4,900円



リジッドシャンクは、スタンダードシャンクに比べたくて頑丈です。柔軟性に乏しいのでシックルやホーなどのスケーラーを使用せずに強固な歯石を除去することができます。

エクストラリジッドシャンクのグレイシーキュレットは強固な歯石除去、全体のスケーリングおよび最初のディブライドメントに適しています。ブレードはスタンダードシャンクのグレイシーキュレットと同じサイズです。



グレイシーキュレット ミニファイブ

GRACEY CURETTE MINI FIVE

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブの半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

★ おすすめ品



1/2 【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SAS1/29	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SAS1/2C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS1/27	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS1/26	5,300円
#2	(角 柄)	SAS1/2	4,900円

1/2 【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SAS1/2R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SS1/2RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS1/2R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS1/2R6	5,300円
#2	(角 柄)	SAS1/2R	4,900円



3/4 【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SAS3/49	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SAS3/4C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS3/47	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS3/46	5,300円
#2	(角 柄)	SAS3/4	4,900円

3/4 【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SAS3/4R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SS3/4RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS3/4R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS3/4R6	5,300円
#2	(角 柄)	SAS3/4R	4,900円



★ 5/6 【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SAS5/69	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SAS5/6C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS5/67	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS5/66	5,300円
#2	(角 柄)	SAS5/6	4,900円

5/6 【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SAS5/6R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SS5/6RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS5/6R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS5/6R6	5,300円
#2	(角 柄)	SAS5/6R	4,900円



★ 7/8 【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SAS7/89	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SAS7/8C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS7/87	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS7/86	5,300円
#2	(角 柄)	SAS7/8	4,900円

7/8 【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SAS7/8R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SS7/8RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS7/8R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS7/8R6	5,300円
#2	(角 柄)	SAS7/8R	4,900円



★ 11/12 【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SAS11/129	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SAS11/12C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS11/127	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS11/126	5,300円
#2	(角 柄)	SAS11/12	4,900円

11/12 【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SAS11/12R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SS11/12RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS11/12R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS11/12R6	5,300円
#2	(角 柄)	SAS11/12R	4,900円



★ 13/14 【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SAS13/149	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SAS13/14C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS13/147	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS13/146	5,300円
#2	(角 柄)	SAS13/14	4,900円

13/14 【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SAS13/14R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SS13/14RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS13/14R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS13/14R6	5,300円
#2	(角 柄)	SAS13/14R	4,900円





15/16 (FIT11/12) 【スタンダード】

#9	(エバーエッジ)	SAS15/169	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SAS15/16C8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS15/167	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS15/166	5,300円
#2	(角 柄)	SAS15/16	4,900円

15/16 (FIT11/12) 【リジッド】

#9	(エバーエッジ)	SAS15/16R9	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SS15/16RC8	5,300円
#7	(サテンスチールカラー)	SAS15/16R7	5,300円
#6	(サテンスチール)	SAS15/16R6	5,300円
#2	(角 柄)	SAS15/16R	4,900円

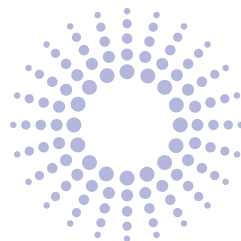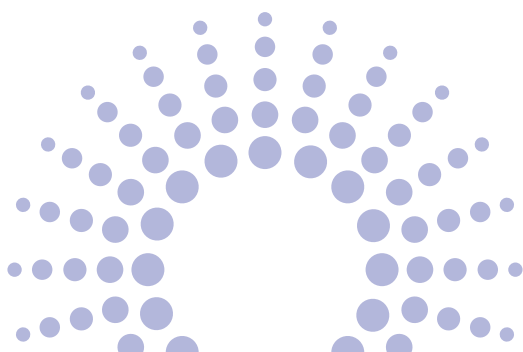



グレーシーキュレット マイクロミニファイブ

GRACEY CURETTE MICRO MINI FIVE

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルより30%細いため、歯周ポケット内を傷つけず挿入、操作。

歯肉損傷のリスクと歯肉縁下作業時の不快感を軽減し、歯周部の複雑な歯根の形態や前歯部の狭いポケット、根部岐部、歯根の凹みにも適しています。

超音波スケーラー等、パワースケーラー使用後の取り残しにも有効です。

★ おすすめ品



★ 1/2 [リジッド]
#9 (エバーエッジ)

SMS1/29 5,800円



7/8 [リジッド]
#9 (エバーエッジ)

SMS7/89 5,800円




★ 11/12 [リジッド]
#9 (エバーエッジ)


SMS11/129 5,800円



★ 13/14 [リジッド]
#9 (エバーエッジ)

SMS13/149 5,800円

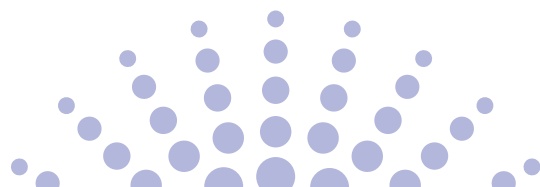

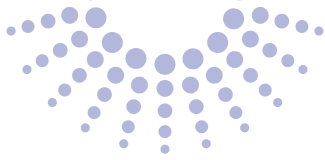

パティソン グレーシー ライト キュレット グレーシーキュレット オオタイプ


PATTISON GRACEY LITE / GRACEY CURETTE OHTA TYPE

パティソン グレーシー ライト キュレット


アンナ・パティソン先生が開発した、短く・薄く・小さく、そして60°に傾いたリジッドタイプのブレードは狭いポケットへも容易にアクセスすることができるように設計されています。




1/2
#9E2 (エバーエッジ EE2.0) **SG1/29APE2** 5,800円

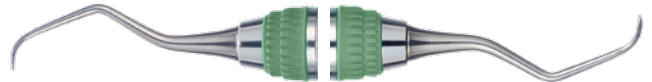

7/8
#9E2 (エバーエッジ EE2.0) **SG7/89APE2** 5,800円

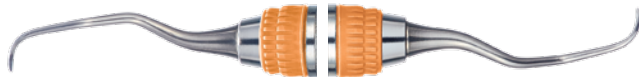

11/12
#9E2 (エバーエッジ EE2.0) **SG11/129APE2** 5,800円

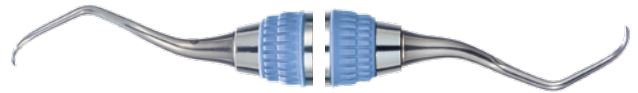

13/14
#9E2 (エバーエッジ EE2.0) **SG13/149APE2** 5,800円

オオタイプ

ブレードの長さがグレーシーキュレットオリジナルの2/3になったタイプです。日本人の小さな歯牙用に開発されました。



1/2
#2 (角柄) **SG01/2** 5,300円



3/4
#2 (角柄) **SG03/4** 5,300円



5/6
#2 (角柄) **SG05/6** 5,300円



7/8
#2 (角柄) **SG07/8** 5,300円



9/10
#2 (角柄) **SG09/10** 5,300円



11/12
#2 (角柄) **SG011/12** 5,300円



13/14
#2 (角柄) **SG013/14** 5,300円





レジン8カラー

RESIN 8 COLORS

レジン8カラーは口腔内での適応部位を明確に識別できるよう、ハンドルがカラーコード化されたスクレーラー群です。レジン製のハンドルは軽量かつ太い直径で握りやすく、刃部はエパーエッジ(EVEREDGE®)テクノロジーを採用することでエッジのシャープさと持続性が長持ちします。

グレーシーキュレット



1/2 前歯部

オリジナル	SG1/2C8E2	5,300円
アフターファイブ	SRPG1/2C8	5,300円
ミニファイブ	SAS1/2C8	5,300円

1/2 前歯部 リジッド

オリジナル	SG1/2RC8E2	5,300円
アフターファイブ	SRP1/2RC8	5,300円
ミニファイブ	SS1/2RC8	5,300円

3/4 前歯部

オリジナル	SG3/4C8E2	5,300円
アフターファイブ	SRPG3/4C8	5,300円
ミニファイブ	SAS3/4C8	5,300円

3/4 前歯部 リジッド

オリジナル	SG3/4RC8E2	5,300円
アフターファイブ	SRP3/4RC8	5,300円
ミニファイブ	SS3/4RC8	5,300円



* 5/6 前歯および小臼歯部

オリジナル	SG5/6C8E2	5,300円
アフターファイブ	SRPG5/6C8	5,300円
ミニファイブ	SAS5/6C8	5,300円

5/6 前歯および小臼歯部 リジッド

オリジナル	SG5/6RC8E2	5,300円
アフターファイブ	SRP5/6RC8	5,300円
ミニファイブ	SS5/6RC8	5,300円



* 7/8 臼歯部の頬舌側面

オリジナル	SG7/8C8E2	5,300円
アフターファイブ	SRPG7/8C8	5,300円
ミニファイブ	SAS7/8C8	5,300円

7/8 臼歯部の頬舌側面 リジッド

オリジナル	SG7/8RC8E2	5,300円
アフターファイブ	SRP7/8RC8	5,300円
ミニファイブ	SS7/8RC8	5,300円

9/10 臼歯部の頬舌側面 根分岐部

オリジナル	SG9/10C8E2	5,300円
-------	-------------------	--------



* 11/12 臼歯部の近心面

オリジナル	SG11/12C8E2	5,300円
アフターファイブ	SRP11/12C8	5,300円
ミニファイブ	SAS11/12C8	5,300円

11/12 臼歯部の近心面 リジッド

オリジナル	SG11/12RC8E2	5,300円
アフターファイブ	SRP11/12RC8	5,300円
ミニファイブ	SS11/12RC8	5,300円

15/16 (FIT11/12) 臼歯部の近心面

(シャンクの角度が13/14と同じです)

オリジナル	SG15/16C8E2	5,300円
アフターファイブ	SRP15/16C8	5,300円
ミニファイブ	SAS15/16C8	5,300円

15/16 (FIT11/12) 臼歯部の近心面 リジッド

(シャンクの角度が13/14と同じです)

オリジナル	SG15/16RC8E2	5,300円
アフターファイブ	SP15/16RC8	5,300円
ミニファイブ	SS15/16RC8	5,300円



* 13/14 臼歯部の遠心面

オリジナル	SG13/14C8E2	5,300円
アフターファイブ	SRP13/14C8	5,300円
ミニファイブ	SAS13/14C8	5,300円

13/14 臼歯部の遠心面 リジッド

オリジナル	SG13/14RC8E2	5,300円
アフターファイブ	SP13/14RC8	5,300円
ミニファイブ	SS13/14RC8	5,300円

17/18 (FIT13/14) 臼歯部の近心面

(ブレードはやや小さく、第一シャンクはやや長めにデザインされています)

オリジナル	SG17/18C8E2	5,300円
-------	--------------------	--------

17/18 (FIT13/14) 臼歯部の近心面 リジッド

(ブレードはやや小さく、第一シャンクはやや長めにデザインされています)

オリジナル	SG17/18RC8E2	5,300円
-------	---------------------	--------



シグルスケーラー



前歯部

衛生士用 H6/H7	SH6/7C8E2	5,300円
衛生士用 H5/33	SH5/33C8E2	5,300円
ネビィ1	SCNEVI1C8E2	5,300円
センチニアル	SDH100C8	5,300円
モース 0/00	SM0/00C8	5,300円
前歯用 137	SN137C8	5,300円



臼歯部

臼歯用 204S	S204SC8E2	5,300円
臼歯用 204SD	S204SDC8E2	5,300円
ネビィ2	SCNEVI2C8E2	5,300円
ネビィ3	SCNEVI3C8E2	5,300円
ネビィ4	SCNEVI4C8E2	5,300円

ユニバーサルキュレット




コロンビア大学型

2R/2L	SC2R/2LC8	5,300円
4R/4L	SC4R/4LC8E2	5,300円
13/14	SC13/14C8E2	5,300円

ランガー

1/2	SL1/2C8	5,300円
3/4	SL3/4C8	5,300円
5/6	SL5/6C8	5,300円
17/18	SL17/18C8	5,300円

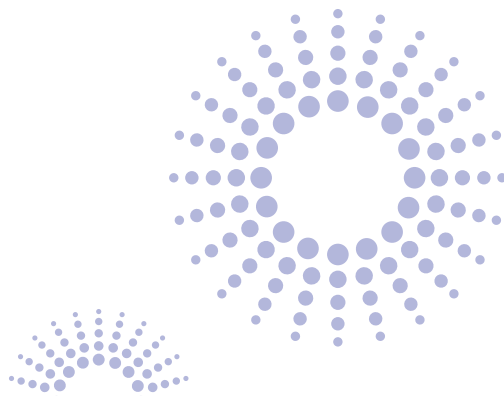




部位特定キュレット


AREA-SPECIFIC CURETTES

特定の部位に適合するようデザインされています。

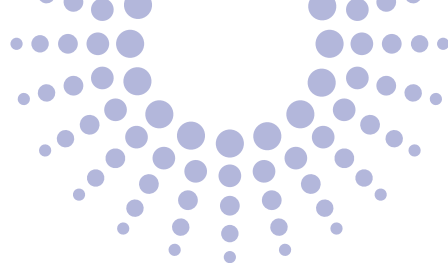

ビジョンカーベット

- ・ 50%短い湾曲したブレード
- ・ 5mmおよび10mmのシャンクマーク
- ・ ハンドル上にカッティングエッジ識別マーク(+)
- ・ ハンドル上に識別バンド。11/12はバンドが1個、13/14はバンドが2個 (#4ハンドルのみ)

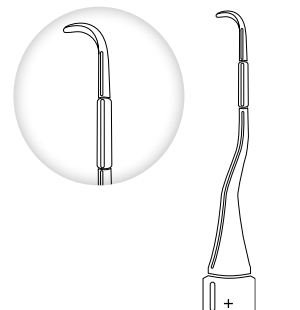

11/12
Vision Curvette 11/12

#6 (サテンスチール) **SGC11/126** 5,500円 臼歯の近心面および根分岐部用。



サブゼロ
Vision Curvette Sub-Zero

#6 (サテンスチール) **SGCSUB-06** 5,500円 長いシャンクが前歯部の深いポケットに届きます。



1/2
Vision Curvette 1/2

#6 (サテンスチール) **SGC1/26** 5,500円 前歯、小臼歯および隣接歯間部用。



13/14
Vision Curvette 13/14

#6 (サテンスチール) **SGC13/146** 5,500円 臼歯の遠心面および根分岐部用。

ハッチンソン



1/2 前歯用
HU1/2 Hutchinson

#2 (角柄) **SHU1/2** 4,900円



ディブライドメントキュレット

スケーリングやルートプレーニング後の仕上げに使用します。

分岐部および隅角部に適しています。



- ・ ブレード周囲がすべてカットイングエッジであるため、縦横斜めすべての方向へのプッシュまたはプルストロークが可能です。
- ・ シャンクが長いので深いポケットにも届きます。

※トリーシャ・オヘール衛生士の協力を得てデザインされました。



1/2 頬舌面用
1/2 O'Hehir Debridement Curette
#4 SOH1/2 5,300円



3/4 近遠心用
3/4 O'Hehir Debridement Curette
#4 SOH3/4 5,300円



5/6 前歯用
5/6 Anterior
#4 SOH5/6 5,300円

ファーケーションキュレット

根面のへこみおよび根分岐部用。

デマルコは前歯部舌側面のステイン除去にも適しています。



デマルコ 1
1 DeMarco Furcation Curette
#6 SDM16 5,800円



デマルコ 2
2 DeMarco Furcation Curette
#6 SDM26 5,800円





インプラケアⅡ

IMPLACARE® II SCALERS

インプラントのメンテナンス用インスツルメントです。チタン製アバットメントを傷つけるリスクに配慮しつつプラークや歯石を除去できます。



 おすすめ品

ユニバーサルキュレット

ブレード相当部の先端が丸みを帯びているのでインプラント周囲の全てのエリアの清掃が行えます。



インプラケアⅡ
ランガー 1/2
Implacare II LG Langer 1/2

 **キット**
(ハンドル1本&チップ12組)
(Tips with Handle Kit)
IMPLLG1/26 11,200円

チップ(チップ12組)
Refill Tips
IMPLLG1/2 9,600円



インプラケアⅡ
コロンビア大学型 4R/4L
Implacare II Columbia 4R/4L

 **キット**
(ハンドル1本&チップ12組)
(Tips with Handle Kit)
IMPL4R/4L6 11,200円


チップ(チップ12組)
Refill Tips
IMPL4R/4L 9,600円

シクルスケーラー

ブレード相当部は先端に向かって細くなっており、歯冠修復部の除石に適用です。



インプラケアⅡ
衛生士用 H6/H7
Implacare II H6/7

 **キット**
(ハンドル1本&チップ12組)
(Tips with Handle Kit)
IMPLH6/76 11,200円

チップ(チップ12組)
Refill Tips
IMPLH6/7 9,600円



インプラケアⅡ
臼歯用204S
Implacare II 204S

キット
(ハンドル1本&チップ12組)
(Tips with Handle Kit)
IMPL204S6 11,200円

チップ(チップ12組)
Refill Tips
IMPL204S 9,600円

キット アソート (ハンドル1本&チップ12組*)
Implacare II Assorted Tips Kit
IMPLSORT6 11,200円

チップ アソート 12組*
Implacare II Assorted Tips Refill Package
IMPLSORT 9,600円


*チップ:コロンビア大学型4R/4L×4組、
衛生士用 H6/H7×4組、臼歯用204S×4組

インプラケアⅡを使用してスケーリングした場合のアバットメント表面観

チタン製アバットメント表面の
高倍率レンズによる拡大図




研磨材を含むプラスチック製スケーラーによる25回のストローク後

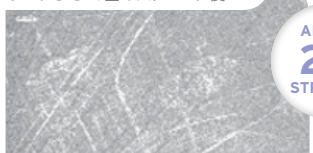

AFTER
25
STROKES

インプラケアによる
25回のストローク後

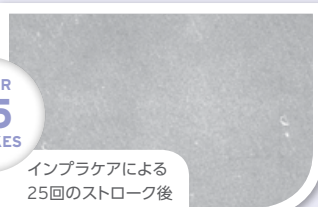



ホースケーラー／チゼルスケーラー

HOE SCALERS/CHISEL SCALERS

ホースケーラー

強固な歯石や付着物を砕いて、除去するのに使用します。
プルストロークで使用します。



センテニアル
Centennial Scaler

#9	(エバーエッジ)	SDH1009	5,800円
#C8	(レジン8カラー)	SDH100C8	5,300円

前歯部用のシクルスケーラーと
ホースケーラーの組み合わせ


※センテニアルの作業部は従来のエバーエッジが付与されていますが、
特別にパープル色のグリップが付いています。



ターナー 15
XS-15 Towner

#6	(サテンスチール)	SXS156	5,400円
----	-----------	---------------	---------------

前歯部舌側用

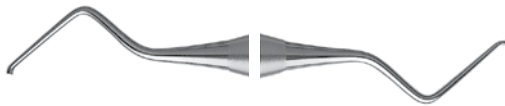

オーバン 6/7
6/7 Orban Mesial/Distal

#6	(サテンスチール)	S06/76	5,100円
----	-----------	---------------	---------------




オーバン 8/9
6/7 Orban Buccal/Lingual

#6	(サテンスチール)	S08/96	5,100円
----	-----------	---------------	---------------

チゼルスケーラー

下顎前歯のブリッジ状の歯石を除去するのに使用します。
プッシュストロークで使用します。

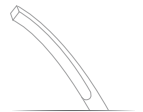

クッシング 62
62 Cushing

#1	(角柄)	SCU62	4,500円
----	------	--------------	---------------



ダービー・ペリー 5K/6K
DP5K/6K

#2	(角柄)	SDP5/6K	4,900円
----	------	----------------	---------------



ダービー・ペリー 9K/11K
DP9K/11K

#2	(角柄)	SDP9/11K	4,900円
----	------	-----------------	---------------



★ おすすめ品

強固な歯石や付着物を砕いて、除去するのに使用します。プルストロークで使用します。



ハーシュフェルト



頬舌側用 ハーシュフェルト 3/7
3/7 Hirschfeld Buccal/Lingual

#6 (サテンスチール) **FH3/76** 4,900円 頬舌側用



近遠心用 ハーシュフェルト 5/11
5/11 Hirschfeld Mesial/Distal

#6 (サテンスチール) **FH5/116** 4,900円 近遠心用



前歯用 ハーシュフェルト 9/10
9/10 Hirschfeld Anterior

#6 (サテンスチール) **FH9/106** 4,900円 前歯用

オーバン



頬舌側用 オーバン 10/11
10/11 Orban Buccal/Lingual

#6 (サテンスチール) **F010/116** 4,900円 頬舌側用



近遠心用 オーバン 12/13
12/13 Orban Mesial/Distal

#6 (サテンスチール) **F012/136** 4,900円 近遠心用



ダイヤモンドテック(DIAMONDTEC®)


- 強固な歯石除去に使用します。多方向へのストロークが可能です。
- 根分歧部(ファーケーション)や根面のへこみ部分のスクレーリングに適したサイズと形です。
- 両頭ですので、効果的なスクレーリングが行えます。
- 太いハンドルは人間工学的に握りやすいデザインで手根管症候群の症状緩和にも役立ちます。
- カラーリングにより、インストゥルメントが識別しやすくなります。



ネイバース*



近遠心用*

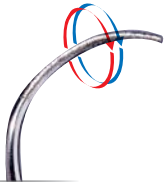


全面コーティング



★ **ネイバース** | Nabers
#7 (サテンスチールカラー) **SDCN7** 10,200円



★ **近遠心用** | Mesial/Distal
#7 (サテンスチールカラー) **SDCM/D7** 10,200円

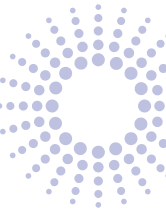

※出典:
L・J・ガーワトースキー、D・B・マクフォール、D・スタック:歯科衛生士のための手根管症候群予防法。
歯科衛生学会誌、1992年2月



インスツルメントシャープニング

INSTRUMENT SHARPENING




★ おすすめ品

★ サイドキック (SIDEKICK®)

サイドキックは、スケーラーやキュレットの定期的なシャープニングに使用します。正しいシャープニングを定期的に行うと、インスツルメントの寿命が長くなります。

- ・ ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応。持ち運びに便利なハンディサイズで、診察室のわずかなスペースでシャープニングすることができます。また、チェアサイドで即シャープニングすることができるなど場所を選びません。
- ・ 難しい技術を必要としない、簡単なシャープニングインスツルメントの第一シャックを第一シャックガイドに沿わせるだけの簡単操作で、シャープニングが可能です。
- ・ AC電源不要のコードレス仕様
オートクレーブ滅菌が可能なパーツを採用
シャープニングストーン、ガイドプレート、ガイドプレートスクリューは取り外すことができ、オートクレーブ滅菌が可能です。

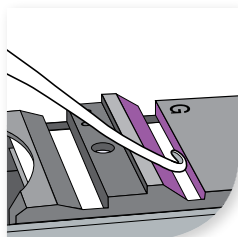

サイドキック シャープニングキット

SDKKIT 60,000円 付属品: セラミックストーン1個、プラスチックテストスティック1本、拡大レンズ1個、単3形アルカリ乾電池2本、取扱説明CD-ROM1枚、取扱説明書1冊

交換部品とアクセサリ

セラミックストーン セラミックストーン 粗目
SDKSTONEC SDKSTCOARS
3,700円 3,700円



サイドキックの
使い方を動画で
CHECK!!

ダイヤモンドシャープニングカード

NEW

- ・ 工業用ダイヤモンドを高品質なステンレススチールに均等にコーティングさせることで、インスツルメントのシャープニングに適した硬く滑らかな表面を作り出しました。
- ・ 耐久性のある表面は溝状のくぼみの発生を抑制し、繰り返し使用しても平らな表面を維持します。また、落下時にも損傷の恐れがありません。
- ・ 超音波洗浄器で容易に洗浄でき、高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)にも対応です。
- ・ クレジットカードサイズで薄型なので、処置セットと共に滅菌バッグやカセットに内に収納することが可能です。

ダイヤモンド
シャープニング
カード 超細目
DSCXFINE
6,500円

ダイヤモンド
シャープニング
カード 細目
DSCFINE
6,500円

ダイヤモンド
シャープニング
カード 中目
DSCMED
6,500円

ダイヤモンド
シャープニング
カード 3セット
DSCSET
17,000円



シャープニングの方法については、カタログのリファレンスセクションをご参照ください。



シャープニングストーン



アーカンサスストーン
円錐型 299
SS299
4,000円
超細目
(8.9 x 0.8cm)
オイル
ブレード内面用



アーカンサスストーン
円筒型 2
SS2
4,000円
超細目
(10 x 0.6cm)
オイル
ブレード内面用



セラミックストーン
円筒型
SSKC
4,900円
細目
(10 x 0.3cm)
水またはドライ



インディアストーン
309
SS309
4,000円
細目
(10 x 1.3 ~ 0.6 x 0.6 ~
0.3cm)
オイル



ファイルシャープナーT
FST
7,500円
(全長 10.8cm)



ファイルシャープナー
FS
5,800円
(全長 14cm)



★ プラスチックテスト
スティック 6入
PTS
2,400円
(7.6 x 0.6cm)
オートクレーブ可
6本入



セラミックストーン
ルクセーティング
SSLUX
3,800円
細目
(10.16 x 0.95cm)
水またはドライ
ルクセーティング
エレベーター用



★ デュアルストーン
SSDGRIT
5,000円
(12 x 2.5 x 1.6cm)
ドライ
極度に鈍化したスケーラーの
研磨や修正用の粗目の青色面と、
日常のメンテナンス用の細目の
白色面をひとつに組み合わせた
セラミックストーンです。



★ おすすめ品

シャープニングストーン



インディアストーン 1
SSF1
4,000円
細目
(10 x 2.5 x 1.3cm)
水またはオイル



セラミックストーン 3C
SS3C
4,000円
中目
(7.6 x 3.2 x 0.6cm)
水またはドライ



★ アーカンサスストーン
フラット 4
SS4
4,000円
細目
(10 x 2.5 x 0.6cm)
オイル



★ アーカンサスストーン
ベイツ 5
SS5
13,000円
細目
(10 x 3.8 x 1.3cm)
オイル



インディアストーン
ウェッジ 6
SS6
4,000円
中目
(11.4 x 4.8 x 0.9 ~ 0.3cm)
水またはオイル



アーカンサスストーン
ウェッジ 6A
SS6A
4,000円
細目
(11.4 x 4.8 x 0.9 ~ 0.3cm)
オイル



アーカンサス
ストーン 22
SSAS22
4,000円
超細目
(5.7 x 2.2 x 0.5cm)
オイル



インディアストーン
MS22
SSMS22
4,000円
中目
(5.7 x 2.2 x 0.5cm)
水またはオイル



ハンドピース用ストーン

粗タイプ。ホワイト酸化アルミナ製です。



HP用 301
SS301
3,000円
φ6 x 10mm



HP用 303
SS303
3,000円
φ6 x 13mm



HP用 304
SS304
3,000円
φ6 x 16mm



HP用 305
SS305
3,000円
φ6 x 19mm



HP用 300
SS300
3,000円
φ6 x 6mm



HP用 302
SS302
3,000円
φ3 x 3mm

関連製品



シャープニングキット
アーカンサス

SSKITA
11,000円

- ・アーカンサスストーン フラット 4
- ・アーカンサスストーン 円錐型 299
- ・プラスチックテストスティック (5本)
- ・シャープニングオイル
- ・拡大レンズ



シャープニングキット
セラミック


SSKITC
11,000円

- ・セラミックストーン 3C
- ・セラミックストーン 円筒型
- ・プラスチックテストスティック (5本)
- ・拡大レンズ

★ シャープニングオイル

SSO
2,500円

あらかじめシャープニング
ストーンに滴下しておく
と金属粉が滞のを防ぎます。
また摩擦熱を軽減します。

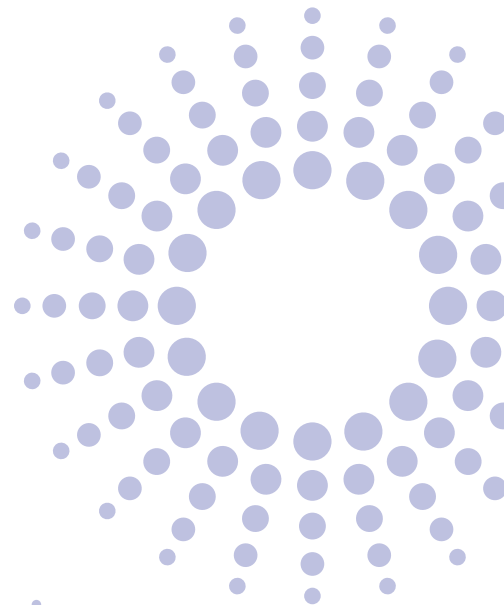



キュレット・スケーラー

基本的なスケーラーとキュレットの拡大模型です。丈夫なイミュニティスチール (Immunity Steel®) 製で、取り外しのできるディスプレイ台に取り付けられています。学生が重要なインスツルメントの形態やデザインを学習し、使用方法やメンテナンスを理解するのに役立ちます。模型の高さは、30.5cmです。



教育用モデル
シングルスケーラー
MH6
LSMH6
15,000円



教育用モデル
コロンビア
キュレット 13
LSM13
15,000円



教育用モデル
グレイシー
キュレット 14
LSM14
15,000円



教育用モデル
ジャケット
スケーラー 30
LSM30
15,000円

シャープニング器材



教育用モデル
プラスチック
テストスティック
LPTS
4,000円
29.2cm



教育用モデル
シャープニング
ストーン 4
LSS4
7,700円
7.6 x 28 x 19cm

ダリンズツルメント



ダリンズツルメント 練習用 H5/33
#6 (サテンスチール) DSH5/336 3,000円



ダリンズツルメント 練習用 SG13/14
#6 (サテンスチール) DSG13/146 3,000円

