



HU-FRIEDY SATIN STEEL® XTS® コンポジット練成充填器XTSの特徴

進化した技術と革新的なデザインの結実 ——ヒューフレディ社製 XTSコンポジット練成充填器

ヒューフレディ社のコンポジット練成充填器XTSは充填材に粘着しにくく、また変色させることもなくコンポジット充填が可能です。

特徴的な黒色の仕上げ

器材、歯牙の色調、充填材という三者間のコントラストを高めます。黒色の仕様ははがれたり、変色したりしません。

把持しやすい、太く軽量のハンドルデザイン




使用後の洗浄が簡単、快適な使い心地、手指の疲労を軽減、操作性を向上します。*1

上質な職人技、種類豊富なデザイン

全てのコンポジット充填に必要な卓越したパフォーマンスと幅広い種類のデザインをご提供します。

窒化アルミチタン(AITiN)コーティング

窒化アルミチタンコーティング(AITiN)はチタンコーティングと比較して、常に強固でなめらか、べたつきが少ないと研究で明らかになっています。ヒューフレディ社のコンポジット練成充填器XTSはより長くご愛用いただけるよう、イミューニティスチール^{※2}で作られています。

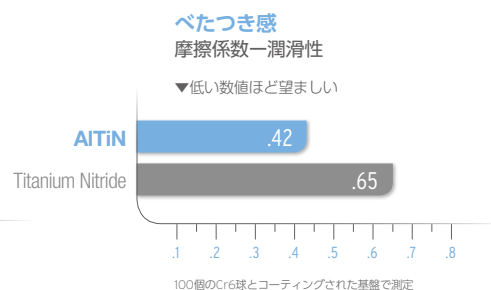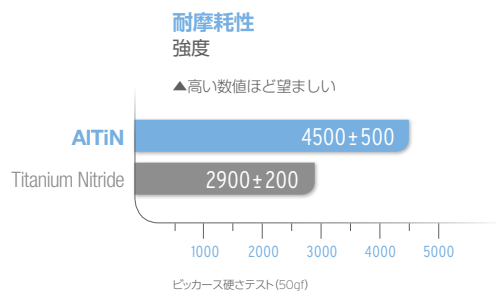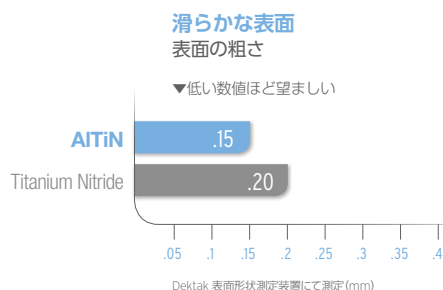

ゴールドスタイン フレキシション 1

細いパドルと小型コンデンサーの組合せ
初期充填や形態付与に使用
1級~3級窩洞向き

TNCIGT1
¥5,100

*1 資料:Gerwatowski, L.J., McFall, D.B., Stach, D.: Carpal Tunnel Syndrome; Risk Factors and Preventive Strategies for the Dental Hygienist. Journal of Dental Hygiene, February 1992.

*2 イミューニティスチールとは:ヒューフレディ社で独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金です。繰り返し使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。

How the best perform

Hu-Friedy

おすすめのコンポジット 練成充填器XTS比較表

ゴールドスタイン フレキシシン 2

1の大型タイプ
充填と形態修正に使用
1級～3級窩洞向き

TNCIGFT2
¥5,100



ゴールドスタイン フレキシシン 3

エキストラフレックス
フレアパドル型
形態修正に使用
3、4級窩洞向き

TNCIGFT3
¥5,100



ゴールドスタイン フレキシシン 4

エキストラフレックス
パドル型
臼歯部近遠心用

TNCIGFT4
¥5,100



ゴールドスタイン フレキシシン ミニ4

エキストラフレックス
4のミニタイプ
アクセスしにくい部位の
充填や形態付与に使用

TNCIGFTMI4
¥5,100



ゴールドスタイン マイクロ

それぞれ90°と110°の角度
が付与された細い先端で、
少量のステイン材やオペー
ク材の塗布に使用します。

TNGMPI
¥5,100



G4/5

臼歯部近遠心および
隣接歯間部用
2,5級窩洞向き

TNPFIG4/5
¥5,100



8A

唇側用

TNPF18A
¥5,100



BB27/29

小窩裂溝や咬合面形成用

TNBB27/29
¥5,100



W3

中型ブレードと
小型コンデンサーの組合せ
1～5級窩洞向き

TNPFIW3
¥5,100



IPC

極薄型ブレード
2～5級窩洞向き

TNCVIPC
¥5,100



A6

大型で薄型のブレード
ベニア形成や広範囲の
形態修正用
2～5級窩洞向き

TNPFIA6
¥5,100



ボゴシアン AB1

薄型ナイフとブレードの
組み合わせ
歯頸部での操作性が容易
3～5級窩洞向き

TNPF1AB1
¥5,100



フリードマン “ダックヘッド”

臼歯部咬合面用

TNPCCI
¥5,100



ラドモア 3

小型と中型コンデンサーの
組合せ

TNBBL3
¥5,100



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:コンポジット練成充填器(一般名称:歯科用充填器)医療機器届出番号:13B3X10195G10104
●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2019年10月1日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
©2019 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-030/J/1019

Hu-Friedy