


SCISSORS

はさみ

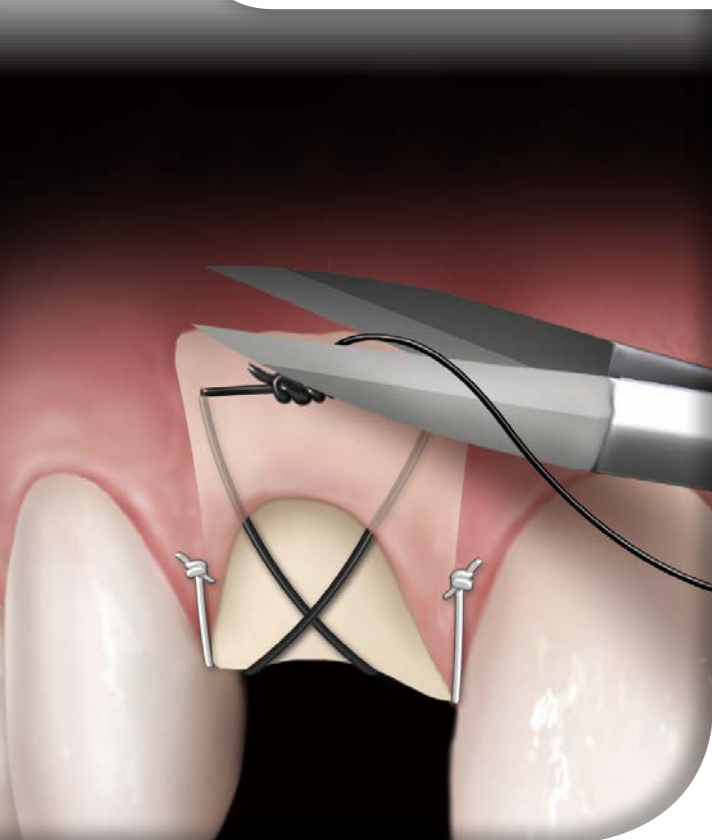

はさみの選択方法

歯肉用はさみ：抜歯・フラップオペ時の肉芽組織や歯肉の切除等に使用

- 鋭角な先端：縫合糸や歯肉・粘膜に使用
- 丸みのある先端：膜にテンションをかけながら操作する事により剥離する際に使用

縫合糸用はさみ：縫合糸のカットに使用

一般外科用：術中のガーゼカットに使用

包帯用はさみ：包帯のカットに使用

金冠用はさみ：補綴治療でクラウンやブリッジの支台歯形成時に圧排糸で歯肉圧排する際のカットや乳歯冠作成時に使用

ヒューフレディ製はさみの種類

スタンダード …シルバーハンドル

高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。数種類はギザ付きになっており、歯肉・粘膜を把持しやすいデザイン。

スーパーカット …ハンドルの片方のみゴールド色


これは歯肉・粘膜にダメージを与えにくく滑らかな切り口が特徴。作業部の一方はカッティングブレードになっておりカミソリの刃のようなシャープさ、もう片方は歯肉・粘膜を確実に把持できるようギザ付き。

パーマシャープ (PERMA SHARP®) …ゴールドハンドル

2本の先端の刃先にタングステンカーバイトのブレードを付与、滑らかな切れ味と高い耐久性が特徴。

ブラックライン (BLACK LINE®) …ブラックボディ

高性能な黒色コーティングは、切れ味の劣化を抑制し、接触する粘膜の滑りを改善、またライトの乱反射を抑制し、粘膜下においても明確な視野を確保します。

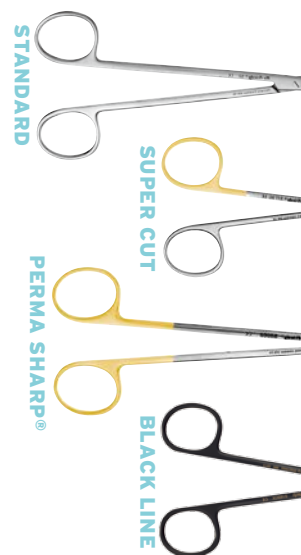

はさみ ゴールドマンフォックス 曲 16

〈ギザ付ブレード1枚〉
ヒンジから先端までが長くなっており、
空隙の狭い隣接部にも
挿入しやすいデザインです。

S16SCX (ブラックライン) 13.5cm
¥25,000

S16SC (スーパーカット) 12.5cm
¥18,000

S16 (スタンダード) 12.5cm
¥15,700



はさみ ラグランジュ 曲 14

〈ギザ付ブレード1枚〉
先端→ヒンジ→リングにかけて**S字状の
復屈曲**になっており、**前歯部唇側**での使用の際にも口唇を巻き込みにくくなっています。


S14SCX (ブラックライン) 11.5cm
¥25,000

S14SC (スーパーカット) 11.5cm
¥22,000

S14 (スタンダード) 11.5cm
¥16,600



ギザ付：使用時に滑らないように片側のブレードにギザを付けています。

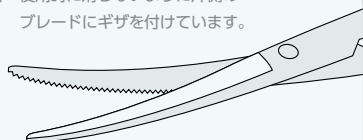

How the best perform

Hu-Friedy®

はさみ アイリス 直 17

広い用途に対応し、**縫合糸のカットや
粘膜・歯肉の切除**にも使用できます。

S17SCX (ブラックライン)
11.5cm ギザ付ブレード1枚
¥25,000

S17SC (スーパーカット)
11.5cm ギザ付ブレード1枚
¥16,800

S17 (スタンダード)
11.5cm ギザなし
¥12,200



はさみ アイリス 曲 18

広い用途に対応し、**縫合糸のカットや
粘膜・歯肉の切除**にも使用できます。

S18SCX (ブラックライン)
11.5cm ギザ付ブレード1枚
¥25,000

S18SC (スーパーカット)
11.5cm ギザ付ブレード1枚
¥16,800

S18 (スタンダード)
11.5cm ギザなし
¥12,200



はさみ パーマシャープ アイリス 直 5082

パーマシャープ加工されており、
滑らかで確実な切れ味と高い耐久
性が特徴です。

S5082
11.5cm ギザなし
¥41,000



はさみ パーマシャープ アイリス 曲 5083

パーマシャープ加工されており、
滑らかで確実な切れ味と高い耐久
性が特徴です。

S5083
11.5cm ギザなし
¥41,000



はさみ 縫合用 ヒューフレディ 13S

縫合糸のカット専用で、
このほかに長さ15cmのS13もあります。

S13S
12cm
¥14,400



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:はさみ 歯肉用(一般的名称:歯科用歯肉はさみ) 医療機器届出番号:1383X10195G19101

販売名:はさみ(一般的名称:はさみ) 医療機器届出番号:1383X10195G4101 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)

●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2017年5月10日現在のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、

または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy

©2017 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-078/J0517

Hu-Friedy