

TISSUE PLIERS

ティッシュプライヤー



ティッシュプライヤーとは?

歯肉弁挙上時や縫合時、また歯肉切除時に歯肉を把持したり、微小な組織を取り除く際に使用します。

把持部の違い

ヒューフレディ社のティッシュプライヤーには、歯肉を確実に把持できるように先端部分に特徴があります。また、ハンドル部分の外側には滑り止めの溝が刻まれています。

プレーン

先端の内側に、水平方向に溝が刻まれており、**デリケートな組織**を把持してもダメージを起こしにくくなっています。

1×2

先端は一方が爪でもう片方がくぼみになっており、凸凹状で厚みのある歯肉でも**確実に把持**できます。


マルチ

先端の内側に複数の凸凹があり、**弾力のある歯肉でも確実に把持**します。

※ティッシュプライヤーには**スタンダード**と、先端の内側にタングステンカーバイドを貼り付けて耐久性を向上させた**パーマシャープ(PERMA SHARP®)**の2種類があり、パーマシャープは1回のみ張替が可能です。

ティッシュプライヤー パーマシャープ アドソン 5041 無鉤

PERMA
SHARP®
パーマシャープ

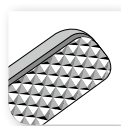

〈プレーン・長さ12.5cm〉

先端は直で、上顎前歯部のような審美領域の処置でも、歯肉にダメージを与えることなくスリップせずに**薄い歯肉でも把持**します。

TP5041

¥24,600

ティッシュプライヤー アドソン 41 無鉤





〈プレーン・長さ12cm〉

先端は直で、上顎前歯部のような審美領域の処置でも、歯肉にダメージを与えることなくスリップせずに**薄い歯肉でも把持**します。**内側には水平方向に溝**があります。

TP41


¥9,100

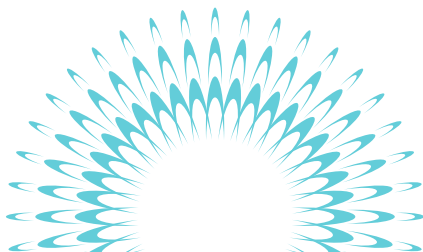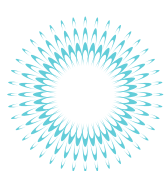

How the best perform

Hu-Friedy

ティッシュプライヤー パーマシャープ
アドソン 5042 有鉤

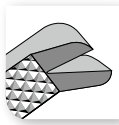

〈1×2・長さ12cm〉

先端は直で、一方に爪がありもう片方にはその爪を受け止めるくぼみがあって**凸凹にデザイン**されています。**厚みのある歯肉でも確実に把持**することができます。

TP5042

¥28,100

ティッシュプライヤー
アドソン 42 有鉤



〈1×2・長さ12cm〉

先端は直で、一方に爪がありもう片方にはその爪を受け止めるくぼみがあって**凸凹にデザイン**されています。**厚みのある歯肉でも確実に把持**することができます。

TP42

¥9,100

ティッシュプライヤー パーマシャープ
アドソンブラウン 5043 マルチ




〈マルチ・長さ12.5cm〉

先端は直で、**内側に山谷状の凸凹**があり、**厚い歯肉でも広い面積で把持**できます。

TP5043

¥29,000

ティッシュプライヤー
アドソンブラウン 43 マルチ

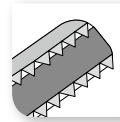

〈マルチ・長さ12.5cm〉

先端は直で、**内側に山谷状の凸凹**があり、**厚い歯肉でも広い面積で把持**できます。

TP43

¥12,800

ティッシュプライヤー
クレイマー・ネビンズ 曲 有鉤




〈1×2・長さ12cm〉

先端は曲で、一方に爪がありもう片方にはその爪を受け止めるくぼみがあって**凸凹にデザイン**されています。

TPKN

¥11,800

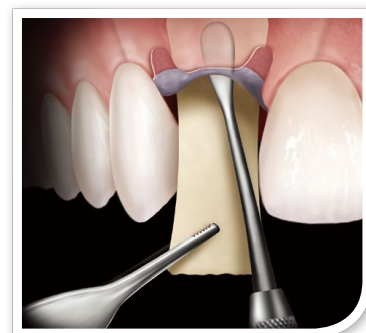

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:ティッシュプライヤー(一般的名称:歯科治療用ピンセット)医療機器届出番号:1383X10195G20101
●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2016年8月1日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
©2016 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-079J/0816

