

# NEEDLE HOLDERS

## 持針器



### 持針器とは?

切開・剥離をとまなう外科処置の最後には縫合・閉創を行います。その際に縫合針を把持する目的で持針器が使用されます。連結部であるヒンジでは、ハンドルからの力を適切に先端へと伝達することが要求されます。

ヒンジ部分には汚れが残り、その乾燥不良からサビの原因になりますので、使用後の洗浄・滅菌時には洗剤で付着物を落とし、オートクレープ内で無理な圧力がかからないように、必ず開いた状態で処理をしていただきます。

### 把持部の違い


ヒューフレディ社の持針器にはスタンダードタイプとパーマシャープタイプがあります。

#### スタンダード

ステンレス製で、ステンレス製の縫合針に対して過度な力を加えることがなく、適切に把持します。

#### パーマシャープ(PERMA SHARP®)

ダイヤモンドとほぼ同程度の硬度を有するタングステンカーバイドを貼り付けることで耐久性を向上させています(1回のみ張替可能)。パーマシャープ加工のものは、ハンドルのリングが金色で、識別しやすくなっています。また、複数のラチェットがあり、把持の圧力を適度に保ち、スムーズに解放します。

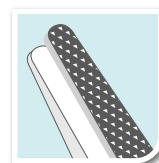

### 持針器 カストロビージョ 直 5020



〈全長14cm〉  
ベーシックなカストロビージョです。  
適用縫合糸:  
5-0・6-0・7-0

**NH5020**  
¥70,000


### 持針器 カストロビージョ 曲 5021



〈全長14cm〉  
ベーシックなカストロビージョです。**先端がカーブ**しているので、遊離端欠損部へもアプローチしやすく縫合できます。

適用縫合糸:  
5-0・6-0・7-0

**NH5021**  
¥70,000

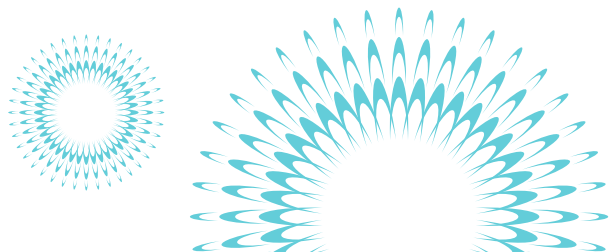

How the best perform

**Hu-Friedy®**

### 持針器 ダーフ 5032



〈全長11.5cm〉  
柄が短いコンパクトタイプ。  
適用縫合糸:  
3-0・4-0・5-0

**NH5032**  
¥24,700

### 持針器 クライルウッド 5038



〈全長15cm〉  
ヒンジ部分から先端までの長さが比較的短く、緩みの少ない**外科結びが可能**です。

適用縫合糸:  
3-0・4-0・5-0・6-0

**NH5038**  
¥24,500

### 持針器 スウェーデンパターン 5052



〈全長15cm〉  
シャンクには適度な柔軟性があり、**デリケートな縫合**に使用できます。

適用縫合糸:  
5-0・6-0・7-0・8-0

**NH5052**  
¥31,000

### 持針器 マシューコーチャー 5074



〈全長14cm〉  
強固なラチェットにより確実に縫合針を把持し、**厚みのある歯肉の縫合**に使用できます。

適用縫合糸:  
1-0・2-0・3-0・4-0

**NH5074**  
¥33,000

### 持針器 マシュー



〈全長14cm〉  
把持部はスタンダードタイプ。強固なラチェットにより確実に縫合針を把持し、**厚みのある歯肉の縫合**に使用できます。

適用縫合糸:  
1-0・2-0・3-0・4-0

**NHM**  
¥24,500

### 持針器 マイクロカストロビージョ直 5026R

〈全長18cm〉  
先端には**ダイヤモンドダスト**加工され、ハンドルは丸みのあるデザインのため、**術者の掌中内での回転**も容易です。

適用縫合糸:  
6-0・7-0・8-0・9-0

**NHM-5026R**  
¥52,000



スリッしにくい  
ハンドルで確実に  
把持!!

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:持針器(一般的名称:持針器)医療機器届出番号:1383X(0195G)6101  
●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2017年6月1日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy  
©2017 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-080/J0617\_K0

**Hu-Friedy**