


HEMOSTATS

止血鉗子

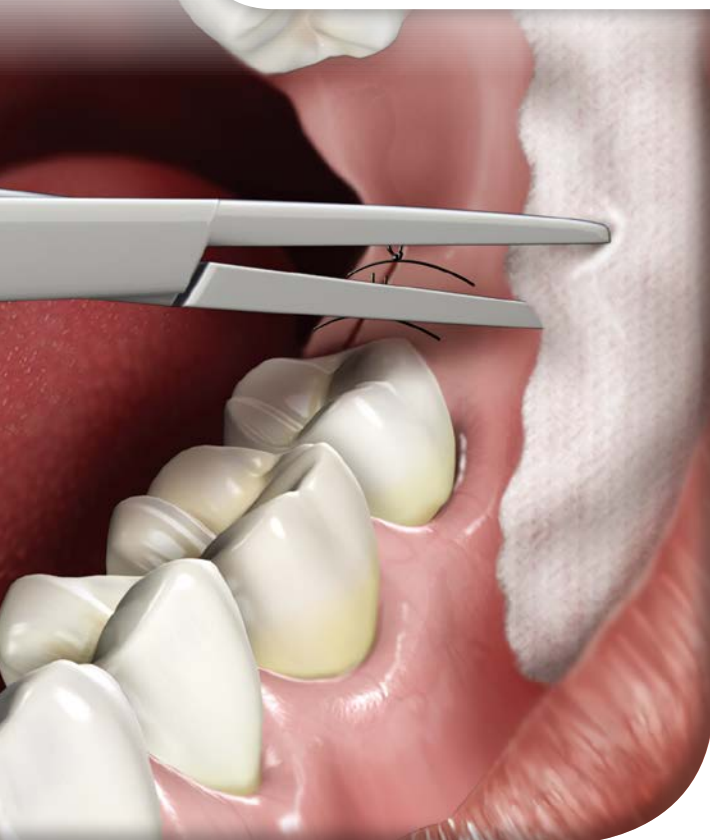

止血鉗子とは?

止血鉗子とは、血管をはさんで止血したり、微小な組織や残根を取り出したり、縫合糸を絡ませて歯肉弁を反転させておく際にも使用します。持針器同様、先端部・ヒンジ・シャンク・ハンドル・ラチェットからできており形状も似ていますが、止血鉗子は縫合針を把持する目的ではデザインされていないため、持針器に比べると先端部分が細長くなっています。また、先端内側の滑り止めも粘膜を把持するために水平方向に溝が刻まれているために、針を把持することはできません。

把持部の違い

ヒューフレディ社の止血鉗子には、その用途に応じて様々な形状や大きさのものが用意されています。ただし、持針器と異なり先端部分がよりデリケートなデザインになっているため、タングステンカーバイトを貼り付けたパーマシャープ(PermaSharp®)加工のものはありません。血管をはさむための繊細なモスキートのみならず、外科処置を行う際の清潔領域を保つためにチューブやコードを固定するためのケリー、顎関節部の外科処置用にはヒンジから先端までが長くカーブしているケリー・ランキンもあります。

止血鉗子 ホルステッド・モスキート 曲 3

〈全長 12cm 曲〉

消毒薬をしみ込ませたガーゼ球を把持して**顔面消毒をする際にも使用**できます。先端が湾曲しているので、滅菌グローブ装着時も顔面に触れずに処置できます。

H3
¥8,600



止血鉗子 ホルステッド・モスキート 直 4

〈全長 12cm 直〉


技工操作のポーセレン築盛の際にも、スプルー部分を把持することで操作しやすくなります。

H4
¥8,600



How the best perform

Hu-Friedy

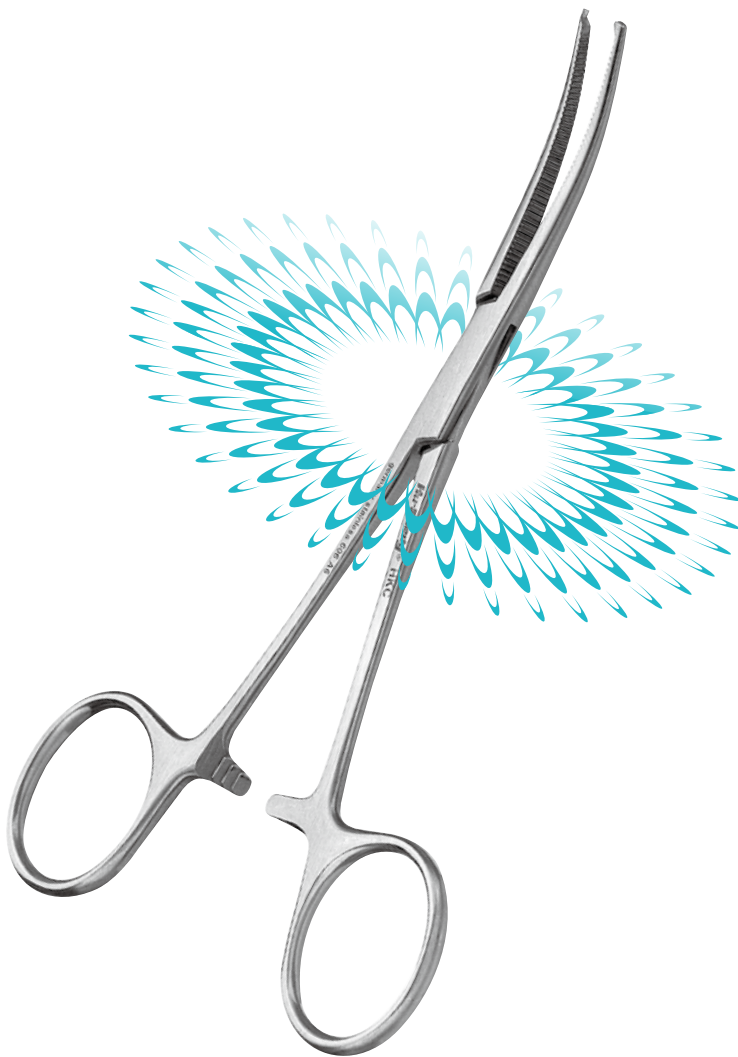

止血鉗子 コーチャー 曲

〈全長 14cm 曲 1×2〉
有鉤タイプ

HKC
¥9,000



止血鉗子 ケリー・ランキン 曲

〈全長 16cm 曲〉

HKRC
¥9,000



止血鉗子 ロチェスター・ペアン 曲

〈全長 16cm 曲〉
ギザ部分が長く付与

HRPC
¥9,000



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:止血鉗子(一般的名称:鉗子)医療機器届出番号:13B3X10195643103

●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2016年10月1日現在のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

©2016 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-081J/1016

Hu-Friedy