

PERIODONTAL KNIVES

ペリオドンタルナイフ



スカルペルハンドルの特徴とパートコード

ヒューフレディ社製のペリオドンタルナイフは、切開や歯肉の豊隆の形成や歯間部組織の切除に使用されます。

パートコード(ヒューフレディ社製品の商品番号)の始めの“K”はナイフ(Knife)を意味し、その後の“O”はオーバン(Orban)、“K”はカークランド(Kirkland)、“GF”はゴールドマンフォックス(Goldman-Fox)となり、続いてブレードの種類を表し、場合によりハンドルの番号が続きます。



ペリオドンタルナイフ オーバン 1/2



オーバンナイフには、角度の付いたブレード部分があり、臼歯部でも使いやすいように複屈曲したシャンクになっています。歯間部の組織切除に適用です。

K01/2X (ブラックライン)
¥9,100

K01/29 (エバーエッジ)
¥8,000


K01/26 (サテンスチール)
¥6,900

ブラックライン

ブラックラインとは、高性能なブラックコーティング加工が特徴の外科製品シリーズです。その性能により強いライトの下でも乱反射を抑制し、術中により良い視野を確保します。また、鋭利さと耐久性を強化すると共に、歯肉のトンネリング法やマイクロサージェリー時においての滑りを改善します。

How the best perform

Hu-Friedy

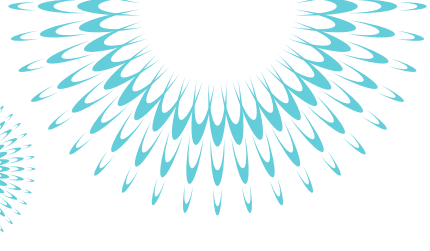

ペリodontalナイフ カーブランド 15/16



カッティングエッジ部分に傾斜(ベベル)がついており、丸みをおびた形状です。歯肉切除術や歯肉整形術のための切開に使用します。特に最後臼歯部領域に適用です。

KK15/16X(ブラックライン)
¥9,100

KK15/169(エバーエッジ)
¥7,800

KK15/166(サテンスチール)
¥6,900

ペリodontalナイフ ゴールドマンフォックス 7



『キドニー型』の楕円形ブレードは最後臼歯部内壁へアプローチしやすくなっています。斜切開に適するようにカッティングエッジ部分に傾斜(ベベル)があります。

KGF76(サテンスチール)
¥6,900

ペリodontalナイフ ゴールドマンフォックス 8



歯間部へアクセスしやすいように作られた『槍型』のブレードです。複屈曲したシャンクにより臼歯部へも容易に使用できます。

KGF86(サテンスチール)
¥6,900

ペリodontalナイフ ゴールドマンフォックス 11



ゴールドマンフォックス8に似たほぼ同形状の『槍型』ですが、ブレードがオフセットされているので、更に臼歯部での使用に適しています。

KGF11X(ブラックライン)
¥9,100

KGF116(サテンスチール)
¥6,900

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:ペリodontalナイフ(一般的名称:歯肉切除メス) 医療機器届出番号:1383X10195G15102
●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2019年10月1日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
©2019 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-101J/1019

