



STERILIZATION CONTAINER SYSTEM

IMS滅菌コンテナシステム

カセットおよびインスツルメントの効率的な滅菌処理を実現

ヒューフレディ社製滅菌コンテナは、滅菌処理時にカセットやインスツルメントを収納する再利用可能な堅固なシステムです。カセットやインスツルメントの包装に広く用いられている包装材や滅菌バッグに代わるものとして、滅菌コンテナは安全性を高めるだけでなく、経済的にも環境にも大きな優位点を有します。

- コンテナに入れたまま内容物を滅菌し、移動中や保管中も開封するまで無菌状態を維持します。
- 個々のインスツルメントやカセットをすべてまとめて収納し、ロックした状態で持ち運べます。
- 再利用可能な収納容器のため、利用にかかるコストが低く、耐久年数が長く、かつ消耗品の使用を最小限にすることにより、経済的にも環境にも優しいシステムをです。
- 内容物の出し入れが容易な内蔵ハンドル付の滅菌コンテナカセットをはじめとする、ヒューフレディ社製カセットのほとんどが適切に収納できるサイズです。
- フィルター、インジケーターカード、開封防止シールなど、各種コンテナ用アクセサリーを取り揃えています。
- プレ・バキューム型オートクレーブ（真空脱気式蒸気滅菌器）での使用に適しています。



滅菌コンテナシステムの特徴


プロセスインジケーターカードおよびコンテナ識別用に2つの外部ディスプレイウィンドウを備えています。

フィルター交換を簡素化。フィルター保持プレートのロックをクリック時の音で確認できます。

ラッチ開封防止シールによって、無菌状態の解除が一目で確認できます。

蓋のラッチ部分はハンドルとしても機能し、汚染を防ぎつつ簡単に蓋を開けることが可能です。

蓋と収納部分は酸化アルミニウム製で、迅速な乾燥特性と軽量化を図りました。酸化被膜加工されたアルミニウム合金により耐腐食性が高くなっています。

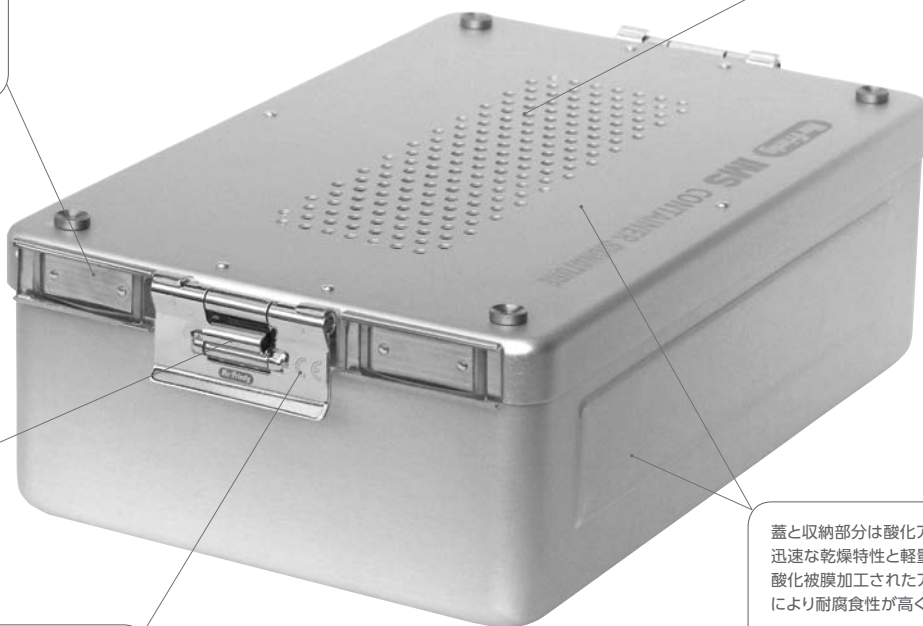


How the best perform

Hu-Friedy

IMS滅菌コンテナシステム

※IMS滅菌コンテナおよびカセットは取寄品です。

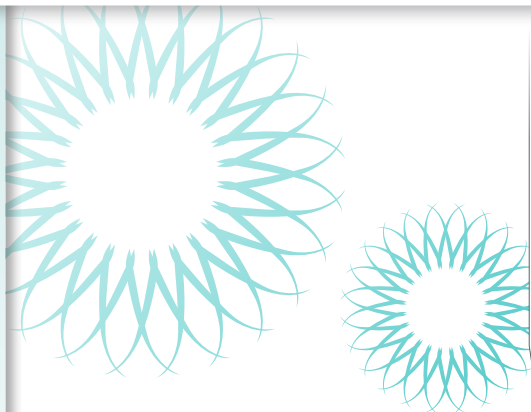

IMSカセット インフィニティ 滅菌コンテナ用 12本 ブルー

IMECC128 30,000円

外形寸法: 268mm x 176mm x 34mm

蓋ハンドルとフィルター交換部分付きのコンテナカセット。
インストゥルメント12本を収納でき、
アクセサリ用の収納スペースあり。
すべての滅菌コンテナに収納できます。



IMS滅菌コンテナ スリム

IMDINCOOM 39,000円

外形寸法: 312mm x 190mm x 50mm

上部と底部にフィルター装備。
1つのコンテナカセットが収まります。

IMS滅菌コンテナ スモール

IMDINCO1M 40,000円

外形寸法: 312mm x 190mm x 65mm

上部と底部にフィルター装備。
1つのコンテナカセットが収まります。



IMS滅菌コンテナ ミディアム

IMDINCO2M 41,000円

外形寸法: 312mm x 190mm x 100mm

上部と底部にフィルター装備。
2つのコンテナカセットが収まります。



IMS滅菌コンテナ ラージ

IMDINCO3M 43,000円

外形寸法: 312mm x 190mm x 135mm

上部と底部にフィルター装備。
3つのコンテナカセットが収まります。

IMS 滅菌コンテナ用アクセサリ

IMS 滅菌コンテナ用 インジケーターカード 250入、単回使用

IMCO-INDNA 3,000円

IMS 滅菌コンテナ用 ラッチ開封防止シール 100入、単回使用

IMCOM-SEAL 3,500円

IMS 滅菌コンテナ用 紙フィルター 100入、単回使用

IMCO-FIL3M 2,200円



ラッチ開封防止シール



インジケーターカード

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2019年7月1日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy, IMS

©2019 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. IMS-372J/0719

Hu-Friedy