

HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER

DR. RINO BURKHARDT ご使用例

THE DR. BURKHARDT SWISS PERIO KIT

スイスペリオインストゥルメント

- ・マイクロサージェリー用に特化
- ・精密な作業端により、優れた操作精度と組織損傷の軽減を実現
- ・職人による精細な仕上げ

ブラックライン インストゥルメント

- ・鋭利さと耐久性を維持し、潤滑性の向上を追求した堅固でスムーズなブラックコーティング加工から生み出されるパフォーマンス
- ・処置部位や周辺組織におけるコントラストや視認性を高めた独特な黒色仕上げ

- ・マット仕上げのハンドルと黒色の作業端で光の乱反射を抑制
- ・快適さと操作性の向上をもたらし手指の疲労を軽減する、ユニークかつ滑らかで太径の軽量ハンドル
- ・高い強度と耐腐食性を併せもつイムニティスチール (Immunity Steel®) 製

理想を求めた重量バランス

- ・繊細なマイクロサージェリーにより高い操作性と精度を発揮



リノ・バークハート 先生

Dr. Rino Burkhardt

SwissPerio Educationの理事会メンバーの1人であり、研修トレーニングプログラムの責任者を務めておられます。EFP (欧州歯周病学会: European Federation of Periodontology) の歯周病認定専門医で、ベルン大学医学部 (スイス) より修士号を授与されています。1996年、チューリッヒで歯周病とインプラントに特化した診療所を開業されました。また、香港大学より名誉教授、チューリッヒ大学より講師に任命されています。現在、スイス歯周病学会 (Swiss Society of Periodontology: SSP)、欧州審美歯科学会 (European Academy of Aesthetic Dentistry: EAED)、欧州オセオインテグレーション学会 (European Association for Osseointegration: EAO) のアクティブメンバー、並びにスイス口腔インプラント学会 (Swiss Society of Oral Implantology: SGI) の理事会メンバーとしてご活躍中です。これまでに数多くの論文や教科書 (一部章) を執筆・出版され、EFPの研究賞を受賞されました。

商品コード

商品名

標準価格

ご希望の
品目に✓

Burkhardt先生ご使用例フルセットをご希望

以下①~⑳ 標準価格合計: 431,300円


①	SPP24GSPX	ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24G BL*	10,600円
②	SPP24GSICX	ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24GSIC BL*	10,600円
③	SPP24GSP2X	ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24GSP BL*	7,800円
④	SPPSCHLEEX	ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 PPSCHLEE BL*	7,800円
⑤	SPPH2X	ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 PH2 BL*	8,900円
⑥	SPTPDSSPV	ティッシュプライヤー マイクロ スイスペリオ アナトミカル*	55,600円
⑦	SPTPDAPV	ティッシュプライヤー マイクロ スイスペリオ*	55,600円
⑧	SPPSPV	はさみ マイクロ カストロビージョ スイスペリオ*	55,000円
⑨	SPPSPV45	はさみ マイクロ カストロビージョ スイスペリオ 45°*	60,000円
⑩	SPNHDPVN	持針器 マイクロカストロビージョ スイスペリオ*	82,000円
⑪	CL84X	ボーンキュレット ルーカス 両頭 84 BL	7,800円
⑫	SHDPV	スカルペルハンドル ミニブレード用	25,500円
⑬	10-130-05E	スカルペルハンドル ヨーロッパスタイル 5E	9,200円
⑭	SYG7/8CH	ユニバーサルキュレット ヤンガーグッド 両頭 7/8 #SS	5,800円
⑮	PCV12PT	カラービュープローブ 交換チップ(12入) 12	12,600円
⑯	PH6CH	カラーコードプローブ カラービュー用ハンドル #SS	2,100円
⑰	PQ2N6	カラーコードプローブ ネイパーズ 両頭 Q2N #6	5,900円
⑱	DP17	ピンセット 17	4,500円
⑲	MIR5DSDH	ミラートップ HD 両面 51入	1,500円
⑳	MH6	ミラーハンドル コーンソケット #6	2,500円

*は、Swiss Perio シリーズの製品です。

■ペリオスチール/歯科用起子及び測隆子/1383X10195G13101 ■ティッシュプライヤー/歯科治療用ピンセット/1383X10195G20101 ■はさみ 歯肉用/歯科用歯肉はさみ/1383X10195G19101 ■持針器/持針器/1383X10195G10101 ■骨キュレット/歯科用骨キュレット/1383X10195G0101 ■スカルペルハンドル/スカルペルハンドル/1383X10195G32101 ■ユニバーサルキュレット/歯周病キュレット/1383X10195G0102 ■カラービュープローブ/歯周ポケットプローブ/1383X10195G07103 ■ピンセット/ピンセット/1383X10195G34102 ■ミラー/歯鏡/1383X10195G22101 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラス1)

How the best perform

Hu-Friedy®

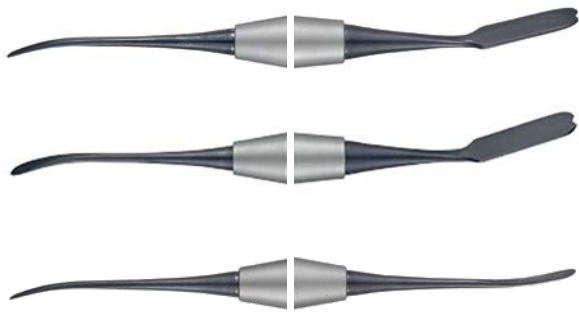


ペリオスチール
スイスペリオ 改良型
Periosteal Elevators

P24G
SPP24GSPX
10,600円
BL (ブラックライン)

P24GSIC
SPP24GSICX
10,600円
BL (ブラックライン)

P24GSP
SPP24GSP2X
7,800円
BL (ブラックライン)

口腔粘膜の状況に合わせて選べる3種類のペリオスチールエレベーター。異なる形状の作業端を備えており、微細な乳頭突起から口蓋の凹凸のある粘膜まであらゆるタイプのフラップ挙上に対処できるようデザインされています。エレベーター先端の鋭利さと、適切な平坦さと硬さの組合せにより、侵襲性を最小に抑えた歯肉弁形成が表現されます。また、切れ込みの入った鈍な作業端は厚みのあるフラップ挙上用で、骨表面や歯槽骨頂上で確実に安定させることができます。

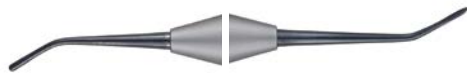

ペリオスチール
スイスペリオ 改良型
PPSCHLEE
(パピラエレベーター&ティッシュダイセクター)
Papilla Elevator &
Tissue Dissectors

SPPSCHLEEX
7,800円
BL (ブラックライン)

歯間乳頭の位置を調整する際に使用するもので、歯間部へのアクセスが必要な場合に適用です。歯間乳頭、基底部およびコル相当部にシャープな歯肉溝内切開を行った後、適切に歯間部の粘膜を挙上し調整することができます。術野の一次治癒達成や安定性を維持する上で重要な要素です。



ペリオスチール
スイスペリオ 改良型
PH2
(パピラエレベーター&ティッシュダイセクター)
Papilla Elevator &
Tissue Dissectors

SPPH2X
8,900円
BL (ブラックライン)

抜歯窩など、粘膜が骨に強固に癒着して剥離が困難な部位に適用です。深部の硬組織創傷面から容易にフラップ形成することができます。反対側の作業部(写真右側)を用いると、粘膜を遠心側から近心側にプルストロークで挙上することができます。



ティッシュプライヤー
マイクロ スイスペリオ
アナトミカル
Microsurgical Pliers

SPTPDSSPV
55,600円

作業端に非常に小さな鉤が付与されており、フラップやグラフトマージンを不必要に傷つけることなく口腔粘膜を確実に把持できます。



ティッシュプライヤー
マイクロ スイスペリオ
Microsurgical Pliers

SPTDPAPV
55,600円

縫合や結紮用にデザインされていますが、軟組織の把持にも適用です。作業端の形状は非常に精細で、縫合糸を確実に把持し、外科処置中の組織損傷を最小限に抑えることが可能です。



はさみ マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ
Microsurgical Scissors

SPPSPV
55,000円

軟組織の細かい切除や、術野マージンや移植用粘膜のトリミングに使用する、ややカーブした鋭利な作業端をもつ微細組織用はさみです。



はさみ マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ 45°
Microsurgical Scissors

SPPSPV45
60,000円

作業端に傾きをもたせることで、大白歯部における遠心部の難しい部分にも容易にアクセス可能なデザイン。



持針器 マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ
Needle Holder

SPNHDPVN
82,000円

細部まで設計を見直し、独特な操作性を実現しました。細い縫合針を確実に把持し、6-0から8-0までの縫合糸に適用です。圧を加えなくても指の回転操作でロックがかり、手指の動きをより正確に伝えることができます。僅かな力でロックをかけられるため、縫合針を把持する手のプレを抑制します。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2018年10月01日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です：HU-FRIEDY, Immunity Steel, ColorVue。
©2018 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. N2310J/1018

