



診 査 DIAGNOSTIC

エクスプローラー (探針) Explorers	B2
プローブ Probes	B8
エクスプロ Expos	B15
ピンセット Dressing Pliers	B16
ミラー Mirrors	B18





デュラスポンド (DURASPOND™) エクスプローラー

| 工夫を重ねた正確さ



このエクスプローラーの写真では、『デュラスポンド』の優れた能力を示すため、屈曲させ巻きつけられています。

-FACT- エクスプローラーとは

エクスプローラーは、齲蝕や歯石の探知、歯周ポケット内や根分岐部、修復部の診査に使用する、インストルメントセットに不可欠なものです。

-CHALLENGE- ヒューフレディ社の挑戦

定期診査にあたり患者さんの状態を正確に診断してカルテに記載するためには、信頼できる精度と弾力性を持ったエクスプローラーを使用し適切な結果を得る必要があります。

-SOLUTION- ヒューフレディ社からの提案

ヒューフレディ社のエクスプローラーは、『デュラスポンド』と呼ばれるスチール合金を使用しハンドメイドで製作しています。このスチール合金は、柔軟性と弾力性、さらに従来品よりも高い触覚感度を発揮し、高精度の診断を実現します。複数のハンドルオプションと組み合わせることで、30以上のスタイルで使用でき、すべての歯科医師や歯科衛生士により患者さんたちへお使いいただけます。

キューリックス (QULIX™) カラーコードプローブ

キューリックス (QULIX™) プローブは黒いマーキングで色別されています。マーキングは正確で、平滑な仕上げが施されているため、欠けたり、剥がれたり、色褪せることはありません。





両 頭

#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#31 細 丸



片 頭

#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#30 細 丸



カタログの見方

インスツルメント名	★ アフターファイブ 11/12		インスツルメント名
	11/12 After Five®		インスツルメント英名
おすすめ品	#7	(サテンスチールカラー)	EXD11/12A7
	#6	(サテンスチール)	EXD11/12A6
ハンドル番号	ハンドルの名称	掲載商品のパートコード	標準価格
			3,000円
			2,900円

※ハンドル番号が太字のものの写真が掲載されています。
上記の場合は6番ハンドル

手根管症候群の予防

手指にかかるストレス軽減の方法の一つとして、異なるサイズのハンドルを使い分けることが、神経外科専門医により推奨されています。太めのハンドル(#6,#7)は、軽い力で把持することができます。色々なハンドルサイズを組み合わせ、軽く把持することで、手根管症候群の予防になります。*

※出典:
L・J・ガーワトスキー、D・B・マクフォール、D・スタック:
歯科衛生士のための手根管症候群予防法。歯科衛生学会誌、1992年2月




エクスプローラー (探針)

EXPLORERS

齲蝕や歯石の探知、ポケット内や根分岐部、
修復部の診査に使用します。

 おすすめ品

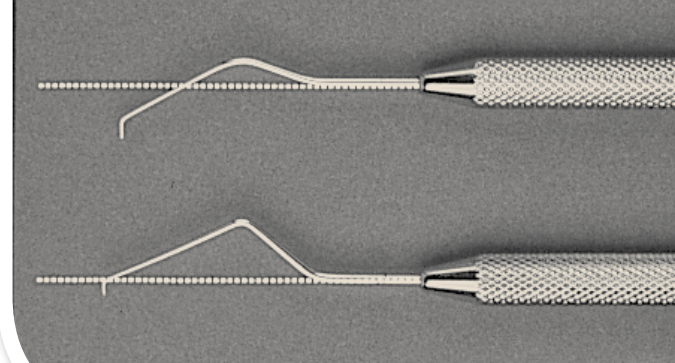

TU17は、17エクスプローラーに比べて、
バランスが取れたデザインのエクスプローラーです。

片 頭



3

#6 (サテンスチール)

EXS36

2,100円



3A

#7 (サテンスチールカラー)

EXS3A7

2,200円



#6 (サテンスチール)

EXS3A6

2,100円

#30 (細 丸)

EXS3A

2,100円



ポピュラータイプ 23
23 Popular Type

#30 (細 丸)

SPEXS23

2,600円




ポピュラータイプ 25
25 Popular Type



#30 (細 丸)

SPEXS25

2,600円

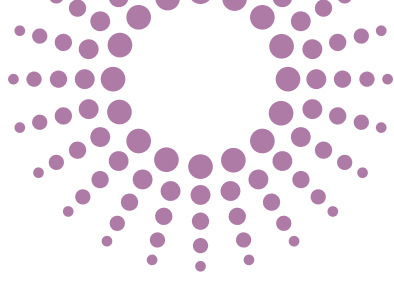

ウィルキンス/
タフツ大学型
TU17
TU17 Wilkins/Tufts
#6 (サテンスチール)
EXTU176
2,100円



6
#6 (サテンスチール)
EXS66
2,100円



6A
#6 (サテンスチール)
EXS6A6
2,100円



8
#6 (サテンスチール)
EXS86
2,100円



9
#6 (サテンスチール)
EXS96
2,100円





17
#6 (サテンスチール)
EXS176
2,100円



シェファード
フック 23
23 Shepherd's Hook
#6 (サテンスチール)
EXS236
2,100円




54
#6 (サテンスチール)
EXS546
2,100円

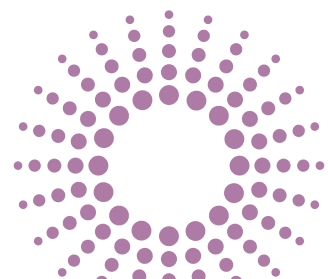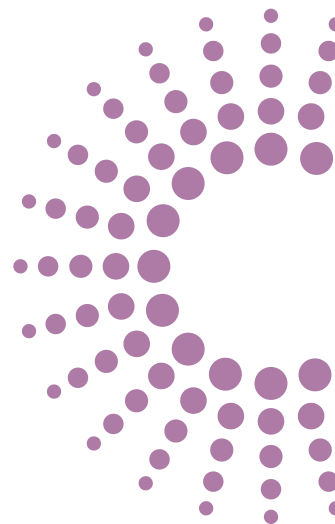



エクスプローラー (探針) EXPLORERS

★ おすすめ品

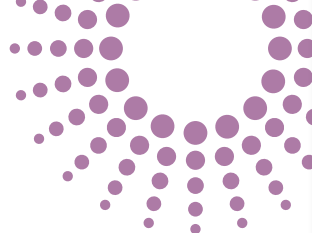

11/12 ODUエクスプローラーの作業部を正しくあてるには、
第一シャンクが歯面と平行になるようにしながら、
作業部を隣接歯間に挿入します。

両 頭



11/12 ODU

11/12 Old Dominion University

特に臼歯部隣接面の深いポケット内の歯石探知に適しています。

1本で全歯列に適用できるデザインです。

#7	(サテンスチールカラー)	EXD11/127	3,000円
★ #6	(サテンスチール)	EXD11/126	2,900円
#31	(細 丸)	EXD11/12	2,700円



アフターファイブ 11/12

11/12AF After Five®

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いので、
より深いポケットの探知に適しています。



#7	(サテンスチールカラー)	EXD11/12A7	3,000円
★ #6	(サテンスチール)	EXD11/12A6	2,900円
#31	(細 丸)	EXD11/12AF	2,700円




5*

歯肉縁下の歯石探知用#17と齲蝕診査用#23の組み合わせ。

★ #7	(サテンスチールカラー)	EXD57	3,000円
#6	(サテンスチール)	EXD56	2,900円
#31	(細 丸)	EXD5	2,700円

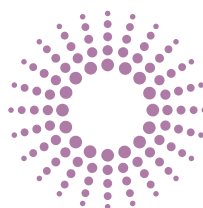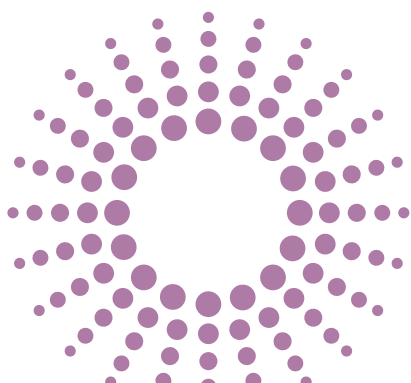

※2、3CH、5はXTSコーティングが施されたものもご用意しています。
(B7ページ)

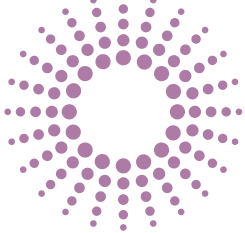


ウィルキンス/タフツ大学型 TU17/23


TU17/23 Wilkins/Tufts*

歯肉縁下の歯石探知用#TU17と齲蝕診査用#23の組み合わせです。
#TU17は、使いやすくバランスの取れた作業部が特徴です。


#7	(サテンスチールカラー)	EXTU17/237	3,000円
#6	(サテンスチール)	EXTU17/236	2,900円

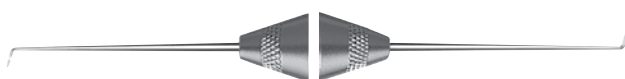


1
#6 (サテンスチール) **EXD16** 2,900円

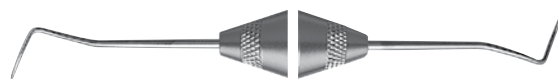


2*
#6 (サテンスチール) **EXD26** 2,900円

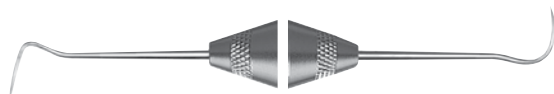


ピッグテール 2A
2A Pigtail
#6 (サテンスチール) **EXD2A6** 2,900円

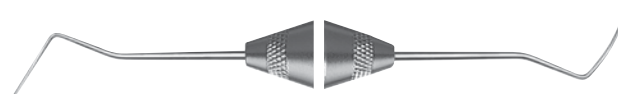


2H
#6 (サテンスチール) **EXD2H6** 2,900円

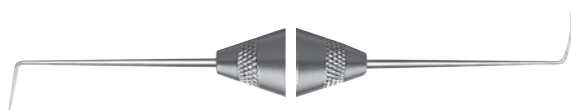


3
#6 (サテンスチール) **EXD36** 2,900円

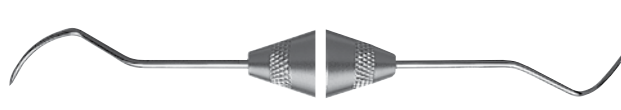

2R/2L
#6 (サテンスチール) **EXD2R/2L6** 2,900円

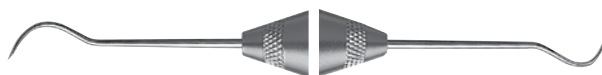


3ES
#6 (サテンスチール) **EXD3ES6** 2,900円

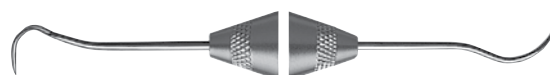

カウホーン 3CH*
3CH Cowhorn*
#7 (サテンスチールカラー) **EXD3CH7** 3,000円
#6 (サテンスチール) **EXD3CH6** 2,900円



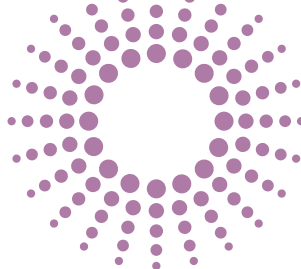

両 頭



ポピュラータイプ 5
5 Popular Type

#31 (細 丸)

SPEXD5

3,600円



ポピュラータイプ 8
8 Popular Type

#31 (細 丸)

SPEXD8

3,600円



6/3

#6 (サテンスチール)

EXD66

2,900円



23/6

#6 (サテンスチール)

EX23/66

2,900円



EN1

隣接歯間部により届きやすいデザイン。

#6 (サテンスチール)

EXDEN16

2,900円



3A/TU17

隣接歯間部により届きやすいデザイン。

#6 (サテンスチール)

EX3A/TU176

2,900円

エキスポローラー XTS 両頭

エキスポローラー XTS®/エキspro XTS® は、
汚れが付きにくい窒化アルミニウムチタン (AlTiN) コーティングが特徴です。



2

#6 (サテンスチール)

EXD2XTS

3,100円



カウホーン 3CH
3CH Cowhorn

#6 (サテンスチール)

EXD3CHXTS

3,100円



5

★ #6 (サテンスチール)

EXD5XTS

3,100円



ウィルキンス/タフツ大学型 TU17/23
TU17/23 Wilkins/Tufts

#6 (サテンスチール)

EXTU1723XT

3,100円



23/CP12

#6 (サテンスチール)

XP23/12XTS

4,700円

3-6-9-12

サテンスチールXTSエキスポローラーは、コンポジットレジン充填時の歯牙解剖の特徴を反映した修復に適用です。歯とインスツルメントの先端部を見分けやすくするため、黒い色のコーティングが施されています。



カラービュー プローブ COLORVUE® PROBES

★ おすすめ品



カラービュー (COLORVUE®) のマークは鮮やかなので、歯肉と露出した根面との判別が容易でポケット長や歯肉退縮の数値的読み取りが簡単です。



カラービューはインプラント周囲粘膜の診査・評価に役立ちます。***

カラービュープローブ

カラービュー (COLORVUE®) は、口腔内で識別が容易なように、鮮やかな黄色いチップに黒いマークがついています。先端部は、柔軟性がありラウンド型なので、歯肉にやさしい操作ができます。インプラントにも安全で、ネジ式なのでカラーコードが摩耗した場合のチップ交換も簡単です。



3-6-8-11

11

PCV11PT
★ **PCV11KIT6**

交換チップ (12入)
Sキット (ハンドル1本 チップ7入)

12,600円
8,500円



3-6-9-12

12

PCV12PT
PCV12KIT6

交換チップ (12入)
Sキット (ハンドル1本 チップ7入)

12,600円
8,500円



1-2-3-5-7-8-9-10

ウィリアムズ
Williams

PCVWPT
PCVWKIT6

交換チップ (12入)
Sキット (ハンドル1本 チップ7入)

12,600円
8,500円



1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

UNC

★ **PCVUNC12PT**
★ **PCVNCKIT6**

交換チップ (12入)
Sキット (ハンドル1本 チップ7入)

12,600円
8,500円




カラービュー用ハンドル
Colorvue Satin Steel® Handle

PH6 2,100円

※カラービューチップは別売です。

※※©Montage Media 2005. 出典:M・レスマン:インプラントのメンテナンスに関するホワイトペーパー。Hu-Friedry Mfg. Co., LLC. 2010年9月

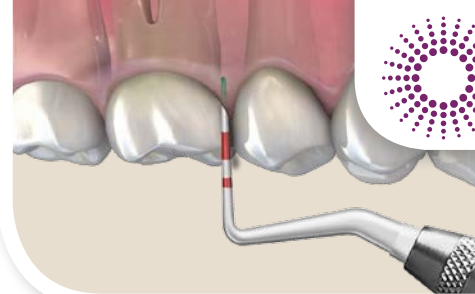

カラービュープローブ ペリオスクリーン

ヒューフレディ社製カラービュープローブ『ペリオスクリーン(PerioScreen®)』によって、
細かなプロービングを行う前に、歯周ポケットの深さを手早く簡単に診査することが可能です。
ユニバーサルな緑と赤のカラーコードは歯周疾患の進行度を表しています。



10
#10 Markings

PPS10PT 交換チップ (12入) 12,600円
PPS10KIT6 Sキット (ハンドル1本 チップ7入) 8,500円



12
#12 Markings

PPS12PT 交換チップ (12入) 12,600円
PPS12KIT6 Sキット (ハンドル1本 チップ7入) 8,500円

エキスプロ カラービュー

カラービュープローブのチップを装着することができるエキスプローラーです。



17*
17 Expro and Handle*

XP17/PH6 3,900円



23*
23 Expro and Handle*

XP23/PH6 3,900円

カラービュープローブ『ペリオスクリーン』は、高度な人間工学に基づいたデザインと再利用・再生可能な金属製ハンドルを採用しました。プラスチック製の作業部のみ交換式なので、環境に優しい製品です。

※カラービュープローブ ペリオスクリーン用のチップは別売です。



カラービュー プローブ COLORVUE® PROBES

★ おすすめ品



カラービュープローブ『バイオタイプ』は、歯肉のバイオタイプを判定する際に、簡単且つ患者さんにとって快適に使用できます。

NEW

カラービュープローブ バイオタイプ

簡単且つ患者さんにとって快適に使用でき、歯肉のバイオタイプを判定できます。

交換型チップはそれぞれ、最大30回まで滅菌可能です。

人間工学に基づいたデザインの#6サテンスチールハンドルに装着可能です。

樹脂製の交換型チップは、インプラント患者さんを含め、あらゆる患者さんに適用です。

チップのひとつひとつに番号が付いているので、色分けするのに便利です。



バイオタイプ スターターキット
Bio Type Probe Starter Kit

PBTPKIT12 (ハンドル3本 チップ12入) **14,000円**

※交換チップ (ブルー×4本、グリーン×4本、ホワイト×4本)、ハンドル×3本



バイオタイプ ブルー
Bio Type Probe Blue

PBTPB
交換チップ(12入)
12,000円



バイオタイプ グリーン
Bio Type Probe Green

PBTPG
交換チップ(12入)
12,000円



バイオタイプ ホワイト
Bio Type Probe White

PBTPW
交換チップ(12入)
12,000円

カラーコードプローブ

カラーコードプローブは、キューリックス (QULIX™) と呼ばれる黒色の正確なマークで色別されています。
この色別部分は、通常の使用でははがれたり薄くなったりすることはありません。

2-4-6-8-10-12



CP2

#6 (サテンスチール)
#30 (細 丸)

PCP26
PCP2

3,600円
3,500円

3-6-8-11



CP8

#6 (サテンスチール)
#30 (細 丸)

PCP86
PCP8

3,600円
3,500円

1-2-3-5-7-8-9-10



CP10

#6 (サテンスチール)
#30 (細 丸)

PCP106
PCP10

3,600円
3,500円

3-6-8-11



CP11

#7 (サテンスチールカラー)
* #6 (サテンスチール)
#30 (細 丸)

PCP117
PCP116
PCP11

3,800円
3,600円
3,500円

3-6-9-12



CP12

#7 (サテンスチールカラー)
* #6 (サテンスチール)
#30 (細 丸)

PCP127
PCP126
PCP12

3,800円
3,600円
3,500円



プローブ
PROBES

★ おすすめ品

カラーコードプローブ

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12



CPUNC12

CP12 University of North Carolina

#7	(サテンスチールカラー)	PCPUNC127	3,800円
#6	(サテンスチール)	PCPUNC126	3,600円
#30	(細 丸)	PCPUNC12	3,500円

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15



CPUNC15

CP15 University of North Carolina

#7	(サテンスチールカラー)	PCPUNC157	3,800円
★ #6	(サテンスチール)	PCPUNC156	3,600円
#30	(細 丸)	PCPUNC15	3,500円

1-2-3-5-7-8-9-10



シンウィリアムズ OW

PQ-OW* Thin Williams

#6	(サテンスチール)	PQOW6	3,500円
----	-----------	--------------	--------


3.5-5.5-8.5-11.5




CP11.5B



CP-11.5B* Screening Probe

#7	(サテンスチールカラー)	PCP11.5B7	3,800円
★ #6	(サテンスチール)	PCP11.5B6	3,600円
#30	(細 丸)	PCP11.5B	3,500円

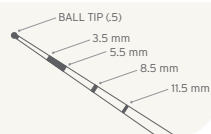

CP11.5はWHOタイプのプローブです。WHOとはWorld Health Organizationの略でCPITN(Community Periodontal Index of Treatment Needs)システムに基づいてデザインされており、先端に直径0.5mmのボールがついています。チェアサイドにおいて短時間で歯周疾患の兆候となるポケット深度を計測することができます。

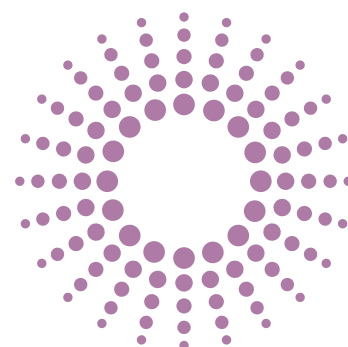

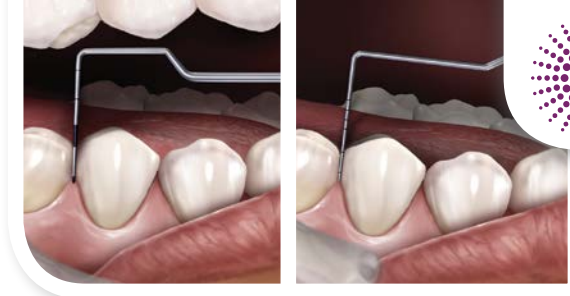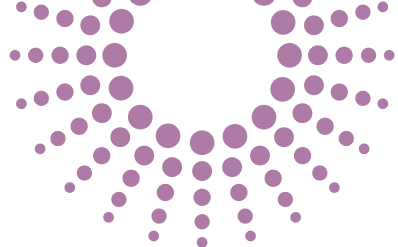

ノバテックプローブ

従来のプローブ

ノバテックプローブ

臼歯部への操作性がよい90度のデザインです。



CP11ノバテック
CP-11 Novatech

#30 (細丸)

PCPNT11

4,300円



CP12ノバテック
CP-12 Novatech

#6 (サテンステール)
#30 (細丸)

PCPNT26
PCPNT2

4,400円
4,300円



UNC12ノバテック
UNC12 Novatech

#6 (サテンステール)

PCPNT126

4,400円



UNC15ノバテック
UNC15 Novatech

★ #6 (サテンステール)

PCPNT156

4,400円

両頭



UNC15/11.5B*
UNC15/ Screening Probe**

#6 (サテンステール)

P15/11.5B6

6,000円

※ヒューフレディ社のWHOタイププローブは、PSRおよびCPITN
歯周スクリーニングプログラムと組み合わせて使用します。



プローブ
PROBES

★ おすすめ品

第一大臼歯根分岐部に挿入された
カラーコードプローブ ネイバーズ Q2N



両頭 根分岐部用

ネイバーズは根分岐部(ファーケーション)の診査に使用します。



ネイバーズ 1N
1N Nabers

#6 (サテンスチール) **P1N6** 4,200円



ネイバーズ 2N
2N Nabers

#6 (サテンスチール) **P2N6** 4,200円



ネイバーズ Q2N
Q-2N Nabers Color-coded

#7 (サテンスチールカラー) **PQ2N7** 6,100円
★ #6 (サテンスチール) **PQ2N6** 5,900円
#31 (細 丸) **PQ2N** 5,800円

片 頭



ウィリアムズ
Williams

#6 (サテンスチール) **PW6** 3,400円
#30 (細 丸) **PW** 3,500円



エキスプロ EXPROS

一方の作業部がエキスプローラー、もう一方がプローブの両頭
インストルメントです。診査および測定の両方に使えます。

 おすすめ品

11-8-6-3



23/CP11
23/CP-11

#6 (サテンスチール)

XP23/116

4,500円

12-9-6-3



23/CP12
23/CP-12

#6 (サテンスチール)

XP23/126

4,500円

15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



UNC 23/UNC15
23/UNC15 University of North Carolina

#6 (サテンスチール)

XP23/UNC6

4,500円

15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



TU17/UNC15*
TU17/UNC15*

#6 (サテンスチール)

XPTU17/156

4,500円

15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



3A/UNC15
3A/UNC15

 #6 (サテンスチール)

XP3A/NC156

4,500円


※ウィルキンス/タフツ大学型と、
UNC(ノースカロライナ大学)のコンビネーション



ピンセット DRESSING PLIERS

口腔内外での材料の把持や持ち運びのためのものです。
ピンセットはすべて、熱処理を施した重厚なステンレス鋼を
使用しており、先端部の曲がりやズレが生じにくい構造です。

★ おすすめ品

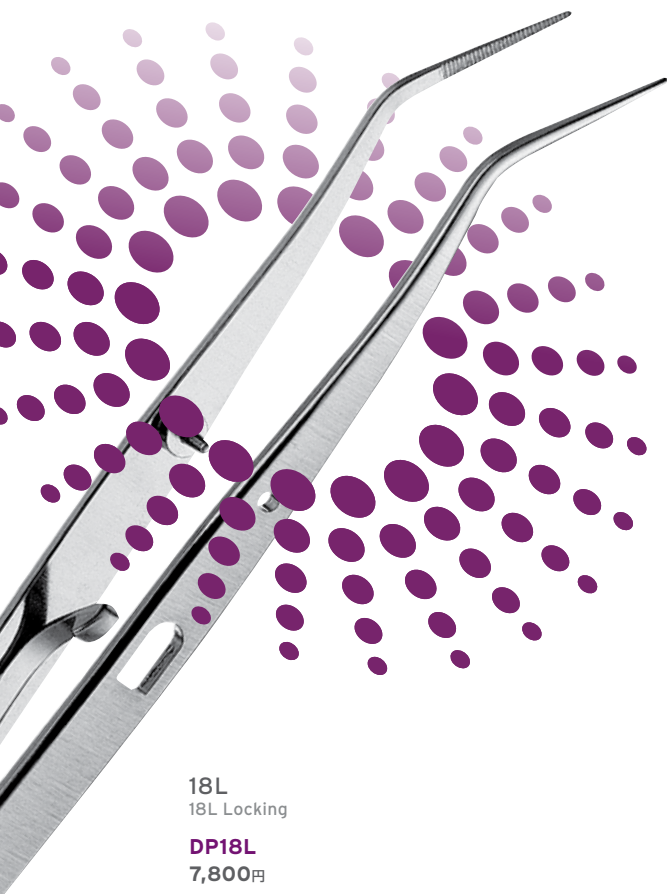

18L
18L Locking

DP18L
7,800円
ロック付



1
1 Perry
DP1
4,500円




2
2 College
DP2
4,500円




3
DP3
4,500円



17
DP17
4,500円

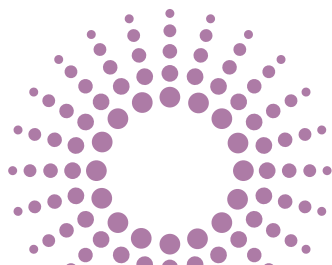

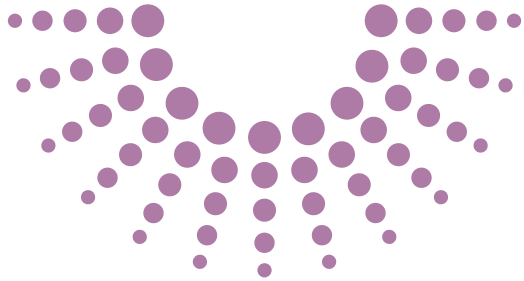

18
DP18
4,500円



コーク型 18JSII
18JSII
★ **DP18JS-II**
3,600円



19
DP19
4,500円



汎用
Utility Pick-Up
Dressing Pliers
★ **DPU17**
3,000円



317 ギザ無
317 Smooth Beak
DP317
3,800円



318 フォイル・
メリアム
318 Foil/Meriam
Serrated Beaks
DP318
3,800円

使用済みのガーゼ、ラバーダム製品、バーなどを持ち運びする際、ピンセット DPU17を使用することで、チェアサイドや再処理エリアでの二次汚染の危険を低減します。DP317ピンセットは先端部にギザがないのが特徴で、粒状の抗菌剤の挿入に適用です。



ミラートップ HIGH DEFINITION MIRRORS

ヒューフレディ社のHDミラーのコーティングは、独自仕様の、優れた輝きと色によって、あらゆる歯科処置で視認性が向上します。また、HDミラーには傷がつきにくいので、効率の良い治療に適用です。

NEW

★ おすすめ品

HD 両面 4
#4 Double-Sided
直径22mm

★ **MIR4DSHD**
1入
1,500円

MIR4DSHD6
6入
8,100円

HD 両面 5
#5 Double-Sided
直径24mm

★ **MIR5DSHD**
1入
1,500円

MIR5DSHD6
6入
8,100円

ヒューフレディ社製 HDミラーの特徴

- 113%の反射率によって、比類のない画像の明瞭性を実現**
- ロジウムコーティングのミラーより明るさが38.5%向上**
- 他の表面ミラーより、明るさが50%向上**
- 傷がつきにくく、長く使用できる
- 人間工学に基づいたデザインの太いハンドルを選択可能

HDコーティングと ロジウムコーティングの比較



※※社内資料



HDコーティング




HD 片面 3
#3 Single-Sided
直径20mm
MIR3HD
1入
1,400円



HD 片面 4
#4 Single-Sided
直径22mm
MIR4HD
1入
1,400円



HD 片面 5
#5 Single-Sided
直径24mm
MIR5HD
1入
1,400円

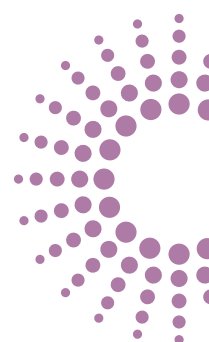

ロジウムコーティング



片面 4
#4 Single-Sided
直径22mm
MIR4/3
3入
2,800円

MIR4/12
12入
10,300円



片面 5
#5 Single-Sided
直径24mm
MIR5/3
3入
2,800円

MIR5/12
12入
10,300円



両面 4
#4 Double-Sided
直径22mm
MIR4DS/3
3入
3,700円

MIR4DS/6
6入
6,600円



両面 5
#5 Double-Sided
直径24mm
MIR5DS/3
3入
3,700円

MIR5DS/6
6入
6,600円



ミラーハンドル



コーンソケット ハンドル #24
#24 Cone Socket Mirror Handle

MH24 2,200円



コーンソケット ハンドル #1
#1 Cone Socket Mirror Handle

MH1 2,200円



コーンソケット ハンドル #6
#6 Cone Socket Mirror Handle

★ **MH6** 2,500円



コーンソケット ハンドル #7
#7 Cone Socket Mirror Handle

MH7 2,500円

