

SATIN STEEL™ XTS™

コンポジット練成充填器 XTS



進化した技術と革新的なデザインの結実 ——ヒューフレディ社製 XTSコンポジット練成充填器

ヒューフレディ社のコンポジット練成充填器 XTS は充填材に粘着しにくく、また変色させることもなくコンポジット充填が可能です。

特徴的な黒色の仕上げ

器材、歯牙の色調、充填材という三者間のコントラストを高めます。黒色の仕様ははがれたり、変色したりしません。

把持しやすい、太く軽量のハンドルデザイン

使用後の洗浄が簡単、快適な使い心地、手指の疲労を軽減、操作性を向上します。*1

上質な職人技、種類豊富なデザイン

全てのコンポジット充填に必要な卓越したパフォーマンスと幅広い種類のデザインをご提供します。




窒化アルミチタン (AlTiN) コーティング

窒化アルミチタンコーティング (AlTiN) はチタンコーティングと比較して、常に強固でなめらか、べたつきが少ないと研究で明らかになっています。ヒューフレディ社のコンポジット練成充填器 XTS はより長くご愛用いただけるよう、イミュニティスチール*2 で作られています。

耐摩耗性 強度


▲高い数値ほど望ましい

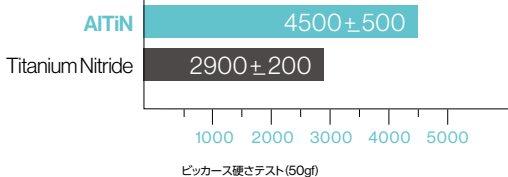

滑らかな表面

表面の粗さ


▼低い数値ほど望ましい

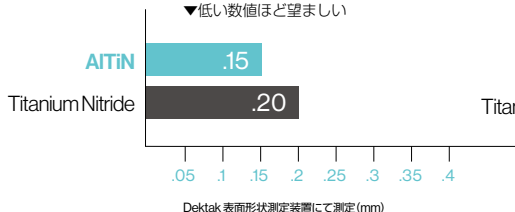

べたつき感

摩擦係数—潤滑性

▼低い数値ほど望ましい

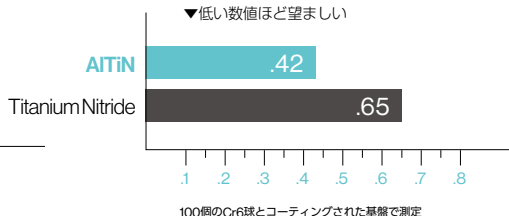

*1 資料: Gerwatoski, L.J., McFall, D.B., Stach, D.: Carpal Tunnel Syndrome; Risk Factors and Preventive Strategies for the Dental Hygienist. Journal of Dental Hygiene, February 1992.
*2 イミュニティスチールとは: ヒューフレディ社で独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金です。繰り返し使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。

ゴールドスタイン フレキシシン 1

細いパドルと小型
コンデンサーの組合せ
初期充填や形態付与に使用
1級～3級窩洞向き

TNCIGFT1

¥5,800



ゴールドスタイン マイクロ

それぞれ90°と110°の角度
が付与された細い先端で、
少量のステイン材やオペー
ク材の塗布に使用します。

TNGMPI

¥5,800



IPC

極薄型ブレード
2～5級窩洞向き

TNCVIPC

¥5,800



ゴールドスタイン フレキシシン 2

1の大型タイプ
充填と形態修正に使用
1級～3級窩洞向き

TNCIGFT2

¥5,800



G4/5

臼歯部近遠心および
隣接歯間部用
2,5級窩洞向き

TNPFIG4/5

¥5,800



A6

大型で薄型のブレード
ベニア形成や広範囲の
形態修正用
2～5級窩洞向き

TNPFIA6

¥5,800



ゴールドスタイン フレキシシン 3

エキストラフレックス
フレアパドル型
形態修正に使用
3,4級窩洞向き

TNCIGFT3

¥5,800



8A

唇側用

TNPF18A

¥5,800



ボゴシアン AB1

薄型ナイフとブレードの
組み合わせ
歯頸部での操作性が容易
3～5級窩洞向き

TNPF1AB1

¥5,800



ゴールドスタイン フレキシシン 4

エキストラフレックス
パドル型
臼歯部近遠心用

TNCIGFT4

¥5,800



BB27/29

小窩裂溝や咬合面形成用

TNBB27/29

¥5,800



フリードマン “ダックヘッド”

臼歯部咬合面用

TNPCCI

¥5,800



ゴールドスタイン フレキシシン ミニ4

エキストラフレックス
4のミニタイプ
アクセスしにくい部位の
充填や形態付与に使用

TNCIGFTMI4

¥5,800



W3

中型ブレードと
小型コンデンサーの組合せ
1～5級窩洞向き

TNPFIW3

¥5,800



ラドモア 3

小型と中型コンデンサーの
組合せ

TNBBL3

¥5,800



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2023年2月1日現在のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。■販売名/一般的名称/医療機器届出番号 ■コンポジット練成充填器/歯科用充填器/13B3X10195G10104 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: Hu-Friedy, Immunity Steel, Satin Steel, XTS

©2023 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-030/J/2302