

ヒューフレディ スケーラー・ 感染予防 キャンペーン!

対象期間: 2023. 10/23^月 ▶ 12/20^水

現在一部の製品につきましては、ご発注を多く頂いているため、

お届けまで時間を要す製品もございますが、

この期間中にご注文いただくキャンペーン対象商品は

特別価格にてご提供いたします。

是非ご利用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。

ご購入の際はお出入りの歯科商店に注文してください。



掲載製品

- グレーシーキュレット 各種
- シックルスケーラー 各種
- ユニバーサルキュレット 各種

- インストルメントシャープニング
 - ・ サイドキック
 - ・ ダイヤモンドシャープニングカード
 - ・ デュアルストーン

● 感染管理関連製品

- ・ IMSカセット シグネチャーシリーズ
- ・ エンザイマックス 各種
- ・ ニトリル ユーティリティグローブ
- ・ IMSオートクレーブラップ
- ・ 滅菌用インジケーターテープ
- ・ IMSクラス5 インテグレーター ストリップス

※上記製品右上からSDKKIT、SG17/18C8E2、SAS5/69E2、SMS11/129E2、IM9148、40-062

グレイシーキュレット一覧表 (作業部の材質とハンドルのご紹介)

		エバーエッジ 2.0 (EverEdge™ 2.0)	
ブレード幅 ブレード 断面図 ブレードの長さ ブレードと シャンクの形状 スタンダード：細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。超音波スケーリング後の仕上げとして細かなスケーリングやルートプレーニングに使用。 リジッド：スタンダードシャンクに比べ太くて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。		ヒューフレディ社がキュレット・スケーラーのエッジのシャープさをより持続するために開発した優れた合金。ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、3段階の熱処理の温度・時間設定を改善、ブレードの表面処理を向上させ、パリの発生を抑制する合金です。	
作業部の材質		ハーモニー (Harmony™) #XE2  人間工学に基づく技術「TrueFit™テクノロジー」で設計されたハンドル。 6,400円	エバーエッジ (EverEdge™) #9E2  人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着) 6,000円
グレイシーキュレット	オリジナル	スタンダード／リジッド	スタンダード／リジッド
	アフターファイブ	スタンダード／リジッド	スタンダード／リジッド
	ミニファイブ	スタンダード	スタンダード／リジッド
	マイクロミニファイブ	リジッド	リジッド
スケーラー	ネビィ	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
	衛生士用	H5/33, H6/H7	H5/33, H6/H7
	前歯用、臼歯用	204S, モース 0/00	204S, 204SD, モース 0/00

グレイシーキュレット



1/2
前歯部



3/4
前歯部



5/6 ★
前歯部及び小臼歯部



7/8 ★
臼歯部の頬舌側面



9/10
臼歯部の頬舌側面
根分岐部



11/12 ★
臼歯部の近心面




13/14 ★
臼歯部の遠心面



15/16
(FIT11/12)
臼歯部の近心面



17/18
(FIT13/14)
臼歯部の遠心面

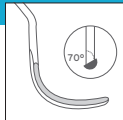

15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14) はシャンクの角度を大きくしているため、対合歯に干渉されることなく、より良くフィットします。



通常の11/12では、近心面に平行になるように第一シャンクを固定することが困難な場合があります。

通常の11/12



15/16 (FIT11/12) はシャンクの角度を大きく取ったことにより、インスツルメントのポジショニングが容易になり、固定点も近くに取れます。

15/16 (FIT11/12)



通常の13/14では、遠心面への到達が患者様の開口度によって制限されることがあります。

通常の13/14



17/18 (FIT13/14) はハンドルを咬合面と水平に近い角度で把持する事ができ、開口量の少ない患者様でも到達し難い遠心面に到達しやすくなります。

17/18 (FIT13/14)

グレイシーキュレット バイオジェント

- 薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!



1/2 ★
SG1/29LCE2
6,000円



7/8 ★
SG7/89LCE2
6,000円



11/12 ★
SG11/129LCE2
6,000円



13/14 ★
SG13/149LCE2
6,000円

【オリジナルとの比較】
ブレードの幅
-20%

【オリジナルとの比較】
シャンクの硬さ
リジッド

【オリジナルとの比較】
ブレードの長さ
-25%


※グレイシーキュレット バイオジェントのハンドルはエバーエッジ (#9E2) のみにになります。

シャープさがさらに長持ち!!
コーティングなしの高性能

イミュニティスチール (Immunity Steel™)			
ヒューフレディ社で独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金です。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。			
レジン8カラー (Resin 8 Colors) #C8E2  レジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スケーラーの識別が容易。(ハンドルと同色のグリップを標準装着) 5,800円	サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™) #7  シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着) 5,600円	サテンスチール (Satin Steel™) #6  力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。 5,600円	角 柄 #2  8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。 5,000円
スタンダード／リジッド 1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14) ※9/10はスタンダードのみ	スタンダード／リジッド 1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14)		
スタンダード／リジッド 1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)	スタンダード／リジッド 1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)		
スタンダード／リジッド 1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)	スタンダード／リジッド 1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)		
1、2、3、4	1、2		
H5/33、H6/H7	H5/33、H6/H7		
204S、204SD、モース 0/00	204SD		

※標準価格は全て税抜

シックルスケーラー

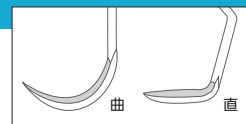

喫煙される患者さん等ステインが沈着しやすい方に…
医院に1本は必需品です!



ネビィ 1 (前歯用) ★
コンパクトな鎌型とスプーン型の2種のブレード。前歯のステインや歯石を効率良く除去。



ネビィ 2 (臼歯用)
大きな屈曲と長めのブレードで、取り残しができる。最後臼歯遠心面や歯間部へのアクセスが容易。



ネビィ 3 (臼歯用) ★
コンパクトで細いブレードは狭小な歯間部に適用。緩やかな屈曲がついているので、特に臼歯部のスケールリング向き。



ネビィ 4 (臼歯用)
ネビィシリーズで最大サイズ且つ硬いリジッドタイプのブレード。長めのブレードは歯冠形態に沿わせながら、近遠心面への到達が可能。



衛生士用 H5/33
非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。前歯の歯頸部や歯間部のスケールリングに適用。



衛生士用 H6/H7
超薄型コントラアングルのデザイン。隣接歯間部に適用。シャンクのアングルにより前歯および小臼歯に対応。



204S
臼歯歯肉縁上の隣接歯間部用。



204SD
コントラアングルのシャンクデザインにより、臼歯部近遠心面に適用。



モース 0/00
叢生歯や細かい操作に向いている前歯部用の小型ブレード。


裏面でもキャンペーン対象製品をご紹介します▶

ユニバーサルキュレット



マッコール 17/18

歯牙を包み込むようなブレードの形状。
同じ作業部で遠心から近心まで使用可能です。

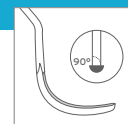

コロンビア大学型 4R/4L

白歯部で高度に
沈着してしまった
歯石の除去に特に適用。

コロンビア大学型 13/14

浅いポケットの歯肉
縁上・縁下の歯石除去、
小児にも適用。

バーンハルト 5/6

適度な長さの第一シャンクと
柔軟性を持ち合わせていて、
前歯部用としてもユニバーサルとしても
使用可能です。

※お求めの規格のハンドルの種類は注文書をご確認ください。

インスツルメントシャープニング

電動タイプ

サイドキック ★

ハンディサイズの
コンパクト・軽量デザイン
により、チェアサイドでの
シャープニングに対応。

SDKKIT
66,000円



サイドキックの
使い方を動画で
CHECK!!

カードタイプ

ダイヤモンドシャープニングカード

繰り返し使用しても平らな表面を維持!
超音波洗浄器で容易に洗浄・高圧蒸気滅菌にも対応!
クレジットカードサイズの
シャープナー!!



超細目
(EXTRA FINE)
DSCXFINE
6,600円

細目 ★
(FINE)
DSCFINE
6,600円

中目
(MEDIUM)
DSCMED
6,600円

ストーン

デュアルストーン ★

極度に鈍化したスケーラーの
研磨や修正用の粗目の青色面と、
日常のメンテナンス用の細目の
白色面をひとつに組み合わせた
セラミックストーン。

SSDGRIT
5,000円



スケーラーやキュレットの
ハンドシャープニングの
方法についてはこちら!

感染管理関連製品

IMSカセット シグネチャー シリーズ (インスツルメント・アクセサリは含まれません)

IMSカセットは単なる容器ではなく、**洗浄時の洗浄剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザイン**です。
丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインスツルメントをしっかりと固定します。
下記のバリエーションからシリコン製レールの色をご選択いただけます。



5本用 イグザム

外形寸法：76mm x 203mm x 32mm
5本のインスツルメントが収納可能

IM6050 ■ レッド 12,000円
IM6056 ■ ラベンダー 12,000円
IM6058 ■ ブルー 12,000円



7本用 スペースセーバー

外形寸法：114mm x 203mm x 25mm
7本のインスツルメントが収納可能
省スペース設計の薄型サイズ

IMSS75 ■ イエロー 14,800円
IMSS76 ■ ラベンダー 14,800円
IMSS78 ■ ブルー 14,800円
IMSS79 ■ グリーン 14,800円



10本用

外形寸法：140mm x 203mm x 32mm
10本のインスツルメントが収納可能

IM5100 ■ レッド 15,800円
IM5103 ■ オレンジ 15,800円
IM5105 ■ イエロー 15,800円
IM5108 ■ ブルー 15,800円



14本用 ダブルデッカー

外形寸法：114mm x 203mm x 38mm
14本のインスツルメントが収納可能

IM9140 ■ レッド 21,000円
IM9141 ■ グレー 21,000円
IM9143 ■ オレンジ 21,000円
IM9146 ■ ラベンダー 21,000円
IM9148 ■ ブルー 21,000円
IM9149 ■ グリーン 21,000円

キュレット・スケーラーの
管理におすすめ!

エンザイマックス (ENZYMACE™)

2種類の酵素からなる洗浄剤で、カセットやインスツルメントの超音波洗浄や浸漬洗浄に使用します。
表面保護剤の働きで、沈着物やシミ、腐食の原因となるような水に含まれている有害なミネラルからインスツルメントを守ります。



エンザイマックス 液 ボトルタイプ
3800ml 1入 **IMS-1226** 15,600円

エンザイマックス ボトル用ポンプ
1プッシュで3.8ℓの希釈液が作れます。
3800ml用 **IMS-1226P** 800円

※エンザイマックス 液 ボトルタイプをご購入の際は
ボトル用ポンプも同時購入いただくと便利にお使いいただけます。



エンザイマックス スプレージェル

使用後のインスツルメントにスプレーするプレクリーナー。
腐食防止剤を含む2種類の酵素を配合したジェルです。
洗浄前の汚染物がインスツルメントに固着しないよう湿潤状態を保ち、
血液や組織片、その他の付着物の溶解に役立ちます。
布製品に付着した染み抜き用にも使えます。

709ml 450回分 **IMS-1229** 2,800円

裏面でもキャンペーン対象製品をご紹介します▶

感染管理関連製品

洗浄・ケア製品

針刺しのリスクを低減させる
厚手の器材処理用グローブ!



ニトリルユーティリティグローブ

インスツルメントの洗浄や手入れに使用します。(3組入) 耐穿刺性および耐薬品性の高い製品。滑り止め付。オートクレーブ滅菌可(耐熱温度121℃)。

Sサイズ(3組入) **40-060** 2,800円
Mサイズ(3組入) **40-062** 2,800円
Lサイズ(3組入) **40-064** 2,800円

滅菌製品



単回
使用のみ

IMSオートクレーブラップ


やわらかさと強度を併せもつ不織布で、
チェアサイドで覆布としても使用可能。不織布なので、
オートクレーブのフィルターに目詰まりを起こしにくい。

※左記画像のオートクレーブモニターテープは
キャンペーン対象品ではございません。

S 305×305mm 100入 **IMS-1213H** 2,200円
S 380×380mm 100入 **IMS-1211H** 3,000円
L 508×508mm 100入 **IMS-1212H** 5,200円
L 610×610mm 100入 **IMS-1210H** 6,600円



未処理

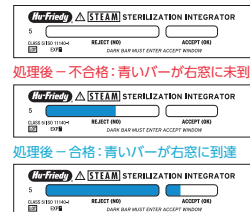

IMS クラス5 インテグレーター ストリップス ★

複数の因子を測定するクラス5の滅菌モニターで、
滅菌サイクルに決定的な影響を及ぼす
すべての因子(時間、温度や蒸気の有無)に
反応するよう設計されています。
前面のインジケータに結果が表示される方式で
色付バーが不合格域から合格域に向かって進むよう
になっており、解釈や色比較の必要がありません。

100入 **IMS-1241** 3,800円



滅菌用インジケータテープ

IMSオートクレーブラップを留めるのに使用します。
滅菌温度になると黒いストライプが浮き出て、
処理前と処理後のカセットを一目で識別できます。

19mm×54mm **IMS-1461** 1,800円

※ラテックスフリー

商品名		パートコード	標準価格(円)	数量
サイドキック		SDKKIT	66,000	
ダイヤモンド シャープニング カード	超細目	DSCXFINE	6,600	
	細目	DSCFINE	6,600	
	中目	DSCMED	6,600	
デュアルストーン		SSDGRIT	5,000	
IMSカセット シグネチャー シリーズ	5本用 イクザム	レッド	IM6050	12,000
		ラベンダー	IM6056	12,000
		ブルー	IM6058	12,000
	7本用 スペース セーバー	イエロー	IMSS75	14,800
		ラベンダー	IMSS76	14,800
		ブルー	IMSS78	14,800
	10本用	グリーン	IMSS79	14,800
		レッド	IM5100	15,800
		オレンジ	IM5103	15,800
		イエロー	IM5105	15,800
	14本用 ダブル デッカー	ブルー	IM5108	15,800
		レッド	IM9140	21,000
		グレー	IM9141	21,000
		オレンジ	IM9143	21,000
		ラベンダー	IM9146	21,000
エンザイ マックス	液 ボトルタイプ	3800ml 1入	IMS-1226	15,600
	ボトル用ポンプ	3800ml 2用	IMS-1226P	800
	スプレージェル	709ml	IMS-1229	2,800

商品名		パートコード	標準価格(円)	数量
ニトリル ユーティリティ グローブ	S 3組入	40-060	2,800	
	M 3組入	40-062	2,800	
	L 3組入	40-064	2,800	
IMS オートクレーブ ラップ	S 305×305mm 100入	IMS-1213H	2,200	
	S 380×380mm 100入	IMS-1211H	3,000	
	L 508×508mm 100入	IMS-1212H	5,200	
	L 610×610mm 100入	IMS-1210H	6,600	
滅菌用インジケータテープ 19mm×54mm		IMS-1461	1,800	
IMSクラス5 インテグレーター ストリップス		IMS-1241	3,800	

※ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。

現在一部の製品につきましては、ご発注を多くいただいているため、お届けまで時間を
要す製品もございます。在庫状況は流動的になりますのであらかじめご了承ください。

キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載製品の標準
価格は2023年10月23日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、
お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、
予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した
公称値になります。ヒューフレイディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じる
ことがあります。

販売名：グレーシーキュレット（一般的名称：歯周用キュレット）医療機器届出番号：13B3X10195G01101

販売名：スケーラー（一般的名称：歯科用スケーラ）医療機器届出番号：13B3X10195G02101

販売名：ユニバーサルキュレット（一般的名称：歯周用キュレット）医療機器届出番号：13B3X10195G01102

【商標について】 以下はヒューフレイディ社またはその関連会社の商標です：

Hu-Friedy, After Five, Colours, EVEREDGE, Harmony, Immunity Steel, Satin Steel, True Fit

●医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレイディ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

■ 歯科医院名 ■ お名前 ■ ご住所 〒 - TEL - -	【歯科商店名】
---	----------------

ヒューフレディ スケーラー・感染予防キャンペーン 注文書 掲載製品全て特別価格!! 期間：2023年10月23日(月)～12月20日(水)

※標準価格は全て税抜

商品名			ハンドルの種類 標準価格	ハーモニー	数量	エパーエッジ	数量	レジン8カラー	数量	サテンスチールカラー	数量	サテンスチール	数量	角 柄	数量
				#XE2 6,400円		#9E2 6,000円		#C8E2 5,800円		#7 5,600円		#6 5,600円		#2 5,000円	
オリジナル フレッシュアップ	オーリジナル	ス タ ン ダ ー ド	1/2	SG1/2XE2		SG1/29E2		SG1/2C8E2		SG1/27		SG1/26		SG1/2	
			3/4	SG3/4XE2		SG3/49E2		SG3/4C8E2		SG3/47		SG3/46		SG3/4	
			5/6	SG5/6XE2		SG5/69E2		SG5/6C8E2		SG5/67		SG5/66		SG5/6	
			7/8	SG7/8XE2		SG7/89E2		SG7/8C8E2		SG7/87		SG7/86		SG7/8	
			9/10	SG9/10XE2		SG9/109E2		SG9/10C8E2		SG9/107		SG9/106		SG9/10	
			11/12	SG11/12XE2		SG11/129E2		SG11/12C8E2		SG11/127		SG11/126		SG11/12	
			13/14	SG13/14XE2		SG13/149E2		SG13/14C8E2		SG13/147		SG13/146		SG13/14	
			15/16(FIT 11/12)	SG15/16XE2		SG15/169E2		SG15/16C8E2		SG15/167		SG15/166		SG15/16	
		17/18(FIT 13/14)	SG17/18XE2		SG17/189E2		SG17/18C8E2		SG17/187		SG17/186		SG17/18		
		ス タ ン ダ ー ド	1/2	SG1/2RXE2		SG1/2R9E2		SG1/2RC8E2		SG1/2R7		SG1/2R6		SGR1/2R	
			3/4	SG3/4RXE2		SG3/4R9E2		SG3/4RC8E2		SG3/4R7		SG3/4R6		SGR3/4R	
			5/6	SG5/6RXE2		SG5/6R9E2		SG5/6RC8E2		SG5/6R7		SG5/6R6		SGR5/6R	
			7/8	SG7/8RXE2		SG7/8R9E2		SG7/8RC8E2		SG7/8R7		SG7/8R6		SGR7/8R	
			9/10	SG9/10RXE2		SG9/10R9E2			SG9/10R7		SG9/10R6		SGR9/10R		
			11/12	SG11/12RXE2		SG11/12R9E2		SG11/12RC8E2		SG11/12R7		SG11/12R6		SGR11/12R	
			13/14	SG13/14RXE2		SG13/14R9E2		SG13/14RC8E2		SG13/14R7		SG13/14R6		SGR13/14R	
	15/16(FIT 11/12)		SG15/16RXE2		SG15/16R9E2		SG15/16RC8E2		SG15/16R7		SG15/16R6		SGR15/16R		
	フレッシュアップ	ス タ ン ダ ー ド	1/2	SRPG1/2XE2		SRPG1/29E2		SRPG1/2C8E2		SRPG1/27		SRPG1/26		SRPG1/2	
			3/4	SRPG3/4XE2		SRPG3/49E2		SRPG3/4C8E2		SRPG3/47		SRPG3/46		SRPG3/4	
			5/6	SRPG5/6XE2		SRPG5/69E2		SRPG5/6C8E2		SRPG5/67		SRPG5/66		SRPG5/6	
			7/8	SRPG7/8XE2		SRPG7/89E2		SRPG7/8C8E2		SRPG7/87		SRPG7/86		SRPG7/8	
			11/12	SRPG11/12XE2		SRPG11/129E2		SRP11/12C8E2		SRPG11/127		SRPG11/126		SRPG11/12	
			13/14	SRPG13/14XE2		SRPG13/149E2		SRP13/14C8E2		SRPG13/147		SRPG13/146		SRPG13/14	
			15/16(FIT 11/12)	SRPG15/16XE2		SRPG15/169E2		SRP15/16C8E2		SRPG15/167		SRPG15/166		SRPG15/16	
			17/18(FIT 13/14)	SRPG17/18XE2		SRPG17/189E2		SG17/18RC8E2		SG17/18R7		SG17/18R6		SGR17/18R	
		ス タ ン ダ ー ド	1/2	SRP1/2RXE2		SRP1/2R9E2		SRP1/2RC8E2		SRP1/2R7		SRP1/2R6		SRPG1/2R	
			3/4	SRP3/4RXE2		SRP3/4R9E2		SRP3/4RC8E2		SRP3/4R7		SRP3/4R6		SRPG3/4R	
			5/6	SRP5/6RXE2		SRP5/6R9E2		SRP5/6RC8E2		SRP5/6R7		SRP5/6R6		SRPG5/6R	
			7/8	SRP7/8RXE2		SRP7/8R9E2		SRP7/8RC8E2		SRP7/8R7		SRP7/8R6		SRPG7/8R	
			11/12	SRP11/12RXE2		SRP11/12R9E2		SRP11/12RC8E2		SRP11/12R7		SRP11/12R6		SRPG11/12R	
			13/14	SRP13/14RXE2		SRP13/14R9E2		SRP13/14RC8E2		SRP13/14R7		SRP13/14R6		SRPG13/14R	
			15/16(FIT 11/12)	SRP15/16RXE2		SRP15/16R9E2		SRP15/16RC8E2		SRP15/16R7		SRP15/16R6		SRPG15/16R	
フレッシュアップ			1/2	SAS1/2XE2		SAS1/29E2		SAS1/2C8E2		SAS1/27		SAS1/26		SAS1/2	
	3/4	SAS3/4XE2		SAS3/49E2		SAS3/4C8E2		SAS3/47		SAS3/46		SAS3/4			
	5/6	SAS5/6XE2		SAS5/69E2		SAS5/6C8E2		SAS5/67		SAS5/66		SAS5/6			
	7/8	SAS7/8XE2		SAS7/89E2		SAS7/8C8E2		SAS7/87		SAS7/86		SAS7/8			
	11/12	SAS11/12XE2		SAS11/129E2		SAS11/12C8E2		SAS11/127		SAS11/126		SAS11/12			
	13/14	SAS13/14XE2		SAS13/149E2		SAS13/14C8E2		SAS13/147		SAS13/146		SAS13/14			
	15/16(FIT 11/12)	SAS15/16XE2		SAS15/169E2		SAS15/16C8E2		SAS15/167		SAS15/166		SAS15/16			
	17/18(FIT 13/14)	SAS17/18XE2													
フレッシュアップ	ス タ ン ダ ー ド	1/2	SAS1/2RXE2		SAS1/2R9E2		SAS1/2RC8E2		SAS1/2R7		SAS1/2R6		SAS1/2R		
		3/4	SAS3/4RXE2		SAS3/4R9E2		SAS3/4RC8E2		SAS3/4R7		SAS3/4R6		SAS3/4R		
		5/6	SAS5/6RXE2		SAS5/6R9E2		SAS5/6RC8E2		SAS5/6R7		SAS5/6R6		SAS5/6R		
		7/8	SAS7/8RXE2		SAS7/8R9E2		SAS7/8RC8E2		SAS7/8R7		SAS7/8R6		SAS7/8R		
	ス タ ン ダ ー ド	11/12	SAS11/12RXE2		SAS11/12R9E2		SAS11/12RC8E2		SAS11/12R7		SAS11/12R6		SAS11/12R		
		13/14	SAS13/14RXE2		SAS13/14R9E2		SAS13/14RC8E2		SAS13/14R7		SAS13/14R6		SAS13/14R		
		15/16(FIT 11/12)	SAS15/16RXE2		SAS15/16R9E2		SAS15/16RC8E2		SAS15/16R7		SAS15/16R6		SAS15/16R		
		フレッシュアップ	1/2	SMS1/2XE2		SMS1/29E2									
7/8	SMS7/8XE2			SMS7/89E2											
11/12	SMS11/12XE2			SMS11/129E2											
13/14	SMS13/14XE2			SMS13/149E2											
フレッシュアップ	ス タ ン ダ ー ド	1/2		SG1/29LCE2											
		7/8		SG7/89LCE2											
		11/12		SG11/129LCE2											
		13/14		SG13/149LCE2											
	フレッシュアップ	1前歯用	SCNEVI1XE2		SCNEVI19E2		SCNEVI1C8E2		SCNEVI17		SCNEVI1				
		2臼歯用	SCNEVI2XE2		SCNEVI29E2		SCNEVI2C8E2		SCNEVI27		SCNEVI2				
		3臼歯用	SCNEVI3XE2		SCNEVI39E2		SCNEVI3C8E2								
		4臼歯用	SCNEVI4XE2		SCNEVI49E2		SCNEVI4C8E2								
フレッシュアップ	H5/33	SH5/33XE2		SH5/339E2		SH5/33C8E2		SH5/337		SH5/336		SH5/33			
	H6/H7	SH6/7XE2		SH6/79E2		SH6/7C8E2		SH6/77		SH6/76		SH6/7			
	204S	S204SX2		S204S9E2		S204SC8E2									
	204SD	S204SDXE2		S204SD9E2		S204SDC8E2		S204SD7		S204SD6		S204SD2			
フレッシュアップ	前歯用	モース 0/00		SM0/00XE2		SM0/00C8E2									
	マッコール	17/18		SM17/18XE2		SM17/189E2									
	コロンビア 大学型	4R/4L		SC4R/4LXE2		SC4R/4LC8E2									
	13/14		SC13/14XE2		SC13/149E2		SC13/14C8E2								
フレッシュアップ	バーンハルト	5/6		SBH5/69E2		SBH5/6C8E2									