

ハンドスケーリング

Hand Scaling

グレーシーキュレットの歴史	A02
グレーシーキュレットの選択方法	A04
グレーシーキュレット オリジナル	A06
グレーシーキュレット アフターファイブ	A09
グレーシーキュレット ミニファイブ	A12
グレーシーキュレット マイクロミニファイブ	A14
グレーシーキュレット バイオジェント	A15
グレーシーキュレット オオタタイプ	A16
ユニバーサルキュレット	A17
シックルスケーラー (鎌形)	A21
部位特定キュレット	A24
ホースケーラー／チゼルスケーラー	A25
ファイルスケーラー	A26
歯科用インスツルメントの構造	A28
シャンクの柔軟性／インスツルメントのバランス・刻印	A29


Gracey Curette History

1940年代、ミシガン大学の歯科医師クレイトン・グレイシーが、「歯周ポケットが深くても浅くても、歯肉を傷つけることなく痛みも伴わないように簡単に治療できるインスツルメント」のアイデアをヒューフレディの創始者であるヒューゴ・フリードマンに持ちかけ、彼らは共に14種類の部位特定片頭インスツルメントを開発しました。

Dr. グレイシーのデザインは、今日の新しいインスツルメントの基礎を築き、現在グレイシーキュレットは、ハンドルの種類が豊富になり、両頭インスツルメントとして広く利用されています。

ヒューフレディグループでは、Dr.グレイシーが開発したオリジナルのグレイシーキュレットの他に、第一シャンクが長くブレード幅が薄いアフターファイブ (After Five™) や、アフターファイブ (After Five™) の特徴に短いブレードを組み合わせたミニファイブ (Mini Five™)、ミニファイブのブレードを薄くし、歯肉への挿入がより容易で組織への負担を軽減するマイクロミニファイブ (Micro Mini Five™) そして、15/16 (FIT11/12) や17/18 (FIT13/14) など、様々なタイプのグレイシーキュレットを製造しています。また、シャンクがリジッドタイプのもも揃っています。

ヒューフレディグループは、既存の製品を改良する新しい道を常に模索しています。そして、その成功はビジョンを現実にし、現在の歯科治療になくてはならないものを創ったDr.クレイトン・グレイシーをはじめとする歯学のパイオニア達に捧げられています。

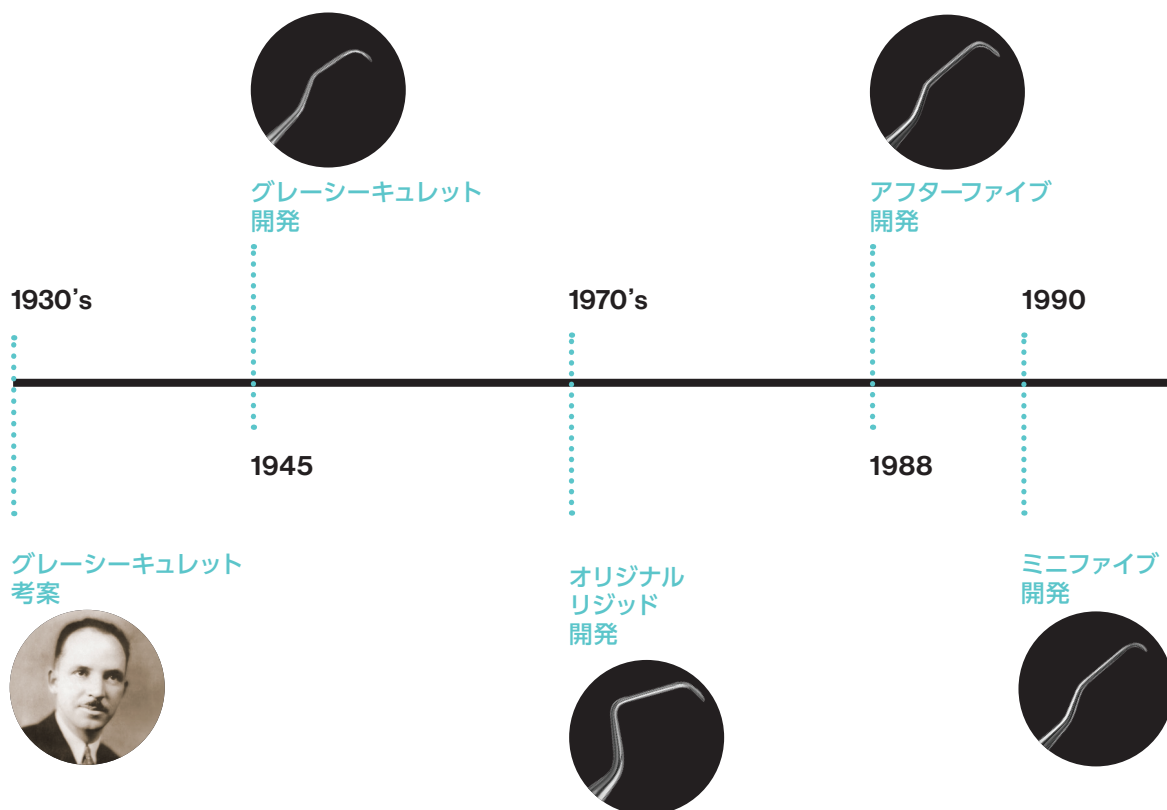



Dr.クレイトン・グレイシー



ヒューゴ・フリードマン

ヒューフレディグループは、グレイシーキュレットを 世界で初めて開発したパイオニアです！



FITシリーズ
(15/16、17/18)
開発

1990's

2000's

エバーエッジ
テクノロジー
開発




マイクロミニファイブ
開発

2008

2016

エバーエッジ2.0
テクノロジー
開発

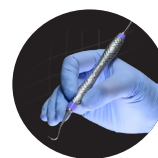

ハーモニー
エルゴノミック
スケーラー
開発

2020

How to Choose Gracey Curette

グレイシーキュレットの選択方法

① ハンドルの種類

【作業部の材質】

エバーエッジ (EverEdge™) 2.0

ヒューフレディグループがキュレット・スケーラーのエッジのシャープさをより持続するために開発した優れた合金。ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、3段階の熱処理の温度・時間設定を改善し、ブレードの表面処理を向上させ、パリの発生を抑制する合金です。



#XE2 ハーモニー (Harmony™)

人間工学に基づく技術「トゥルーフィット (TrueFit™) テクノロジー」で設計されたハンドル。(パープルのグリップを標準装着)



#9E2 エバーエッジ (EverEdge™)

人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるようなダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着)



#C8E2 レジン8カラー (Resin 8 Colors)

レジン製のため軽量。滑りにくくしっかり把持できるように波形の溝とダイヤモンドカットを組み合わせた表面形状。使用部位ごとにハンドルの色が違うので、処置中のスケーラー識別が容易。(ハンドルと同色のグリップを標準装着)



【作業部の材質】

イミュニティスチール (Immunity Steel™)

ヒューフレディグループで独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインストルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。



#7 サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™)

シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着)



#6 サテンスチール (Satin Steel™)


力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブのすべり止め。



#2 角柄

8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

② ブレードとシャンクの形状

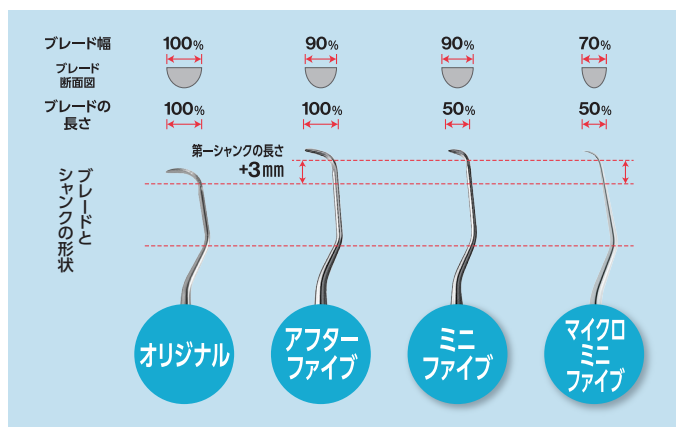

オリジナル (Original)

現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。

アフターファイブ (After Five™)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。


ミニファイブ (Mini Five™)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブ (After Five™) の半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

マイクロミニファイブ (Micro Mini Five™)


5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルより30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。

③ シャンクの硬さ

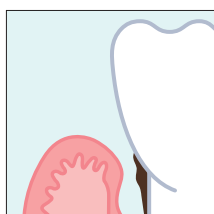


スタンダード (Standard)

細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。超音波スケーリング後の仕上げとして細かなスケーリングやルートプレーニングに使用。

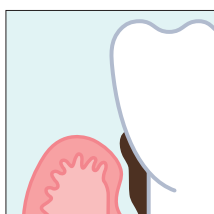

リジッド (Rigid)

スタンダードシャンクに比べ太くて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。


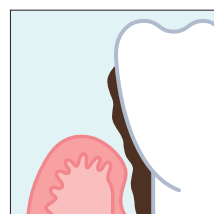


エクストラリジッド (Extra Rigid)

エクストラリジッドシャンクのグレイシーキュレットは殆どしなりがないので、全体の初期スケーリングや強固な歯石除去に使用。




④使用部位

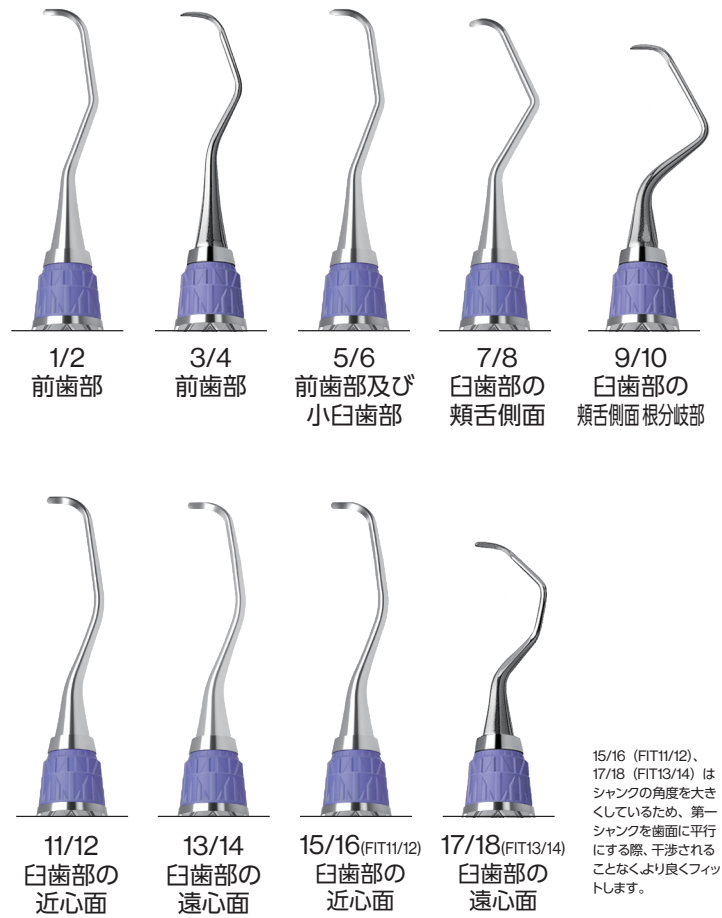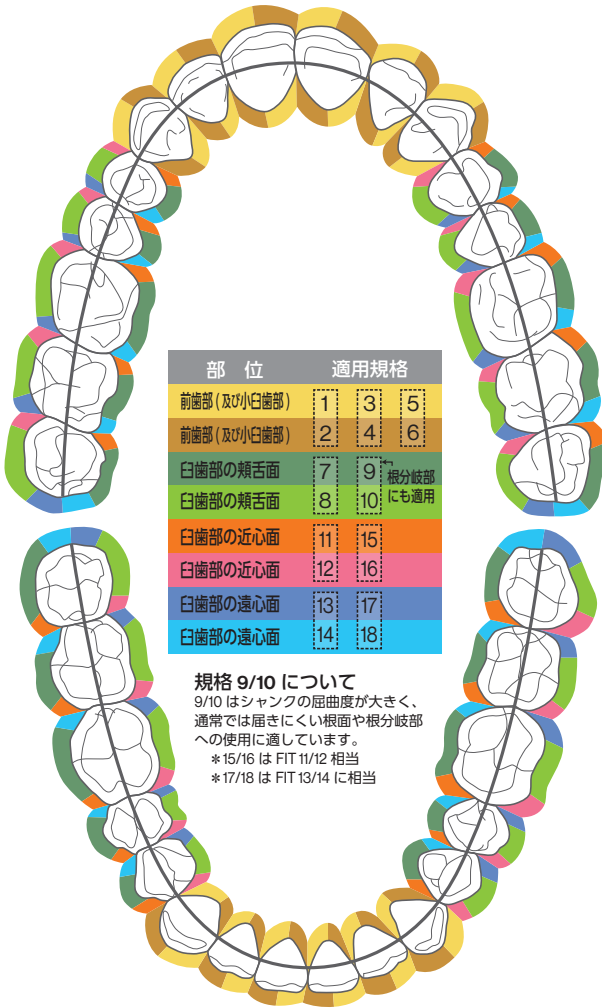

ハンドスケーラー用 Hand Scaling

■ スケーラー・キュレットに印字されているパートコードの読み方

スケーラーの裏側に記載されているパートコードを読めば、オーダーが簡単です。

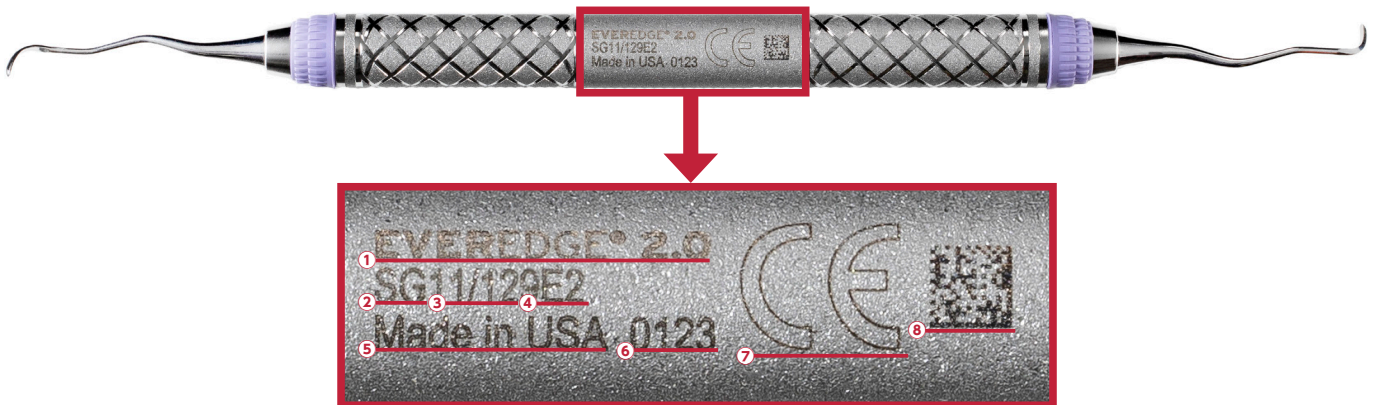


- ① **EVEREDGE® 2.0** エバーエッジ2.0のロゴ
- ② **SG.....** スケーラーの種類
 例) グレーシー SG...オリジナル、SRPG SRP SP...アフターファイブ
 SAS SS...ミニファイブ、SMS...マイクロミニファイブ
 シックル SH...衛生士用、SCNEVI...ネビィ
- ③ **11/12.....** 番手
 例) 1/2, 3/4, 5/6 (*F11/12=15/16, F13/14=17/18)
- ④ **9E2.....** ハンドル番号
 例) XE2...ハーモニー、9E2...エバーエッジ、C8E2...レジン8カラー
 7...サテンスチールカラー、6...サテンスチール
 ※2番ハンドル(角柄)の場合はハンドル番号は記載されていません。
- ⑤ **Made in USA** 原産国
- ⑥ **0123** 製造年月
 最初の2桁=月、後の2桁=年 例) 2023年1月生産分=0123
- ⑦ **CE** 欧州 (EU) 連合の基準適合マーク
- ⑧ **二次元バーコード** GTINコードと製造年月の情報

Gracey Curette Original

グレイシーキュレット オリジナル

現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。特定の部位に適合するようデザインされています。

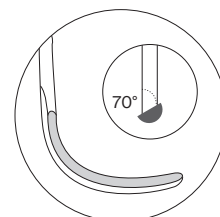

グレイシーキュレットのブレード角度

■ グレイシーキュレット オリジナル



掲載画像 SG1/2XE2

スタンダード 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG1/2XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG1/29E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SG1/2C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SG1/27	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG1/26	5,600円	#6	サテンスチール	
SG1/2	5,000円	#2	角柄	

前歯用

リジッド 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG1/2RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG1/2R9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SG1/2RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SG1/2R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG1/2R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR1/2R	5,000円	#2	角柄	

前歯用



掲載画像 SG3/4XE2

スタンダード 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG3/4XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG3/49E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	🕒
SG3/4C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	🕒
SG3/47	5,600円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SG3/46	5,600円	#6	サテンスチール	
SG3/4	5,000円	#2	角柄	🕒

前歯用

リジッド 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG3/4RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG3/4R9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	🕒
SG3/4RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	🕒
SG3/4R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SG3/4R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR3/4R	5,000円	#2	角柄	🕒

前歯用



掲載画像 SG5/6XE2

スタンダード 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG5/6XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG5/69E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SG5/6C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SG5/67	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG5/66	5,600円	#6	サテンスチール	
SG5/6	5,000円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

リジッド 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG5/6RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG5/6R9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SG5/6RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SG5/6R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG5/6R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR5/6R	5,000円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

エクストラリジッド 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG5/6ER7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	

前歯および小臼歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。



掲載画像 SG7/8XE2



● **スタンダード 7/8**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/8XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG7/89E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SG7/8C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SG7/87	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG7/86	5,600円	#6	サテンスチール	
SG7/8	5,000円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/8RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG7/8R9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SG7/8RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SG7/8R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG7/8R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR7/8R	5,000円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

エクストラリジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/8ER7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の頬舌側面用

掲載画像 SG9/10XE2



スタンダード 9/10

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG9/10XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG9/109E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG9/10C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	☺
SG9/107	5,600円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG9/106	5,600円	#6	サテンスチール	
SG9/10	5,000円	#2	角柄	☺

臼歯の頬舌側面・根分岐部用

リジッド 9/10

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG9/10RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG9/10R9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG9/10R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG9/10R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR9/10R	5,000円	#2	角柄	☺

臼歯の頬舌側面・根分岐部用

掲載画像 SG11/12XE2



● **スタンダード 11/12**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/12XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG11/129E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SG11/12C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SG11/127	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG11/126	5,600円	#6	サテンスチール	
SG11/12	5,000円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/12RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG11/12R9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SG11/12RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SG11/12R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG11/12R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR11/12R	5,000円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

エクストラリジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/12ER7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の近心面用


ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください




#XE2 ハーモニー



#9E2 エパーエッジ

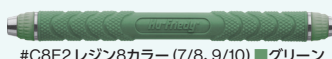

#C8E2 レジン8カラー (7/8, 9/10) ■グリーン

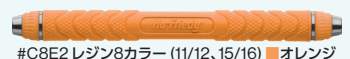


#C8E2 レジン8カラー (11/12, 15/16) ■オレンジ



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール

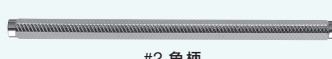

#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。



掲載画像 SG13/14XE2

● **スタンダード 13/14**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/14XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG13/149E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SG13/14C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SG13/147	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG13/146	5,600円	#6	サテンスチール	
SG13/14	5,000円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/14RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG13/149E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SG13/14RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SG13/14R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG13/14R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR13/14R	5,000円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

エクストラリジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/14ER7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の遠心面用



掲載画像 SG15/16XE2

スタンダード 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG15/16XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG15/169E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SG15/16C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SG15/167	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG15/166	5,600円	#6	サテンスチール	
SG15/16	5,000円	#2	角柄	

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じです)

リジッド 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG15/16RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG15/169E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG15/16RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	☺
SG15/16R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG15/16R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR15/16R	5,000円	#2	角柄	☺

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じです)



掲載画像 SG17/18XE2

スタンダード 17/18

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG17/18XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG17/189E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SG17/18C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SG17/187	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SG17/186	5,600円	#6	サテンスチール	
SG17/18	5,000円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用(ブレードはやや小さく、第一シャンクは、やや長めにデザインされています)

リジッド 17/18

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG17/18RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SG17/189E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG17/18RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	☺
SG17/18R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG17/18R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR17/18R	5,000円	#2	角柄	☺

臼歯の遠心面用(ブレードはやや小さく、第一シャンクは、やや長めにデザインされています)

※リジッドシャンクは、スタンダードシャンクに比べて頑丈です。柔軟性に乏しいのでシックルやホーなどのスケーラーを使用せずに強固な歯石を除去することができます。エクストラリジッドシャンクのグレイシーキュレットは、強固な歯石除去、全体のスケーリングおよび最初のディブライドメントに適しています。ブレードは、スタンダードシャンクのグレイシーキュレットと同じサイズです。

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

Gracey Curette After Five™

グレイシーキュレット アフターファイブ

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

■ グレイシーキュレット アフターファイブ



掲載画像 SRPG1/2XE2

スタンダード 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG1/2XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRPG1/29E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SRPG1/2C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SRPG1/27	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG1/26	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG1/2	5,000円	#2	角柄	

前歯用

リジッド 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP1/2RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRP1/2R9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SRP1/2RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SRP1/2R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRP1/2R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG1/2R	5,000円	#2	角柄	

前歯用



掲載画像 SRPG3/4XE2

スタンダード 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG3/4XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRPG3/49E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	🕒
SRPG3/4C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	🕒
SRPG3/47	5,600円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SRPG3/46	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG3/4	5,000円	#2	角柄	🕒

前歯用

リジッド 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP3/4RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRP3/4R9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	🕒
SRP3/4RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SRP3/4R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SRP3/4R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG3/4R	5,000円	#2	角柄	🕒

前歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー

#9E2 エバーエッジ

#C8E2 レジン8カラー (1/2, 3/4) ■グレー

#7 サテンスチールカラー

#6 サテンスチール

#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

掲載画像 SRPG5/6XE2



● **スタンダード 5/6**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG5/6XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRPG5/69E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SRPG5/6C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SRPG5/67	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG5/66	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG5/6	5,000円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

リジッド 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP5/6RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRP5/6R9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SRP5/6RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SRP5/6R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRP5/6R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG5/6R	5,000円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

エクストラリジッド 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP5/6E7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	

前歯および小臼歯用

掲載画像 SRPG7/8XE2



● **スタンダード 7/8**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG7/8XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRPG7/89E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SRPG7/8C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SRPG7/87	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG7/86	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG7/8	5,000円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP7/8RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRP7/8R9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SRP7/8RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SRP7/8R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRP7/8R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG7/8R	5,000円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

エクストラリジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP7/8E7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の頬舌側面用

掲載画像 SRPG11/12XE2



● **スタンダード 11/12**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG11/12XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRPG11/129E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SRP11/12C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRPG11/127	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG11/126	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG11/12	5,000円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP11/12RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRP11/12R9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SRP11/12RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRP11/12R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRP11/12R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG11/12R	5,000円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

エクストラリジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP11/12E7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の近心面用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (5/6) ■イエロー



#C8E2 レジン8カラー (7/8, 9/10) ■グリーン




#C8E2 レジン8カラー (11/12, 15/16) ■オレンジ



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール

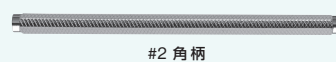

#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

● おすすめ品

☑ 取寄品

取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

グレイシーキュレット アフターファイブ



掲載画像 SRPG13/14XE2



● スタンダード 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG13/14XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRPG13/149E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SRP13/14C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SRPG13/147	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG13/146	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG13/14	5,000円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP13/14RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRP13/149E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SRP13/14C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SRP13/14R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRP13/14R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG13/14R	5,000円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

エクストラリジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP13/14E7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の遠心面用



掲載画像 SRPG15/16XE2

スタンダード 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG15/16XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SRPG15/169E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SRP15/16C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRPG15/167	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG15/166	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG15/16	5,000円	#2	角柄	

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じです)

リジッド 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP15/16R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	☑
SRP15/169E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	☑
SRP15/16RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRP15/16R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	☑
SRP15/16R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG15/16R	5,000円	#2	角柄	☑

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じです)

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (11/12、15/16) ■オレンジ



#C8E2 レジン8カラー (13/14、17/18) ■ブルー



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

標準価格は全て税抜価格です。

ハンドスケーリング Hand Scaling

Gracey
Curettes Mini
Five™

グレイシーキュレット ミニファイブ

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブの半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

■ グレイシーキュレット ミニファイブ



スタンダード 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS1/2XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS1/29E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SAS1/2C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SAS1/27	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS1/26	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS1/2	5,000円	#2	角柄	

前歯用

リジッド 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS1/2RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS1/2R9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SAS1/2RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SAS1/2R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS1/2R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS1/2R	5,000円	#2	角柄	

前歯用



スタンダード 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS3/4XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS3/49E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	🕒
SAS3/4C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	🕒
SAS3/47	5,600円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SAS3/46	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS3/4	5,000円	#2	角柄	🕒

前歯用

リジッド 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS3/4RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS3/4R9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	🕒
SAS3/4RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	🕒
SAS3/4R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SAS3/4R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS3/4R	5,000円	#2	角柄	🕒

前歯用



スタンダード 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS5/6XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS5/69E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SAS5/6C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SAS5/67	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS5/66	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS5/6	5,000円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

リジッド 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS5/6RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS5/6R9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SAS5/6RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SAS5/6R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS5/6R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS5/6R	5,000円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

● おすすめ品

☑ 取寄品

取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

グレイシーキュレットミニファイブ



ハンドスケレーティング Hand Scaling



掲載画像 SAS7/8XE2

● スタンダード 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS7/8XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS7/89E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SAS7/8C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SAS7/87	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS7/86	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS7/8	5,000円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS7/8RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS7/8R9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SAS7/8RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SAS7/8R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS7/8R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS7/8R	5,000円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用



掲載画像 SAS11/12XE2

● スタンダード 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS11/12XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS11/129E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SAS11/12C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SAS11/127	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS11/126	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS11/12	5,000円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS11/12RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS11/12R9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SAS11/12RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SAS11/12R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS11/12R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS11/12R	5,000円	#2	角柄	

臼歯の近心面用



掲載画像 SAS13/14XE2

● スタンダード 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS13/14XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS13/149E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SAS13/14C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SAS13/147	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS13/146	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS13/14	5,000円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS13/14RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS13/14R9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SAS13/14RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SAS13/14R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS13/14R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS13/14R	5,000円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用



掲載画像 SAS15/16XE2

スタンダード 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS15/16XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS15/169E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SAS15/16C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SAS15/167	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SAS15/166	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS15/16	5,000円	#2	角柄	

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じです)

リジッド 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS15/16RXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SAS15/16R9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	☑
SAS15/16RC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	☑
SAS15/16R7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	☑
SAS15/16R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS15/16R	5,000円	#2	角柄	☑

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じです)




スタンダード 17/18

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS17/18XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	

臼歯の遠心面用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください

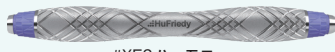


#XE2 ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (7/8、9/10) ■グリーン

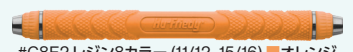

#C8E2 レジン8カラー (11/12、15/16) ■オレンジ



#C8E2 レジン8カラー (13/14、17/18) ■ブルー



#6 サテンスチール



#2 角柄



#7 サテンスチールカラー

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

標準価格は全て税抜価格です。

Gracey Micro Mini Five™ Curette

グレイシーキュレット マイクロミニファイブ

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルより30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。

グレイシーキュレット マイクロミニファイブ

掲載画像 SMS1/2XE2



リジッド 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS1/2XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SMS1/29E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	

前歯用

掲載画像 SMS7/8XE2



リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS7/8XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SMS7/89E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	

臼歯の頬舌側面用

掲載画像 SMS11/12XE2



リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS11/12XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SMS11/129E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	

臼歯の近心面用

掲載画像 SMS13/14XE2



リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS13/14XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SMS13/149E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	

臼歯の遠心面用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2ハーモニー



#9E2 エパーエッジ

☑取寄品 取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



グレイシーキュレット バイオジェント

- ・薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- ・これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- ・アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!
- ・歯周治療の世界的名医コーテリーニ先生ご考案!

【オリジナルとの比較】
ブレードの幅
-20%

【オリジナルとの比較】
シャンクの硬さ
リジッド

【オリジナルとの比較】
ブレードの長さ
-25%



■ グレイシーキュレット バイオジェント



1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG1/29LCE2	6,000 円	#9E2	エバーエッジ	
前歯用				



7/8				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/89LCE2	6,000 円	#9E2	エバーエッジ	
臼歯の頬舌側面用				



11/12				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/129LCE2	6,000 円	#9E2	エバーエッジ	
臼歯の近心面用				



13/14				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/149LCE2	6,000 円	#9E2	エバーエッジ	
臼歯の遠心面用				

ハンドルの種類



#9E2 エバーエッジ

※バイオジェントキュレットのグリップの色は番手によって異なります。

Gracey Curette Ohta Type

グレイシーキュレット オオタタイプ

ブレードの長さがグレイシーキュレットオリジナルの2/3になったタイプです。日本人の小さな歯牙用に開発されました。




オリジナル オオタタイプ


グレイシーキュレット オオタタイプ




1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG01/2	5,400円	#2	角柄	
前歯用				

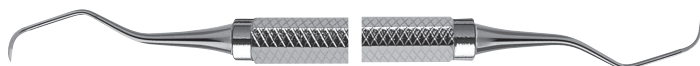


3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG03/4	5,400円	#2	角柄	
前歯用				

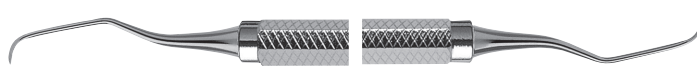

5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG05/6	5,400円	#2	角柄	
前歯および小臼歯用				

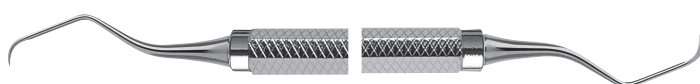

7/8				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG07/8	5,400円	#2	角柄	
臼歯の頬舌側面用				

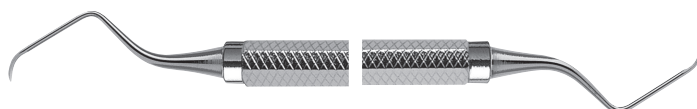

9/10				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG09/10	5,400円	#2	角柄	
臼歯の頬舌側面・根分岐部用				



11/12				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG011/12	5,400円	#2	角柄	
臼歯の遠心面用				



13/14				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG013/14	5,400円	#2	角柄	
臼歯の遠心面用				

ハンドルの種類



#2 角柄




取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Universal Curettes

ユニバーサルキュレット

歯肉縁上および歯肉縁下に付着した歯石除去に使用するキュレットです。ブレード部分はシャंकに対して90°の角度が付けられており、二つの平行したカッティングエッジが丸みを持たせた先端部で接合するようになっています。

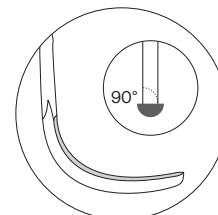

ユニバーサルキュレットのブレード角度

■ ユニバーサルキュレット ランガー

ランガーキュレットは、グレーシーキュレットのシャंकのデザインとユニバーサルキュレットの両刃のブレードの組み合わせで(ブレードの角度:90°)、4種ですべての歯面のスケールリングが可能です。

歯周病専門医で、コロムビア大学の前臨床教授のバートン・ランガー先生により1985年に開発されました。



掲載画像 SL1/2XE2

ランガー 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL1/2XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SL1/29E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SL1/2C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ピンク	

下顎臼歯用



掲載画像 SL3/4XE2

ランガー 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL3/4XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SL3/49E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SL3/4C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ピンク	

上顎臼歯用



掲載画像 SL5/6XE2

ランガー 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL5/6XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SL5/69E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SL5/6C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ピンク	

前歯用



掲載画像 SL17/18XE2

ランガー 17/18				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL17/18XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SL17/189E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	
SL17/18C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ピンク	

上下顎臼歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2ハーモニー



#9E2エバーエッジ



#C8E2レジン8カラー (13/14) ■ピンク



ランガー ミニファイブ 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL1/2MF9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	

下顎臼歯用



ランガー ミニファイブ 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL3/4MF9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	

上顎臼歯用




ランガー ミニファイブ 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL5/6MF9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	


前歯用

ランガーキュレットは、グレーシーキュレットのシャングのデザインとユニバーサルキュレットのブレードの組み合わせです。これらのインスツルメントですべての歯面のスケーリングが可能です。

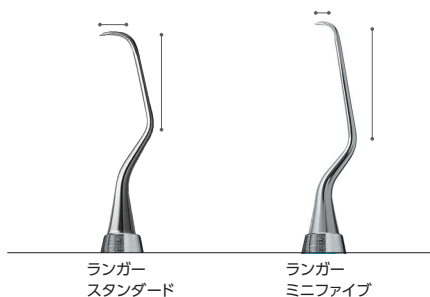

- ミニファイブ (Mini Five™) の第一シャングは、通常のランガーより3mm長く、5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザインです。
- ブレードが10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の腫脹を軽減します。
- ミニファイブ (Mini Five™) は、ブレードが通常のランガーの半分のサイズで、狭いポケットや根分岐部に適しています。

ランガー使用部位チャート

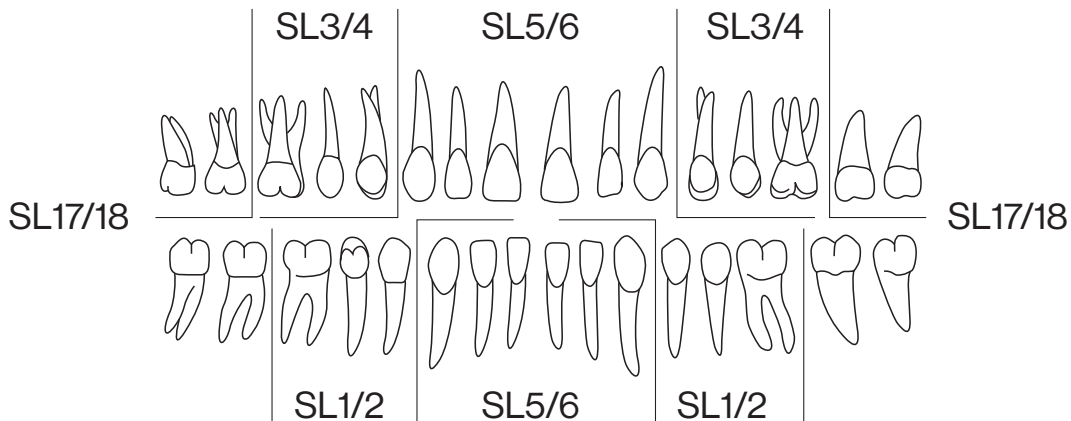

ハンドルの種類



#9E2 エバーエッジ

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ユニバーサルキュレット



■ ユニバーサルキュレット コロンビア大学型

コロンビア大学型キュレットは、元々、1930年代にコロンビア大学のイサドール・ハーシュフェルト先生により考案されました。3種のコロンビア大学型デザインには、長年にわたり蓄積されてきた英知が結集しています。

掲載画像 SC2R/2LXE2



2R/2L				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SC2R/2LXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SC2R/2L9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	🕒
SC2R/2LC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ピンク	🕒

前歯用

掲載画像 SC4R/4LXE2



● 4R/4L					白歯用
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	
SC4R/4LXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー		
SC4R/4L9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ		
SC4R/4LC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ピンク		

白歯用

掲載画像 SC13/14XE2



● 13/14					ユニバーサル
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	
SC13/14XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー		
SC13/149E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ		
SC13/14C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■ピンク		

ユニバーサル

■ ユニバーサルキュレット バーンハルト



1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SBH1/29E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	



5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SBH5/69E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2レジン8カラー (13/14) ■ピンク

ユニバーサルキュレット インディアナ大学型



13/14 前歯用				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SIU13/146	5,600円	#6	サテンスチール	☺



17/18 白歯用				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SIU17/186	5,600円	#6	サテンスチール	☺

ユニバーサルキュレット マッコール



掲載画像 SM17/18XE2

ユニバーサルキュレット マッコール 17/18				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SM17/18XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SM17/189E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	

ユニバーサルキュレット ヤンガーブッド



7/8				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SYG7/89E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	

ユニバーサルキュレット 23A



23A				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SM23A9E2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	☺

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ




#6 サテンスチール




シックルスケラー (鎌形)

歯肉縁上の歯石除去に使用します。

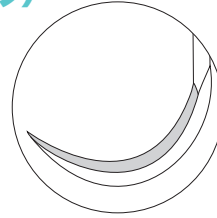

曲のシックルスケラー

曲線上のブレードの両側にあるカッティングエッジが先端まで伸び、鋭利な先端を形成しています。

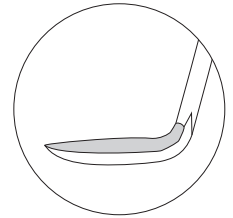

直のシックルスケラー

まっすぐなブレードの両側にあるカッティングエッジが先端まで伸び、鋭利な先端を形成しています。ジャケットスケラーとしても知られています。

■ スケラー

掲載画像 SH6/7XE2



● 衛生士用 H6/H7

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SH6/7XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SH6/79E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SH6/7C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	
SH6/77	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SH6/76	5,600円	#6	サテンスチール	
SH6/7	5,000円	#2	角柄	

超薄型コントラアングルのデザイン。隣接歯間部に適しています。シャンクのアングルにより前歯および小臼歯に対応できます。

掲載画像 SH5/33XE2



● 衛生士用 H5/33

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SH5/33XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SH5/339E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SH5/33C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	
SH5/337	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SH5/336	5,600円	#6	サテンスチール	
SH5/33	5,000円	#2	角柄	

非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。前歯の歯頸部や歯間部のスケールングに適しています。

掲載画像 S204SX2



204S

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
S204SX2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
S204S9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
S204SC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	☑

白歯歯肉縁上の隣接歯間部用。

掲載画像 S204SDXE2



● 204SD

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
S204SDXE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
S204SD9E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
S204SDC8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	
S204SD7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
S204SD6	5,600円	#6	サテンスチール	
S204SD2	5,000円	#2	角柄	

コントラアングルのシャンクデザインにより、白歯部適心面に適しています。

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー ■パープル
※使用部位によってハンドル色が決まっています。




#C8E2 レジン8カラー ■レッド
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#7 サテンスチールカラー




#6 サテンスチール

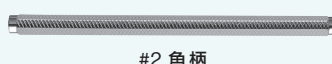

#2 角柄

■ スケーラー ネビィ

シッフルスケーラーネビィシリーズは、40年以上のキャリアを持つベテラン職人と口腔解剖学を熟知した臨床家達の手によって共同開発されたスケーラー群です。

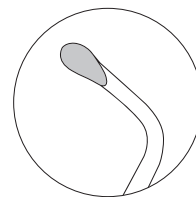

掲載画像 SCNEV1XE2



● ネビィ1 前歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEV1XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SCNEV19E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SCNEV1C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	
SCNEV1I7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	
SCNEV1I	5,600円	#6	サテンスチール	

曲のシッフルスケーラーとスプーン型の作業部で、前歯に使用します。特に舌側面のスケーリングに有効です。



左側切歯の舌側面




掲載画像 SCNEV2XE2

ネビィ2 臼歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEV2XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SCNEV29E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SCNEV2C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	
SCNEV2I7	5,600円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SCNEV2I	5,600円	#6	サテンスチール	🕒

曲のシッフルスケーラーで、臼歯に使用します。細いブレードなので、隣接歯間部に使いやすく、シャンクも歯面に適合させやすいデザインです。

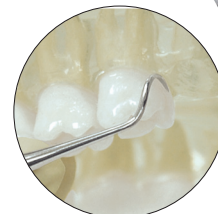

左側第二大臼歯の遠心面



掲載画像 SCNEV3XE2

● ネビィ3 臼歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEV3XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SCNEV39E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SCNEV3C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	

細くスレンダーな両面カッティングエッジ(両刃)。狭小なコンタクトや隣接歯間部に適しています。コントラアングルのシャンクデザインにより臼歯へ適合させやすいデザインです。



左側第一大臼歯の近心面



掲載画像 SCNEV4XE2

ネビィ4 臼歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEV4XE2	6,400円	#XE2	ハーモニー	
SCNEV49E2	6,000円	#9E2	エパーエッジ	
SCNEV4C8E2	5,800円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	

先端に従って細くなっていくテーパ型両面カッティングエッジ(両刃)。長いブレードが、臼歯の歯冠形態に沿うため、遠心・近心面への到達性に優れています。



右側第二大臼歯の遠心面

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー ■パープル
※使用部位によってハンドル色が決まっています。




#C8E2 レジン8カラー ■レッド
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール

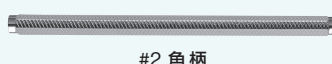


#2 角柄



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ スケーラー ポピュラータイプ

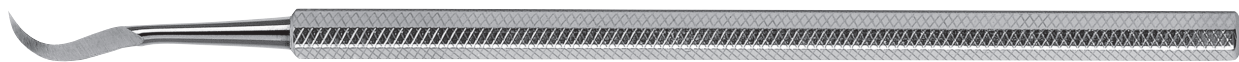

ポピュラータイプ1				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPSDE1	4,000円	#1	角柄	☺



ポピュラータイプ2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPSDE2	4,000円	#1	角柄	☺



ポピュラータイプ3				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPSDE3	4,000円	#1	角柄	☺

■ スケーラー

歯周外科時の肉芽除去などに適用です。

掲載画像 SB2/36



ボール 2/3				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SB2/36	5,600円	#6	サテンスチール	
SB2/3	5,000円	#2	角柄	



クレイン・カプラン6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCK66	5,600円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#6 サテンスチール



#2 角柄

Area-Specific Currettes

部位特定キュレット

特定の部位に適合するようデザインされています。


■ ビジョンカーベット

- ・50%短い湾曲したブレード
- ・5mmおよび10mmのシャンクマーク
- ・ハンドル上にカットングエッジ識別マーク(+)



サブゼロ				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SGCSUB-06	5,600円	#6	サテンスチール	

長いシャンクが前歯部の深いポケットに届きます。

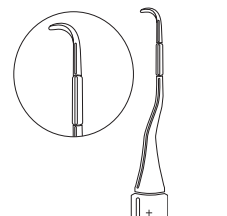

■ ハッチンソンキュレット



1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SHU1/2	5,000円	#2	角柄	☺

前歯用

■ ハイジニストキュレット



ハイジニストキュレット				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SHF-HYGE2	6,000円	#9E2	エバーエッジ	☺

■ ファーケーションキュレット

根面のへこみおよび根分岐部用。デマルコは前歯部舌側面のステイン除去にも適しています。



デマルコ 1				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDM16	6,000円	#6	サテンスチール	☺



デマルコ 2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDM26	6,000円	#6	サテンスチール	☺

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#9E2 エバーエッジ



#6 サテンスチール



#2 角柄




取寄品欄に☒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Hoe Scalars Chisel Scalars

ホースケーラー チゼルケーラー

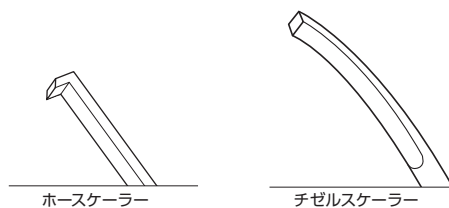

ホースケーラー

チゼルケーラー

■ ホースケーラー

強固な歯石や付着物を砕いて、除去するのに使用します。プルストロークで使用します。



ターナー 片頭 15

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SXS156	5,600円	#6	サテンスチール	

前歯部舌側用



オーバン 両頭 6/7

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SO6/76	5,600円	#6	サテンスチール	



オーバン 両頭 8/9

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SO8/96	5,600円	#6	サテンスチール	

■ チゼルケーラー

下顎前歯のブリッジ状の歯石を除去するのに使用します。プッシュストロークで使用します。




クッシング 片頭 62

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCU62	5,000円	#1	角柄	



ダービー・ペリー 両頭 5K/6K

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDP5/6K	5,000円	#2	角柄	

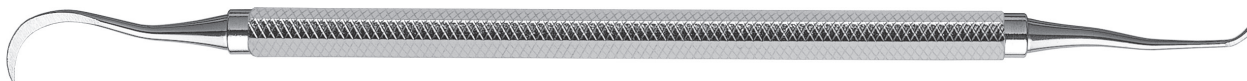

ダービー・ペリー 両頭 9K/11K

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDP9/11K	5,000円	#2	角柄	

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#6 サテンスチール (片頭)



#6 サテンスチール (両頭)



#1 角柄 (片頭)



#1 角柄 (両頭)

File Scalers

ファイルケーラー

■ ファイルケーラー ハーシュフェルト

強固な歯石や付着物を砕いて、除去するのに使用します。プルストロックで使用します。



ハーシュフェルト 3/7

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FH3/76	5,600円	#6	サテンスチール	

頬舌側用



ハーシュフェルト 5/11

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FH5/116	5,600円	#6	サテンスチール	

近遠心用



ハーシュフェルト 9/10


パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FH9/106	5,600円	#6	サテンスチール	

前歯用

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

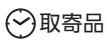

取寄品 取寄品欄に☒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ファイルスケーラー ダイヤモンドテック (Diamondtec™)


強固な歯石除去に使用します。多方向へのストロークが可能です。根分岐部(ファーケーション)や根面のへこみ部分のスケーリングに適したサイズと形です。両頭ですので、効果的なスケーリングが行えます。太いハンドルは、人間工学的に握りやすいデザインで手根管症候群の症状緩和にも役立ちます。カラーリングにより、インスツルメントが識別しやすくなります。



ネイバース*



近遠心用*

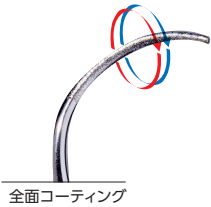

全面コーティング



ネイバース				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDCN7	10,200円	#7	サテンスチールカラー	






近遠心用				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDCM/D7	10,200円	#7	サテンスチールカラー	

※出典:
L・J・ガーワトスキー、D・B・マクフォール、D・スタック:歯科衛生士のための手根管症候群予防法。
歯科衛生学会誌、1992年2月

ハンドルの種類



#7 サテンスチールカラー

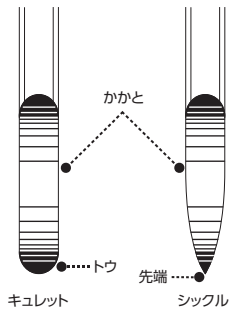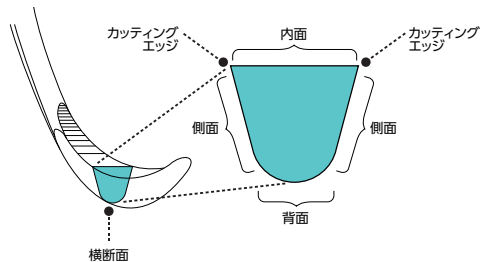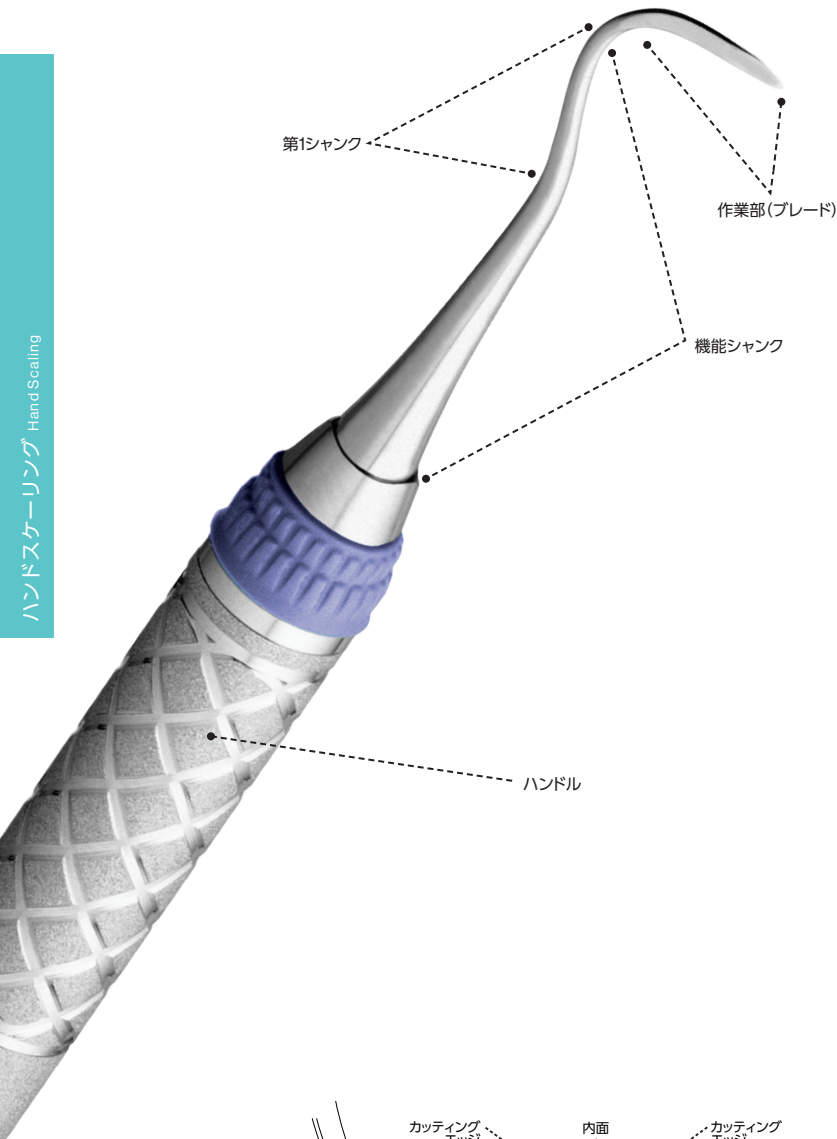

スケーラーとキュレット

すべての歯科用インスツルメントには、基本的なデザインの特徴があります。左の図は、スケーラーやキュレットのデザインの主な原則の概略を示しています。

インスツルメントを構成する3つの部位

1. ハンドル: インスツルメントを保持する部位。
2. シャング: ハンドルと作業部をつなぐ部位。
3. 作業部: 実際に歯面にあたる部位。

ハンドル

インスツルメントのハンドルには、様々な形やスタイルがあります。以下の要素を考慮してハンドルを選択することが大切です。

- 重量: 中空ハンドルは触感の伝達を向上させ、術者の疲労を軽減します。
- 直径: 太いハンドルは、コントロールがしやすく、軽い力で把持することができます。
- 滑り止め: ハンドル表面に付与された凸凹によって滑りにくく、操作性が向上します。

シャング

第一シャング (ターミナルシャング)

作業部 (ブレード) とシャングの第1屈曲との間を第1シャング (ターミナルシャング) と呼びます。第1シャングは、作業部を歯面に正しくあてるために目印となる部位です。また、第1シャングの長さは、歯肉縁上用と歯肉縁下用のキュレットによって異なります。

機能シャング (ファンクショナルシャング)

作業部 (ブレード) からハンドルまでの間を機能シャング (ファンクショナルシャング) と呼び、様々な長さのものがあります。長めの機能シャングは、臼歯部や歯周ポケットの存在する根面を処置する場合に必要です。短めの機能シャングは、歯肉縁上の歯石除去や前歯部の処置に適しています。

作業部 (ブレード)

作業部 (ブレード) は内面、側面、背面、先端などの部分で構成されています。先端が丸いブレードはキュレットと分類されます。先端が尖ったブレードは、シックルスケーラーと分類されます。

イラスト提供: J・S・ニールド: 歯科衛生インスツルメントの基礎、第二版: Lea & Febiger, 1988年。



インструメントの使用に関連するシャンクの柔軟性

シャンク	使用するケース	例
柔軟なもの	<ul style="list-style-type: none"> ・歯肉縁下の歯石の探查 ・細かい歯石の除去 ・シャンクとハンドルを通して術者の指に感触を伝達 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレイシーキュレットスタンダード ・エクスプローラー
中程度のもの	<ul style="list-style-type: none"> ・中程度または少量の歯石除去 ・中程度の歯石付着部の探查や除去に必要な良好な感触を伝達 	<ul style="list-style-type: none"> ・ユニバーサルキュレット
リジッド	<ul style="list-style-type: none"> ・強固な歯石除去 ・触感の伝達性が低いので、歯石の探查は困難 	<ul style="list-style-type: none"> ・シックルスケララー ・ペリオドンタルファイル ・グレイシーキュレットリジッド ・ホースケララー
エクストラリジッド	<ul style="list-style-type: none"> ・強固な歯石除去 ・触感の伝達性は極めて低い 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレイシーキュレットエクストラリジッド

インструメントのバランス

効果的に機能するためには、インструメントはバランスが取れている必要があります。

バランスの取れたインструメントは、ハンドルの長軸から2mm以内に作業部の中心があります。



バランスのとれたインструメント




バランスのとれていないインструメント

インструメントの刻印

デザイン名と番号がハンドルの長い方向に沿って表示されている場合、それぞれの番号は表示されている側に近い方の作業部を示しています。

デザイン名と番号がハンドルの周囲に表示されている場合には、最初の番号（左側）が上の作業部を、2番目の番号（右側）が下の作業部を示しています。

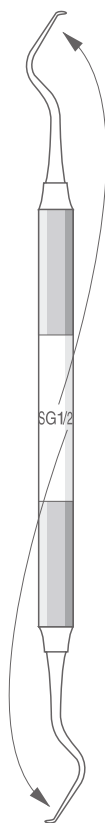

■ スケララー・キュレットに印字されているパートコードの読み方

スケララーの裏側に記載されているパートコードを読めば、オーダーが簡単です。



① **EVEREDGE® 2.0** エバーエッジ2.0のロゴ

② **SG.....** スケララーの種類

例) グレイシー SG...オリジナル、SRPG SRP SP...アフターファイブ
SAS SS...ミニファイブ、SMS...マイクロミニファイブ
シックル SH...衛生生用、SCNEVI...ネビィ

③ **11/12.....** 番手

例) 1/2, 3/4, 5/6 (※F11/12=15/16, F13/14=17/18)

④ **9E2.....** ハンドル番号

例) XE2...ハーモニー、9E2...エバーエッジ、C8E2...レジン8カラー
7...サテンスチールカラー、6...サテンスチール
※2ハンドル(角柄)の場合はハンドル番号は記載されていません。

⑤ **Made in USA** 原産国

⑥ **0123** 製造年月

⑦ **CE** 最初の2桁=月、後の2桁=年 例) 2023年1月生産分=0123

欧州 (EU) 連合の基準適合マーク

⑧ **二次元バーコード** GTINコードと製造年月の情報

GTINコードと製造年月の情報

The Best In Practice

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](https://www.hu-friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2023年5月21日現在のものです。取仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY ©2023 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-120J/2305_HandScaling

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change features of products, images and text at any time without notice.

【販売名/一般的な名称/医療機器届出番号】

■グレースケーラー/歯間用キュレット/13B3X10195G01101 ■ユニバーサルキュレット/歯間用キュレット/13B3X10195G01102 ■グレースケーラー/歯間用キュレット/13B3X10195G02101 ■ビジョンカーベット/歯間用キュレット/13B3X10195G01105 ■エアスベジフックキュレット/歯間用キュレット/13B3X10195G01106 ■フアーケーションキュレット/歯間用キュレット/13B3X10195G01103 ■ホースケーラー/歯科用スケーラー/13B3X10195G02104 ■チゼルスケーラー/歯科用スケーラー/13B3X10195G02105 ■ファイルスケーラー/歯科用スケーラー/13B3X10195G02102 ●医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice