


ヒューフレディ スケーラー・検査 キャンペーン!

対象期間: 2024. 4/22(月) ▶ 6/20(木)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
日頃のご愛顧に感謝し、**スケーラー・検査**の製品の中から、
選りすぐりの製品をこのキャンペーンにてご紹介いたします。
現在一部の製品につきましては、ご発注を多く頂いているため、
お届けまで時間を要す製品もございますが、
この期間中にご注文いただくキャンペーン対象商品は
特別価格にてご提供いたします。
是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、
予めご了承ください。
ご購入の際はお出りの
歯科商店に注文してください。

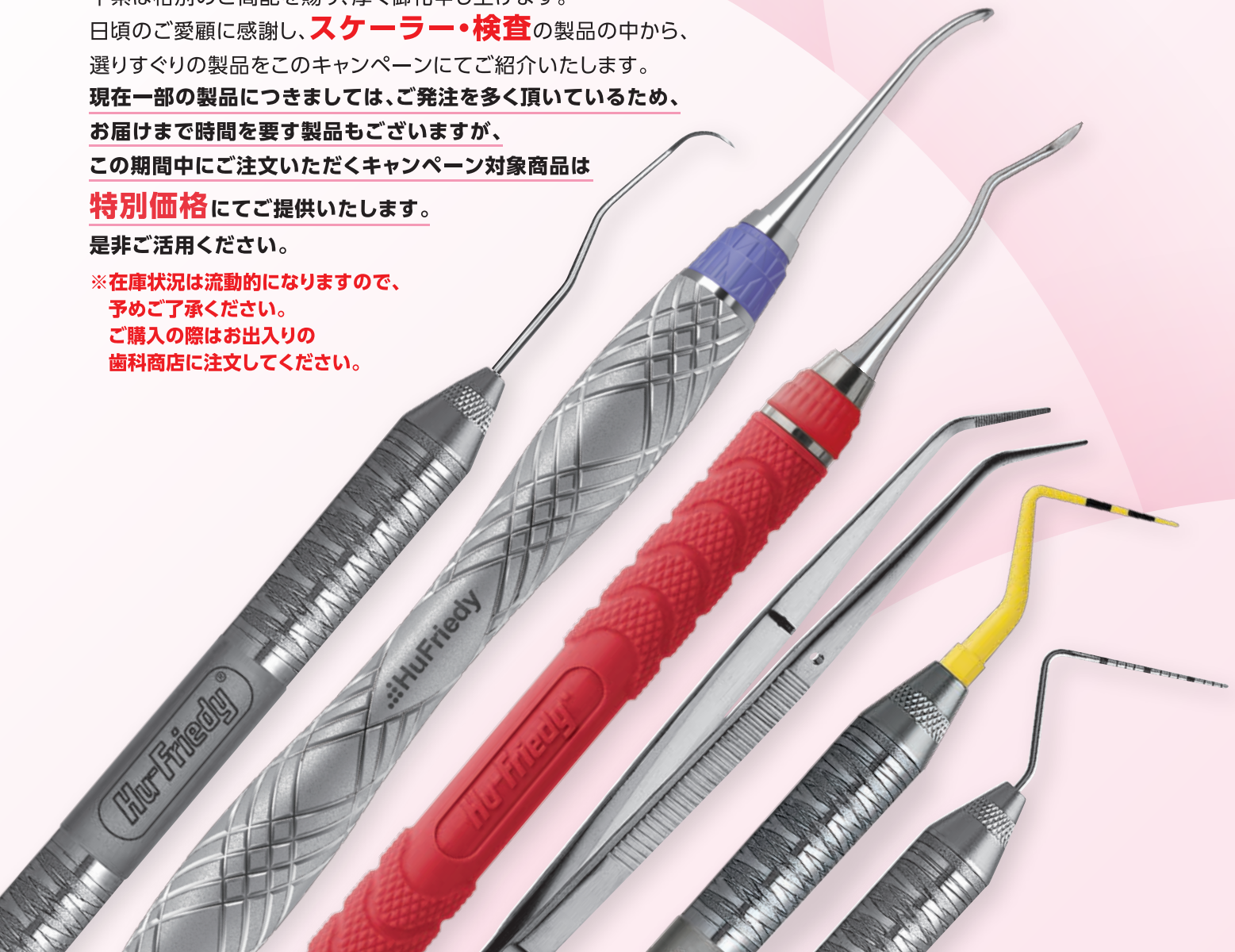

※上記製品左からEXD11/12A6、SCNEV13XE2、S204SDC8E2、DPU17、PCV11KIT6、PCPUNC156、SDKKIT

掲載製品

- グレーシーキュレット
- シックルスケーラー
- ユニバーサルキュレット
- インプラケアII
- カラービュープローブ
- HDミラー・ロジウムコーティングミラー
- エクスプローラー(探針)
- カラーコードプローブ
- ピンセット
- インストルメントシャープニング
・サイドキック
・ダイヤモンドシャープニングカード
・デュアルストーン

HARMONY™

ハーモニー エルゴノミック スケーラー

Designed with TrueFit™ Technology

歯牙に加わる圧力を40.9%低減※

※ヒューフレディ社製角柄ハンドル(#2)との比較での平均値
ハーモニー エルゴノミック スケーラー及びキュレットは、スクレーリング時に歯牙に加わる圧力を小さくできるため、患者様の快適さを高め、術者の疲労も軽減することができます。

表1: スクレーリング時に歯牙に加わった圧力の平均値

ハンドルの種類	ピーク圧時点の平均値 (N)	ハーモニー エルゴノミック スケーラーハンドルとの差 (増分)
ハーモニー (#XE2)	1.20	—
角柄 (#2)	2.03	40.9%



シャープさがさらに長持ち! コーティングなしの高性能!!

刃物の調査機関CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association) の試験※1結果において、エバーエッジ (EverEdge™) 2.0のカットティングエッジが試験用のシリコンストリップに加えた圧力は、開封時に約6ニュートン(約600g)、500回のストローク後も約7ニュートン(約700g)という結果でした。エバーエッジ (EverEdge™) 2.0のカットティングエッジが付与されたハーモニー (Harmony™) エルゴノミック スケーラーはシャープさが持続するため、軽い力で効率よくスクレーリング操作ができ、術者は疲れにくく、患者様の負担も軽減されます。


※1: 測定用に調整されたシリコンストリップにブレードを反復して押し当て、ストリップを突き抜いた際の圧力を測定(加えられた圧力が低いほどブレードが鋭利なことを示し、ストロークによってブレードの鋭利さが低減すると、より多くの圧力を加える必要があるためニュートンの数値は増加する)

あらゆる方向から確実に 素早い把持が可能



シリコングリップが従来品と比較して30%長くなり、より**確実に且つ鋭敏に把持が可能**になりました。グリップ部分の幾何学模様はあらゆる方向から把持してもしっかりと操作できるように設計されています。

※従来のIMS シグネチャーグリップはサイズが異なるためご使用いただけません。

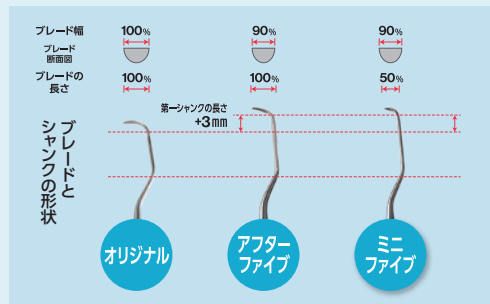グレイシーキュレット/シックルスケーラー 一覧表 (作業部の材質とハンドルのご紹介)



スタンダード: 細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。超音波スクレーリング後の仕上げとして細かなスクレーリングやルートプレーニングに使用。
リジッド: スタンダードシャंकに比べたくて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。

作業部の材質	エバーエッジ 2.0 (EverEdge™ 2.0)	
	<p>ヒューフレディ社がキュレット・スケーラーのエッジのシャープさをより持続するために開発した優れた合金。ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、3段階の熱処理の温度・時間設定を改善、ブレードの表面処理を向上させ、パリの発生を抑制する合金です。</p>	
ハンドルオプション	<p>ハーモニー (Harmony™) #XE2</p>  <p>人間工学に基づく技術「TrueFit™テクノロジー」で設計されたハンドル。</p> <p>6,400円</p>	<p>エバーエッジ (EverEdge™) #9E2</p>  <p>人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着)</p> <p>6,000円</p>

グレイシーキュレット	オリジナル	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)
	アフターファイブ	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)
	ミニファイブ	スタンダード 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14) リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)
シックルスケーラー	ネビィ	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
	衛生土用	H5/33, H6/H7	H5/33, H6/H7
	前歯用、臼歯用	204S, 204SD, モース 0/00	204S, 204SD, モース 0/00

把持力が57.3%低減*

※ヒューフレディ社製角柄ハンドル(#2)との比較での平均値

軽い力でインスツルメントを把持できるため、反復動作による手の疲労や手根管症候群などのリスクを軽減することができます。

表2: スケーリング時の親指・人差し指・中指の総把持力の平均値 (歯牙に加わった圧力が最大値時)

ハンドルの種類	親指、人差し指、中指の総把持力の平均値 (kPa)	ハーモニーエルゴノミック スケーラーハンドルとの差 (増分)
ハーモニー(#XE2)	29.75	-
角柄(#2)	69.69	57.3%



重すぎず軽すぎない、『バランスの良い』重さのハンドル

ハーモニー エルゴノミック スケーラーのハンドルはエバーエッジハンドル(#9E2)と同様『バランスの良い』重量感で、砂時計の形状をしたハンドルは術者の手によりフィットするよう設計されています。

信頼感のあるメタルハンドル

耐久性が高く洗浄が容易なメタルハンドルを採用しています。滑りにくい2重らせんデザインのハンドルは、手指感覚を向上、疲労を軽減します。

280万を超えるデータを収集

(世界各国のDHの方々が参加した試験結果の合計)




スケーリング時の手の動きをデータ化して、より把持しやすいようにデザインされたハンドル



シャープさがさらに長持ち!!
コーティングなしの高性能


イミュニティスチール (Immunity Steel™)

ヒューフレディ社で独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金です。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。



レジン8カラー (Resin 8 Colors) #C8E2	サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™) #7	サテンスチール (Satin Steel™) #6	角柄 #2
 レジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スケーラーの識別が容易。(ハンドルと同色のグリップを標準装着) 5,800円	 シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着) 5,600円	 力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。 5,600円	 8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。 5,000円
スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14) ※9/10はスタンダードのみ	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)		
スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)		
スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)		
1, 2, 3, 4	1, 2		
H5/33, H6/H7	H5/33, H6/H7		
204S, 204SD, モース 0/00	204SD		

※標準価格は全て税抜

グレーシーキュレット

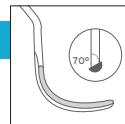

15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14)はシャングの角度を大きくしているため、対合歯に干渉される事なく、より良くフィットします。

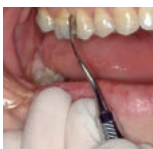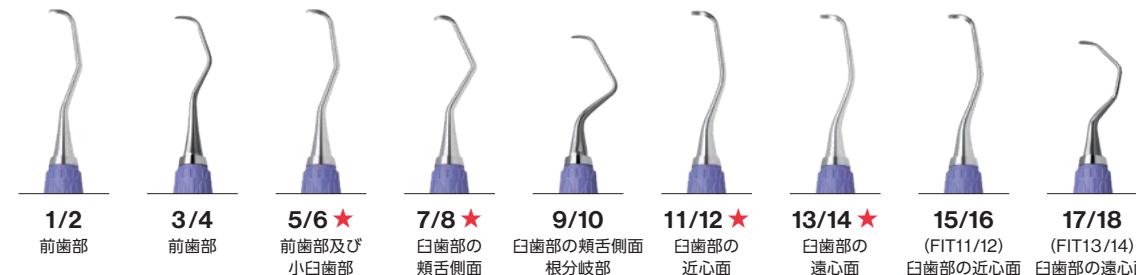

通常の11/12

通常の11/12では、近心面に平行になるように第一シャングを固定することが困難な場合があります。



15/16 (FIT11/12)

15/16 (FIT11/12)はシャングの角度を大きく取ったことにより、インスツルメントのポジショニングが容易になり、固定点も近くに取れます。



通常の13/14


通常の13/14では、遠心面への到達が患者様の開口度によって制限されることがあります。



17/18 (FIT13/14)

17/18 (FIT13/14)はハンドルを咬合面と水平に近い角度で把持する事ができ、開口量の少ない患者様でも到達し難い遠心面に到達しやすくなります。

シクルスケーラー

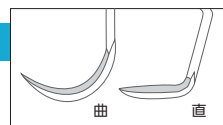

喫煙される患者さん等ステインが沈着しやすい方に…
医院に1本は必需品です!



ネビィ1(前歯用)★

コンパクトな鎌型とスプーン型の2種のブレード。前歯のステインや歯石を効率良く除去。

ネビィ2(臼歯用)

大きな屈曲と長めのブレードで、取り残しができやすい最後臼歯遠心面や歯間部へのアクセスが容易。

ネビィ3(臼歯用)★

コンパクトで細いブレードは狭小な歯間部に適用。緩やかな屈曲がついているので、特に臼歯部のスケールリング向き。

ネビィ4(臼歯用)

ネビィシリーズで最大サイズ且つ硬いリジッドタイプのブレード。長めのブレードは歯冠形態に沿わせながら、近遠心面への到達が可能。



衛生士用 H5/33

非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。前歯の歯頸部や歯間部のスケールリングに適用。

衛生士用 H6/H7

超薄型コントラアングルのデザイン。隣接歯間部に適用。シャングのアングルにより前歯および小臼歯に対応。

204S

臼歯歯肉縁上の隣接歯間部用。


204SD

コントラアングルのシャングデザインにより、臼歯部近遠心面に適用。

モース 0/00

叢生歯や細かい操作に向いている前歯部用の小型ブレード。

ユニバーサルキュレット

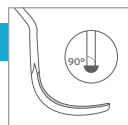

マッコール 17/18

歯牙を包み込むようなブレードの形状。同じ作業部で遠心から近心まで使用可能です。



ランガー 1/2★
下顎臼歯用

ランガー 3/4
上顎臼歯用

ランガー 5/6
前歯用

ランガー 17/18
上下顎臼歯用

コロンビア大学型
2R/2L

コロンビア大学型
4R/4L

コロンビア大学型
13/14



ランガー ミニファイブ
3/4
上顎臼歯用





ランガー ミニファイブ
5/6
前歯用

ランガー ミニファイブ

- 第一シャングは通常のランガーより3mm長く、5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザイン。
- ブレード幅が10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の損傷を軽減。
- ミニファイブ (Mini Five™) はブレードの長さが通常の半分のサイズで、狭いポケットや根分岐部に適用。

グレーシーキュレット バイオジェント

- 薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!
- 歯周治療の世界的名医 コーテリーニ先生ご考案!

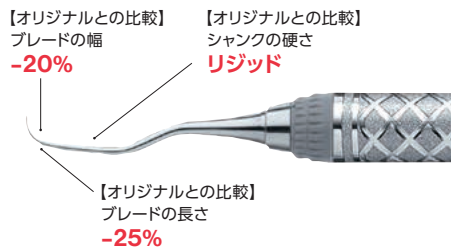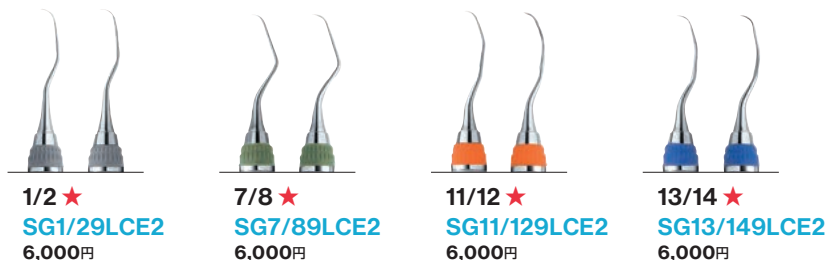

※グレーシーキュレット バイオジェントのハンドルはエバーエッジ(#9E2)のみになります。

インプラケアⅡ

チタン製のインプラント体やアバットメントを傷つけずに、プラークを除去できる、ディスポーザブルのレジンスケーラーです。(オートクレーブ滅菌してからご使用ください。)



[ユニバーサルキュレット]

ブレード相当部の先端が丸みを帯びているので、インプラント周囲の全てのエリアの清掃が行えます。



ランガー 1/2 ★ **コロンビア大学型 4R/4L**
 キット **IMPLLG1/26** キット **IMPL4R/4L6**
 チップ **IMPLLG1/2** チップ **IMPL4R/4L**
 キット (ハンドル1本&チップ12組) **11,200円**
 チップ (チップ12組) **9,600円**

[シックスケーラー]

ブレード相当部は先端に向かって細くなっており、歯冠修復部の除石に適用です。



衛生士用 H6/H7 **臼歯用 204S**
 キット **IMPLH6/76** キット **IMPL204S6**
 チップ **IMPLH6/7** チップ **IMPL204S**
 ハンドル (単品) #6 **IMPHDL6** **2,000円**

カラービュープローブ



カラービュー CP11 ★ **カラービュー CP12**
 キット **PCV11KIT6** キット **PCV12KIT6**
 チップ **PCV11PT** チップ **PCV12PT**



カラービュー UNC12 ★
 キット **PCVNCKIT6**
 チップ **PCVUNC12PT**
 キット (ハンドル1本&チップ7入) **8,600円**
 チップ (チップ12入) **12,600円**
 ハンドル (単品) **PH6** **2,200円**

HDミラー・ロジウムコーティングミラー

両面タイプはチークリトラクターとして使用しながら口腔内を照らすことが可能。ミラートップはダイレクトミラーのため2重3重に見えない。30°のオフセット。(176℃以下でオートクレーブ可)




	1入	MIR3HD 1,400円	MIR4HD 1,400円	MIR5HD 1,400円	MIR4DSHD 1,600円	MIR5DSHD 1,600円
HD コーティング	3入		MIR4HD3 3,800円	MIR5HD3 3,800円		
	6入				MIR4DSHD6 9,400円	MIR5DSHD6 9,400円
	12入		MIR4HD12 15,000円	MIR5HD12 15,000円		
ロジウム コーティング	3入		MIR4/3 2,800円	MIR5/3 2,800円	MIR4DS/3 3,800円	MIR5DS/3 3,800円

HDミラーとは…

- ロジウムコーティングのミラーより明るさが**38.5%**向上*
- 他の表面ミラーより、明るさが**50%**向上*
- 傷が付きにくく、長時間使用できる

※社内資料

コーンソケットハンドル

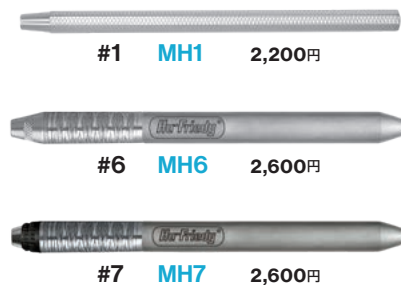

#7 **MH7** **2,600円**

一部の製品は、お届けまで時間を要する場合がございます。

エキスプローラー (探針)

特殊配合スチール合金「デュラスポンド」を使用、柔軟性と弾力性、さらに従来品よりも高い触覚感度を発揮し、高精度の診断を実現します。

この形状に曲げても
折れないほどの弾力性!!




- 3A 歯肉縁上用
- #6 EXS3A6 2,200円
- #7 EXS3A7 2,400円
- #30 EXS3A 2,200円



DURASPOND™
(デュラスポンド)


グレーシーキュレット11/12と同型の探針で
歯肉縁下の歯石探知におすすめ

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いので、
より深いポケットの探知におすすめ

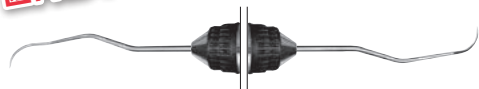


- 11/12 根面用
- #6 EXD11/126 3,000円
- #7 EXD11/127 3,200円

特に臼歯部隣接面のポケット内の歯石探査に適しています。
1本で全顎の探査ができるデザインです。

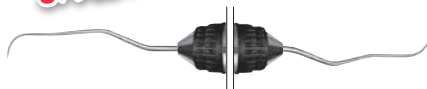

- アフターファイブ 11/12 深い根面用
- #6 EXD11/12A6 3,000円
- #7 EXD11/12A7 3,200円

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いので、
より深いポケットの歯石探査に適しています。

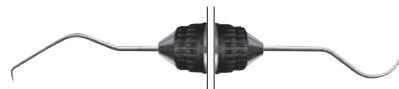

- 5 歯肉縁上及び縁下用
- #6 EXD56 3,000円
- #7 EXD57 3,200円

カラーコードプローブ

繰り返し使用しても、消えにくいマーキング (Qulix™) を採用しています。

圧倒的なマーキングの
見やすさ!!!



- ネイバース Q2N
- #6 PQ2N6 6,200円
- #7 PQ2N7 6,400円
- #31 PQ2N 6,000円



基本の3-3-2-3の
プローブ




- CP11
- #6 PCP116 4,200円
- #7 PCP117 4,400円
- #30 PCP11 4,000円



- CP12
- #6 PCP126 4,200円
- #7 PCP127 4,400円
- #30 PCP12 4,000円



- CPUNC12
- #6 PCPUNC126 4,200円
- #7 PCPUNC127 4,400円
- #30 PCPUNC12 4,000円

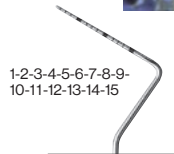

- CPUNC15
- #6 PCPUNC156 4,200円
- #7 PCPUNC157 4,400円
- #30 PCPUNC15 4,000円

【ハンドル 略称】 #6…サテンスチール #7…サテンスチールカラー (黒いシリコングリップ付) #30/#31…細丸

ピンセット



ピンセット汎用 DPU17 4,000円

インストゥルメントシャープニング

電動タイプ

サイドキック★

ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応。

SDKKIT
66,000円



カードタイプ

ダイヤモンドシャープニングカード

繰り返し使用しても平らな表面を維持!
超音波洗浄器で容易に洗浄・高圧蒸気滅菌にも対応!
クレジットカードサイズのシャープナー!!



- 超細目 (EXTRA FINE) DSCXFINE 6,600円
- 細目★ (FINE) DSCFINE 6,600円
- 中目 (MEDIUM) DSCMED 6,600円

ストーン

デュアルストーン★

極度に鈍化したスケーラーの研磨や修正用の粗目の青色面と、日常のメンテナンス用の細目の白色面をひとつに組み合わせたセラミックストーン。

SSDGRIT
5,000円



サイドキックの
使い方を動画で
CHECK!!



スケーラーやキュレットの
ハンドシャープニングの
方法についてはこちら!

ヒューフレディ スケーラー・検査キャンペーン 注文書

期間：2024年4月22日(月)～6月20日(木)

※標準価格は全て税抜

※特に赤字で記載された製品は、お届けまで長い時間を要する場合がございます。
また、その他の製品につきましても在庫状況によりお時間を頂く可能性がございます。予めご了承ください。

商品名	ハンドルの種類 標準価格	ハーモニー	エパーエッジ	レジン8カラー	サテンスチールカラー	サテンスチール	角柄		
		#XE2 6,400円▶特別価格	#9E2 6,000円▶特別価格	#C8E2 5,800円▶特別価格	#7 5,600円▶特別価格	#6 5,600円▶特別価格	#2 5,000円▶特別価格		
オーソドン スタンダード	1/2	SG1/2XE2	SG1/29E2	SG1/2C8E2	SG1/27	SG1/26	SG1/2		
	3/4	SG3/4XE2	SG3/49E2	SG3/4C8E2	SG3/47	SG3/46	SG3/4		
	5/6	SG5/6XE2	SG5/69E2	SG5/6C8E2	SG5/67	SG5/66	SG5/6		
	7/8	SG7/8XE2	SG7/89E2	SG7/8C8E2	SG7/87	SG7/86	SG7/8		
	9/10	SG9/10XE2	SG9/109E2	SG9/10C8E2	SG9/107	SG9/106	SG9/10		
	11/12	SG11/12XE2	SG11/129E2	SG11/12C8E2	SG11/127	SG11/126	SG11/12		
	13/14	SG13/14XE2	SG13/149E2	SG13/14C8E2	SG13/147	SG13/146	SG13/14		
	15/16(FIT 11/12)	SG15/16XE2	SG15/169E2	SG15/16C8E2	SG15/167	SG15/166	SG15/16		
	17/18(FIT 13/14)	SG17/18XE2	SG17/189E2	SG17/18C8E2	SG17/187	SG17/186	SG17/18		
	オーソドン マックス	1/2	SG1/2RXE2	SG1/2R9E2	SG1/2RC8E2	SG1/2R7	SG1/2R6	SGR1/2R	
		3/4	SG3/4RXE2	SG3/4R9E2	SG3/4RC8E2	SG3/4R7	SG3/4R6	SGR3/4R	
		5/6	SG5/6RXE2	SG5/6R9E2	SG5/6RC8E2	SG5/6R7	SG5/6R6	SGR5/6R	
		7/8	SG7/8RXE2	SG7/8R9E2	SG7/8RC8E2	SG7/8R7	SG7/8R6	SGR7/8R	
		9/10	SG9/10RXE2	SG9/10R9E2		SG9/10R7	SG9/10R6	SGR9/10R	
		11/12	SG11/12RXE2	SG11/12R9E2	SG11/12RC8E2	SG11/12R7	SG11/12R6	SGR11/12R	
		13/14	SG13/14RXE2	SG13/14R9E2	SG13/14RC8E2	SG13/14R7	SG13/14R6	SGR13/14R	
		15/16(FIT 11/12)	SG15/16RXE2	SG15/16R9E2	SG15/16RC8E2	SG15/16R7	SG15/16R6	SGR15/16R	
		17/18(FIT 13/14)	SG17/18RXE2	SG17/18R9E2	SG17/18RC8E2	SG17/18R7	SG17/18R6	SGR17/18R	
アブター スタンダード		1/2	SRPG1/2XE2	SRPG1/29E2	SRPG1/2C8E2	SRPG1/27	SRPG1/26	SRPG1/2	
	3/4	SRPG3/4XE2	SRPG3/49E2	SRPG3/4C8E2	SRPG3/47	SRPG3/46	SRPG3/4		
	5/6	SRPG5/6XE2	SRPG5/69E2	SRPG5/6C8E2	SRPG5/67	SRPG5/66	SRPG5/6		
	7/8	SRPG7/8XE2	SRPG7/89E2	SRPG7/8C8E2	SRPG7/87	SRPG7/86	SRPG7/8		
	11/12	SRPG11/12XE2	SRPG11/129E2	SRPG11/12C8E2	SRPG11/127	SRPG11/126	SRPG11/12		
	13/14	SRPG13/14XE2	SRPG13/149E2	SRPG13/14C8E2	SRPG13/147	SRPG13/146	SRPG13/14		
	15/16(FIT 11/12)	SRPG15/16XE2	SRPG15/169E2	SRPG15/16C8E2	SRPG15/167	SRPG15/166	SRPG15/16		
	アブター マックス	1/2	SRP1/2RXE2	SRP1/2R9E2	SRP1/2RC8E2	SRP1/2R7	SRP1/2R6	SRPG1/2R	
		3/4	SRP3/4RXE2	SRP3/4R9E2	SRP3/4RC8E2	SRP3/4R7	SRP3/4R6	SRPG3/4R	
		5/6	SRP5/6RXE2	SRP5/6R9E2	SRP5/6RC8E2	SRP5/6R7	SRP5/6R6	SRPG5/6R	
		7/8	SRP7/8RXE2	SRP7/8R9E2	SRP7/8RC8E2	SRP7/8R7	SRP7/8R6	SRPG7/8R	
		11/12	SRP11/12RXE2	SRP11/12R9E2	SRP11/12RC8E2	SRP11/12R7	SRP11/12R6	SRPG11/12R	
		13/14	SRP13/14RXE2	SRP13/14R9E2	SRP13/14RC8E2	SRP13/14R7	SRP13/14R6	SRPG13/14R	
		15/16(FIT 11/12)	SRP15/16RXE2	SRP15/16R9E2	SRP15/16RC8E2	SRP15/16R7	SRP15/16R6	SRPG15/16R	
		アブター ジャイアント	1/2	SAS1/2XE2	SAS1/29E2	SAS1/2C8E2	SAS1/27	SAS1/26	SAS1/2
			3/4	SAS3/4XE2	SAS3/49E2	SAS3/4C8E2	SAS3/47	SAS3/46	SAS3/4
			5/6	SAS5/6XE2	SAS5/69E2	SAS5/6C8E2	SAS5/67	SAS5/66	SAS5/6
	7/8		SAS7/8XE2	SAS7/89E2	SAS7/8C8E2	SAS7/87	SAS7/86	SAS7/8	
11/12	SAS11/12XE2		SAS11/129E2	SAS11/12C8E2	SAS11/127	SAS11/126	SAS11/12		
13/14	SAS13/14XE2				SAS13/147	SAS13/146	SAS13/14		
15/16(FIT 11/12)	SAS15/16XE2		SAS15/169E2	SAS15/16C8E2	SAS15/167	SAS15/166	SAS15/16		
17/18(FIT 13/14)	SAS17/18XE2								
アブター リジッド	1/2		SAS1/2RXE2	SAS1/2R9E2	SAS1/2RC8E2	SAS1/2R7	SAS1/2R6	SAS1/2R	
	3/4		SAS3/4RXE2	SAS3/4R9E2	SAS3/4RC8E2	SAS3/4R7	SAS3/4R6	SAS3/4R	
	5/6		SAS5/6RXE2	SAS5/6R9E2	SAS5/6RC8E2	SAS5/6R7	SAS5/6R6	SAS5/6R	
	7/8		SAS7/8RXE2	SAS7/8R9E2	SAS7/8RC8E2	SAS7/8R7	SAS7/8R6	SAS7/8R	
	11/12		SAS11/12RXE2	SAS11/12R9E2	SAS11/12RC8E2	SAS11/12R7	SAS11/12R6	SAS11/12R	
	13/14		SAS13/14RXE2	SAS13/14R9E2		SAS13/14R7	SAS13/14R6	SAS13/14R	
	15/16(FIT 11/12)		SAS15/16RXE2	SAS15/16R9E2	SAS15/16RC8E2	SAS15/16R7	SAS15/16R6	SAS15/16R	
	シンクル スクーター		1前歯用	SCNEVI1XE2	SCNEVI19E2	SCNEVI1C8E2	SCNEVI17	SCNEVI1	
			2臼歯用	SCNEVI2XE2	SCNEVI29E2	SCNEVI2C8E2	SCNEVI27	SCNEVI2	
			3臼歯用	SCNEVI3XE2	SCNEVI39E2	SCNEVI3C8E2			
4臼歯用		SCNEVI4XE2	SCNEVI49E2	SCNEVI4C8E2					
衛生士用		H5/33	SH5/33XE2	SH5/339E2	SH5/33C8E2	SH5/337	SH5/336	SH5/33	
臼歯用	H6/H7	SH6/7XE2	SH6/79E2	SH6/7C8E2	SH6/77	SH6/76	SH6/7		
	204S	S204SXE2	S204S9E2	S204SC8E2					
	204SD	S204SDXE2	S204SD9E2	S204SDC8E2	S204SD7	S204SD6	S204SD2		
前歯用	モーソ 0/00	SM0/00XE2	SM0/009E2	SM0/00C8E2					
ユニバーサル アブター	マッコール	17/18	SM17/18XE2	SM17/189E2					
	ランガー	1/2	SL1/2XE2	SL1/29E2	SL1/2C8E2				
		3/4	SL3/4XE2	SL3/49E2	SL3/4C8E2				
		5/6	SL5/6XE2	SL5/69E2	SL5/6C8E2				
		17/18	SL17/18XE2	SL17/189E2	SL17/18C8E2				
	コロンビア 大学型	2R/2L	SC2R/2LXE2						
		4R/4L	SC4R/4LXE2	SC4R/4L9E2	SC4R/4LC8E2				
	ランガー ミニファイブ	13/14	SC13/14XE2	SC13/149E2	SC13/14C8E2				
		3/4		SL3/4MF9E2					
	アブター ハイブリッド	5/6		SL5/6MF9E2					
1/2			SG1/29LCE2						
7/8			SG7/89LCE2						
11/12			SG11/129LCE2						
13/14		SG13/149LCE2							

ヒューフレディ スケーラー・検査キャンペーン 注文書

期間：2024年4月22日(月)～6月20日(木)

※標準価格は全て税抜

※特に赤字で記載された製品は、お届けまで長い時間を要する場合がございます。
また、その他の製品につきましても在庫状況によりお時間を頂く可能性がございます。予めご了承ください。

商品名		パートコード	標準価格(円)	数量	
インプラケアII	キット ハンドル 1本 チップ 12組	ランガー 1/2	IMPLLG1/26	11,200 ▶ 特別価格	
		コロンビア大型型 4R/4L	IMPL4R/4L6	11,200 ▶ 特別価格	
		衛生土用 H6/H7	IMPLH6/76	11,200 ▶ 特別価格	
		臼歯用 204S	IMPL204S6	11,200 ▶ 特別価格	
	チップ 12組	ランガー 1/2	IMPLLG1/2	9,600 ▶ 特別価格	
		コロンビア大型型 4R/4L	IMPL4R/4L	9,600 ▶ 特別価格	
		衛生土用 H6/H7	IMPLH6/7	9,600 ▶ 特別価格	
		臼歯用 204S	IMPL204S	9,600 ▶ 特別価格	
	ハンドル(単品) #6		IMPHDL6	2,000 ▶ 特別価格	
	カラービュー プローブ	キット ハンドル 1本 チップ 7入	CP11	PCV11KIT6	8,600 ▶ 特別価格
CP12			PCV12KIT6	8,600 ▶ 特別価格	
UNC12			PCVNCKIT6	8,600 ▶ 特別価格	
チップ 12入		CP11	PCV11PT	12,600 ▶ 特別価格	
		CP12	PCV12PT	12,600 ▶ 特別価格	
		UNC12	PCVUNC12PT	12,600 ▶ 特別価格	
ハンドル(単品)		PH6	2,200 ▶ 特別価格		
ミラートップ HD コーティング		片面 1入	3 (φ20mm)	MIR3HD	1,400 ▶ 特別価格
			4 (φ22mm)	MIR4HD	1,400 ▶ 特別価格
			5 (φ24mm)	MIR5HD	1,400 ▶ 特別価格
	片面 3入	4 (φ22mm)	MIR4HD3	3,800 ▶ 特別価格	
		5 (φ24mm)	MIR5HD3	3,800 ▶ 特別価格	
	片面 12入	4 (φ22mm)	MIR4HD12	15,000 ▶ 特別価格	
		5 (φ24mm)	MIR5HD12	15,000 ▶ 特別価格	
	両面 1入	4 (φ22mm)	MIR4DSHD	1,600 ▶ 特別価格	
		5 (φ24mm)	MIR5DSHD	1,600 ▶ 特別価格	
	両面 6入	4 (φ22mm)	MIR4DSHD6	9,400 ▶ 特別価格	
5 (φ24mm)		MIR5DSHD6	9,400 ▶ 特別価格		
ミラートップ ロジウム コーティング	片面 3入	4 (φ22mm)	MIR4/3	2,800 ▶ 特別価格	
		5 (φ24mm)	MIR5/3	2,800 ▶ 特別価格	
	両面 3入	4 (φ22mm)	MIR4DS/3	3,800 ▶ 特別価格	
		5 (φ24mm)	MIR5DS/3	3,800 ▶ 特別価格	
コーンセット ハンドル	#1	MH1	2,200 ▶ 特別価格		
	#6	MH6	2,600 ▶ 特別価格		
	#7	MH7	2,600 ▶ 特別価格		
エクス プローラー	片頭	#6	EXS3A6	2,200 ▶ 特別価格	
		3A #7	EXS3A7	2,400 ▶ 特別価格	
		#30	EXS3A	2,200 ▶ 特別価格	
	両頭	11/12 #6	EXD11/126	3,000 ▶ 特別価格	
		#7	EXD11/127	3,200 ▶ 特別価格	
		アフター ファイブ 11/12 #6	EXD11/12A6	3,000 ▶ 特別価格	
		#7	EXD11/12A7	3,200 ▶ 特別価格	
		5 #6	EXD56	3,000 ▶ 特別価格	
		#7	EXD57	3,200 ▶ 特別価格	

商品名		パートコード	標準価格(円)	数量	
カラー コード プローブ	両頭	ネイ バーズ Q2N #6	PQ2N6	6,200 ▶ 特別価格	
		#7	PQ2N7	6,400 ▶ 特別価格	
		#31	PQ2N	6,000 ▶ 特別価格	
	片頭	CP11	#6	PCP116	4,200 ▶ 特別価格
			#7	PCP117	4,400 ▶ 特別価格
			#30	PCP11	4,000 ▶ 特別価格
		CP12	#6	PCP126	4,200 ▶ 特別価格
			#7	PCP127	4,400 ▶ 特別価格
			#30	PCP12	4,000 ▶ 特別価格
		CPUNC 12	#6	PCPUNC126	4,200 ▶ 特別価格
			#7	PCPUNC127	4,400 ▶ 特別価格
			#30	PCPUNC12	4,000 ▶ 特別価格
		CPUNC 15	#6	PCPUNC156	4,200 ▶ 特別価格
			#7	PCPUNC157	4,400 ▶ 特別価格
			#30	PCPUNC15	4,000 ▶ 特別価格
ピンセット	ピンセット 汎用	DPU17	4,000 ▶ 特別価格		
サイドキック		SDKKIT	66,000 ▶ 特別価格		
ダイヤモンド シャープニング カード	超細目	DSCXFINE	6,600 ▶ 特別価格		
	細目	DSCFINE	6,600 ▶ 特別価格		
	中目	DSCMED	6,600 ▶ 特別価格		
デュアルストーン		SSDGRIT	5,000 ▶ 特別価格		

キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2024年4月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
販売名：インプラケアII (一般的名称：歯科用スケーラー) 医療機器届出番号：13B3X10195G02103
販売名：エクスプローラー (一般的名称：歯科用プローブ) 医療機器届出番号：13B3X10195G05101
販売名：カラーコードプローブ (一般的名称：歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号：13B3X10195G07101
販売名：カラービュープローブ (一般的名称：歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号：13B3X10195G07103
販売名：グレーシャーキュレット (一般的名称：歯周用キュレット) 医療機器届出番号：13B3X10195G01101
販売名：スケーラー (一般的名称：歯科用スケーラー) 医療機器届出番号：13B3X10195G02101
販売名：ピンセット (一般的名称：ピンセット) 医療機器届出番号：13B3X10195G34102
販売名：ミラー (一般的名称：歯鏡) 医療機器届出番号：13B3X10195G22101
販売名：ユニバーサルキュレット (一般的名称：歯周用キュレット) 医療機器届出番号：13B3X10195G01102
【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：
Hu-Friedy, After Five, Colours, EVEREDGE, Harmony, Immunity Steel, Implacare, Micro Mini Five, Mini Five, Satin Steel, Sidekick, True Fit
●医療機器の分類：一般医療機器 (クラスI)

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

ヒューフレディ オフィシャルSNSでは
様々な情報を発信しております。

Instagram



Facebook



YouTube



LINE



<p>■ 歯科医院名</p> <p>■ お名前</p> <p>■ ご住所 〒 -</p> <p>TEL - -</p>	<p>【歯科商店名】</p>
---	----------------