

保存 Restorative

ハンドルの種類	F02
コンポジット練成充填器 XTS™	F03
練成充填器	F06
ハチェット	F08
マージントリマー	F09
エキスカベーター	F10
カーバー	F13
咬合紙ホルダー／コードパッカー	F14
クラウンリムーバー	F15
測定用デバイス	F16
スパチュラ	F17
PKトーマスワックスインストルメント	F18
チューズエステティックゲージ	F19

Handles

ハンドルの種類

手根管症候群の予防

インスツルメント使用時のストレスを軽減させる方法の一つとして、神経科医は、異なるサイズのハンドルを使い分けることを推奨しています。

太めのハンドル(#6、#9、XTSハンドル、スムーズハンドル)にすると、軽い力でインスツルメントを把持できます。多様なサイズのハンドルを組み合わせ、軽い力で持つことで、手根管症候群の発症および重症化を防ぐことができます。

出典:

し・J・ガーワトスキー、D・B・マクフォール、D・スタック：
歯科衛生士のための手根管症候群予防法、歯科衛生学会誌、1992年2月

■ 両 頭

スムーズハンドル



太くマット加工が施されたハンドル。

#9 エバーエッジ



ヒューフレディ社のエバーエッジシリーズのインスツルメントは術者がより効率的な処置を行えるよう、シャープさが長く持続する設計になっています。
エバーエッジの技術は、術者と患者さんに高レベルの快適さを提供するため、主な外科的処置用の製品や修復治療用の製品に導入されています。

XTSハンドル



軽い力で把持することができる太めのハンドル。

#6 サテンスチール



作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
軽い力で把持することができる太めのハンドル。

#41 丸 柄



作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
従来からの細ハンドル。

#2 角 柄



作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
8面の角形で指を固定しやすい。

■ 片 頭

#6 サテンスチール



作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
軽い力で把持することができる太めのハンドル。

#40 丸 柄





XTS™ Composite Instruments


コンポジット練成充填器 XTS™

コンポジット練成充填器XTS™は、窒化アルミチタン (AlTiN) コーティングが施されています。チタンコーティングと比較して強固でなめらかで、べたつきが少ない事が研究で明らかになっています。充填材が粘着しにくく、黒色のコーティングがはがれたり、変色することがありません。また、より長くご愛用いただけるようヒューフレディグループ独自で開発したイミニチスチール*1製で、ハンドルも把持しやすく、太くて軽量のデザインのため手指の疲労を軽減、操作性が向上します。*2


*1イミニチスチールとは:ヒューフレディ社で独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金です。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインストルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。

*2資料:Gerwatowski, L.J., McFall, D.B., Stach, D.: Carpal Tunnel Syndrome; Risk Factors and Preventive Strategies for the Dental Hygienist. Journal of Dental Hygiene, February 1992.

滑らかな表面
表面の粗さ

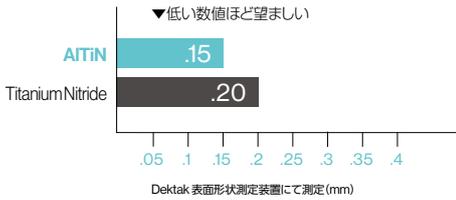

耐摩耗性
強度

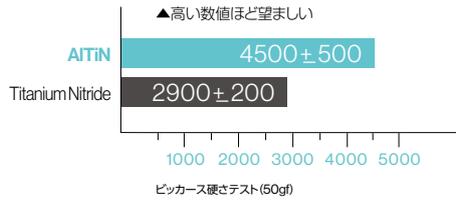

べたつき感
摩擦係数—潤滑性



■ コンポジット練成充填器 XTS™

先端径:2.0mm




ゴールドスタイン フレキシシン 1 Goldstein Flexi - Thin 1

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFT1	6,400円	☺

細いバドルと小型コンデンサーの組合せ
初期充填や形態付与に使用
1~3級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

先端径:1.4mm

先端幅:2.5mm

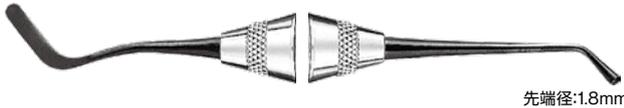

ゴールドスタイン フレキシシン 2 Goldstein Flexi - Thin 2

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFT2	6,400円	☺

1の大型タイプ。充填と形態修正に使用
1~3級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

先端径:1.8mm

先端幅:2.5mm



● ゴールドスタイン フレキシシン 3 Goldstein Flexi - Thin 3

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFT3	6,400円	☺

フレアーバドル型。形態修正に使用
3、4級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

先端幅:2.5mm

先端幅:2.4mm



ゴールドスタイン フレキシシン 4 Goldstein Flexi - Thin 4

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFT4	6,400円	☺

臼歯部の近心および遠心面に充填したり成形したりするための柔軟なへら状の作業部が両端に付与されています。逆向きにすると、前歯部の接着修復の充填や成形に使えます。
※XTSハンドルのみ

先端幅:2.4mm

先端幅:2.0mm



ゴールドスタイン フレキシシン 5 Goldstein Flexi - Thin 5

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFT5	6,400円	☺

先端が小型で逆角度つきなので、アプローチしにくい部位にも小窩裂溝を形成し、咬合面において理想的な解剖学的特徴を再現できます。
※XTSハンドルのみ

先端幅:2.2mm

ハンドルの種類



XTSハンドル

軽い力で把持することができるためのハンドル。



コンポジット練成充填器 XTS™

XTS™ Composite Instruments

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



ゴールドスタイン フレキシシン ミニ1 Goldstein Flexi - Thin Mini 1

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFTM1	6,400 円	

1のミニタイプ
小窩裂溝や下顎前歯の小さな欠損部用
※XTSハンドルのみ



ゴールドスタイン フレキシシン ミニ3 Goldstein Flexi - Thin Mini 3

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFTM3	6,400 円	

3のミニタイプ
※XTSハンドルのみ



ゴールドスタイン フレキシシン ミニ4 Goldstein Flexi - Thin Mini 4

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFTM4	6,400 円	

4のミニタイプ
臼歯部近遠心のようなアクセスしにくい部位の充填や形態付与に使用
※XTSハンドルのみ




ゴールドスタイン マイクロ Goldstein Micro

パートコード	標準価格	取寄品
TNGMPI	6,400 円	🕒

それぞれ90°と110°の角度が付与された細い先端で、少量のステン材やオパール材の塗布に使用します。
※スムーズハンドルのみ




使用方法はこちらからご覧いただけます。
(英語)

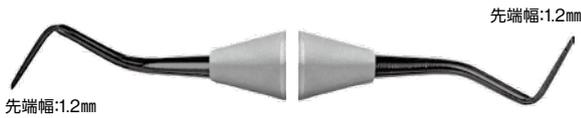

マッシーロニ チゼル 1.2mm Massironi Chisel, 1.2mm

パートコード	標準価格	取寄品
TNMASS1	6,400 円	

※スムーズハンドルのみ

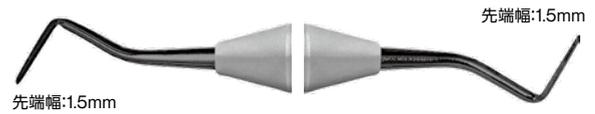

マッシーロニ チゼル 1.5mm Massironi Chisel, 1.5mm

パートコード	標準価格	取寄品
TNMASS2	6,400 円	

※スムーズハンドルのみ



ボゴシアン AB1 AB1 Boghosian

パートコード	標準価格	取寄品
TNPFAB1	6,400 円	

薄型ナイフとブレードの組み合わせ
歯頸部での操作性が容易
3~5級窩洞向き
※XTSハンドルのみ



ボゴシアン AB2 AB2 Boghosian

パートコード	標準価格	取寄品
TNPFAB2	6,400 円	🕒

コンポジット層の測定や咬合面形態に沿った形態付与に使用します。
※XTSハンドルのみ



● IPC Interproximal Carver

パートコード	標準価格	取寄品
TNCVIPC	6,400 円	

極薄型ブレード
隣接歯間部用
3~5級窩洞向き
※XTSハンドルのみ



W3

パートコード	標準価格	取寄品
TNPFW3	6,400 円	🕒

中型ブレードと小型コンデンサーの組合せ
1~5級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

ハンドルの種類



XTSハンドル

軽い力で把持することができるためのハンドル。



スムーズハンドル

太くマット加工が施されたハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

コンポジット練成充填器 XTS™

XTS™ Composite Instruments



保存 Restorative

先端幅:2.2mm



先端幅:2.2mm

G4/5 4/5 Gregg

パートコード	標準価格	取寄品
TNPFIG4/5	6,400円	

臼歯部近遠心および隣接歯間部用
2.5級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

先端幅:1.4mm



先端幅:1.4mm

8A

パートコード	標準価格	取寄品
TNPF18A	6,400円	

唇側用
※XTSハンドルのみ

先端幅:2.3mm



先端幅:2.8mm

A6

パートコード	標準価格	取寄品
TNPFIA6	6,400円	

大型で薄型のブレード
ベニア形成や広範囲の形態修正用
2~5級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

先端径:1.6mm



作業径:3.1mm

BB27/29 27/29 Burnisher

パートコード	標準価格	取寄品
TNBB27/29	6,400円	

パーニッシャータイプ
小窩裂溝や咬合面形成用
※XTSハンドルのみ

先端径:1.3mm



先端径:1.9mm

ラドモア 3 3 Ladmore

パートコード	標準価格	取寄品
TNBBL3	6,400円	🕒

小型と中型コンデンサーの組合せ
※XTSハンドルのみ

先端径:1.3mm



先端径:1.6mm

バニッシャー S/M Small / Medium Ball Burnisher

パートコード	標準価格	取寄品
TNBBS/M	6,400円	🕒

レジン形成窩に圧接・成形するときに隅角や移行部で操作しやすいように曲面となっている窩洞に合わせた形状です。
※XTSハンドルのみ

作業径:3.0mm



作業径:2.7mm

21B

パートコード	標準価格	取寄品
TNBB21B	6,400円	🕒

ドングリ型
臼歯部咬合面用
※XTSハンドルのみ



先端幅:5.2mm

ゴールドフォージェル A Goldfogel A

パートコード	標準価格	取寄品
TNCCIA	6,400円	🕒

同一形状のオーバル型ブレード
中切歯唇側用
※XTSハンドルのみ

作業径:2.5mm



作業径:3.8mm

フリードマン ダックヘッド Freedman Duckhead

パートコード	標準価格	取寄品
TNPCCI	6,400円	

臼歯部咬合面用
※XTSハンドルのみ

ハンドルの種類



XTSハンドル

軽い力で把持することができるためのハンドル。

Composite Instruments

練成充填器

■ 練成充填器

先端幅:1.8mm



先端幅:1.8mm

● アクロフレックス Akro - Flex

パートコード	標準価格	取寄品
AKRO-FLEX	13,300 円	

コンポジットレジン修復の仕上げに用いる筆のような機能を有した超薄型デザインの作業部。従来の製品ではアクセスしづらい狭い空間にも容易に到達し、形態付与が可能です。隣接面の窩洞(Ⅱ級・Ⅲ級・Ⅳ級)で、より広い視野を確保できます。



※製品の特性上、ご使用の際は45°以上に曲げないようにしてください。



作業径:2.0mm

先端径:0.6mm

ディーチ コンボスカルプ 1/2 Dietschi Composculp 1/2

パートコード	標準価格	取寄品
PFIDD1/2	6,100 円	

ハンドルの種類



スムーズハンドル

太くマット加工が施されたハンドル。
※ディーチコンボスカルプのハンドル両端は番手によってカラーコード化されています。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



ディーチ コンポジット 3/4		Dietschi Composculp 3/4
パートコード	標準価格	取寄品
PFIDD3/4	6,100円	☺



ディーチ コンポジット 5/6		Dietschi Composculp 5/6
パートコード	標準価格	取寄品
PFIDD5/6	6,100円	☺



ディーチ コンポジット 7/8		Dietschi Composculp 7/8
パートコード	標準価格	取寄品
PFIDD7/8	6,100円	☺



ディーチ コンポジット 9/10		Dietschi Composculp 9/10
パートコード	標準価格	取寄品
PFIDD9/10	6,100円	☺

● **ディーチ コンポジットキット** Dietschi Composculp Kit

パートコード	標準価格	取寄品
PFIDDCASS	39,900円	

PFIDD1/2、PFIDD3/4、PFIDD5/6、PFIDD7/8、PFIDD9/10、IM6053(5本用イグザムカセット入)



ハンドルの種類




スムーズハンドル

太くマット加工が施されたハンドル。
※ディーチコンポジットのハンドル両端は番号によってカラーコード化されています。

Hatchets

ハチェット

窩洞形成:内側隅角のカッティングや硬い罹患歯質の除去に使用します。

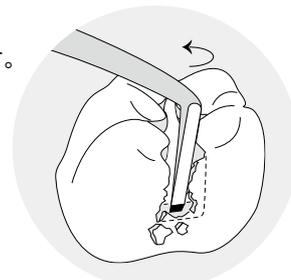

Baum, Philips & Lund社「保存修復学テキストブック(第2版)」より転載

ハチェット



先端幅:1.5mm

先端幅:1.5mm

15/16				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP15/169	6,300円	#9	エバーエッジ	☺
[15-8-14]*				



先端幅:1.0mm

先端幅:1.0mm

17/18				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP17/189	6,300円	#9	エバーエッジ	☺
[10-6-14]*				



先端幅:1.0mm

先端幅:1.0mm

ペアで使用



先端幅:1.0mm

先端幅:1.0mm

44S		44S Off Angle		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP44S9	6,300円	#9	エバーエッジ	☺

45S		45S Off Angle		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP45S9	6,300円	#9	エバーエッジ	☺



先端幅:1.5mm

先端幅:1.5mm

ペアで使用



先端幅:1.5mm

先端幅:1.5mm

オフアングル 14/14-0		14/14-0 Off Angle		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP14/14-09	6,300円	#9	エバーエッジ	☺
[15-10-16]*				

オフアングル		15/15-0 Off Angle		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP15/15-09	6,300円	#9	エバーエッジ	☺
[15-10-16]*				



先端幅:1.0mm

先端幅:1.0mm

ヘビー 8/9H				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP8/9H9	6,300円	#9	エバーエッジ	☺
[10-7-14]*				

※詳細はリファレンスガイドのブラックの公式を参照

ハンドルの種類



#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



マージントリマー

エナメルマージンに適切なベベルを付与するために使用します。
ハチェットと似ていますが、ブレードが湾曲しており、カッティングエッジに角度が付いている点が異なります。

■ マージントリマー



ペアで使用



28


パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT289	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺

[10-95-7-14]*
遠心用


29

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT299	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺

[10-80-7-14]*
近心用

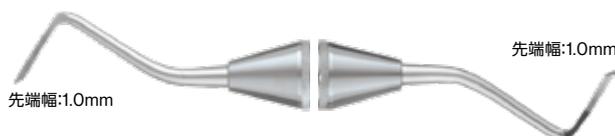

ペアで使用

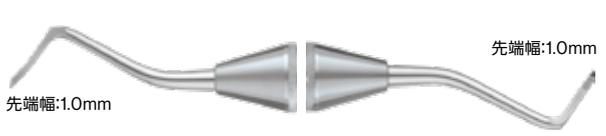

トゥルーバル 232

232 Tru Bal, Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT232TM9	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺


トゥルーバル 233

233 Tru Bal, Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT233TM9	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺



ペアで使用

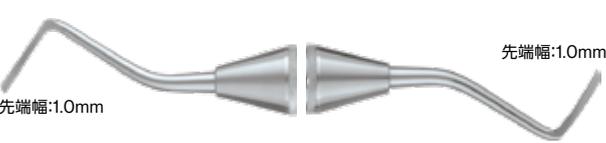

タッカー 232

232 Tucker, Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT232TM9	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺

タッカー 233

233 Tucker, Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT233TM9	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺

※詳細はリファレンスガイドのブラックの公式を参照

ハンドルの種類



#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。
軽い力で把持することができるためのハンドル。



エキスカベーター

齶蝕象牙質の除去に使用します。

■ エキスカベーター ポピュラータイプ

仮封材、う窩内の食片、う窩の軟化象牙質の除去に使用するいわゆる『雑用エキスカ』です。



● ポピュラータイプ1				Popular Type 1
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC1	4,500円	#2	角柄	



● ポピュラータイプ2				Popular Type 2
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC2	4,500円	#2	角柄	



● ポピュラータイプ3				Popular Type 3
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC3	4,500円	#2	角柄	



● ポピュラータイプ4				Popular Type 4
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC4	4,500円	#2	角柄	



● ポピュラータイプ5				Popular Type 5
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC5	4,500円	#2	角柄	



● ポピュラータイプ6				Popular Type 6
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC6	4,500円	#2	角柄	

ハンドルの種類



#2 角柄

作業部は耐腐食性に優れた「イミニチスチール」製。8面の角形で指を固定しやすい。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

エキスケーター
Excavators



■ エクスケーター イングリッシュパターン



246		246 English Pattern		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC2469	6,100円	#9	エバーエッジ	



■ エクスケーター スプーン型



E1				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXCE16	5,100円	#6	サテンスチール	
[12-9-15]*				



E2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXCE26	5,100円	#6	サテンスチール	
[15-9-15]*				



6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC6	5,100円	#41	丸柄	



14				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC14	5,100円	#41	丸柄	



● 17				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC179	6,100円	#9	エバーエッジ	
EXC176	5,100円	#6	サテンスチール	
EXC17	5,100円	#41	丸柄	☺

掲載画像 EXC179



● 18				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC189	6,100円	#9	エバーエッジ	
EXC186	5,100円	#6	サテンスチール	
EXC18	5,100円	#41	丸柄	☺

掲載画像 EXC189

※詳細はリファレンスガイドのブラックの公式を参照

ハンドルの種類



#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。



19				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC196	5,100円	#6	サテンスチール	
EXC19	5,100円	#41	丸柄	☺



38/39				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC38/396	5,100円	#6	サテンスチール	
EXC38/39	5,100円	#41	丸柄	☺

[11.5-7-14]*

■ エキスカベーター オーバル型



17W					17W Oval				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC17W	5,100円	#41	丸柄						



18W					18W Oval				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC18W	5,100円	#41	丸柄						

■ エキスカベーター ブレード型



40/41				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC40/41	5,100円	#41	丸柄	

[11-7-14]*



36/37				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC36/376	5,100円	#6	サテンスチール	

[15-8-14]*



63/64				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC63/646	5,100円	#6	サテンスチール	

[15-8-12]*

※詳細はリファレンスガイドのブラックの公式を参照

ハンドルの種類



#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

Carvers

カーバー

■ カーバー

解剖学的形態に合わせて、余分な材料を除去するために使用します。

先端幅:1.4mm



先端幅:1.4mm

● 隣接歯面用 IPC		Interproximal Carver		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CVIPC6	5,100円	#6	サテンスチール	
極薄型ブレード 隣接歯面用 2~5級窩洞向き				

先端幅:1.6mm



先端幅:1.6mm

ホーレンバック 1/2		1/2 Hollenback		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CVHL1/29	7,200円	#9	エバーエッジ	
充填、カービング、形態付与など様々な用途に対応				

先端幅:1.7mm



先端幅:1.7mm

ホーレンバック 3S		3S Hollenback		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CVHL3S6	5,100円	#6	サテンスチール	
ホーレンバック1/2に似たデザインですが、ブレード部が若干大きくなっています。				

先端幅:0.8mm



先端幅:0.8mm

ウィランド 8		8 Wiland		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CVWI86	5,100円	#6	サテンスチール	☺
湾曲した極細ブレード。隣接歯面に適しています。				

ハンドルの種類



#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

Articulating Paper Forceps & Gingival Packers

咬合紙ホルダー／コードパッカー

■ 咬合紙ホルダー



● ミラー		Miller
パートコード	標準価格	取寄品
APF2	5,500円	

ギザ同士がしっかりと噛み合い咬合紙がずれにくい。

■ ジンジバルコードパッカー

歯肉への外傷が少なく、正確に圧排糸の挿入ができます。



● 113				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
GCP1136	5,300円	#6	サテンスチール	

先端がギザ付のため圧排糸がすべりにくい。



ヤードリー 1				1 Yardley
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
GCPYD1	5,300円	#41	丸柄	🕒

ギザなしタイプの丸い先端です。

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

クラウンリムーバー
Crown Removers



保存 Restorative



クラウンリムーバー


■ クラウンリムーバー




● 仮歯用	Universal Crown Remover	
パートコード	標準価格	取寄品
CRGR	29,400円	

■ クラウンリムーバー クリステンセン

ミニ・エレベーターハンドルとノッチ付作業部は、セメントを粉砕する際のグリップを安定させ、コントロールしやすい構造です。歯に加わる圧力も軽減されます。

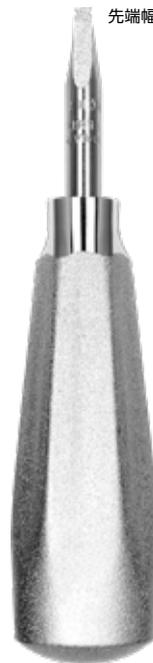

先端幅:3.0mm

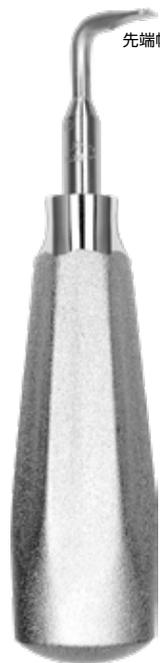

先端幅:3.0mm

● クリステンセン 直	Christensen, Straight	
パートコード	標準価格	取寄品
CRCH1	10,300円	
前歯部用		

● クリステンセン 90°	Christensen, 90°	
パートコード	標準価格	取寄品
CRCH2	10,300円	
臼歯部用		

おすすめの使用方法



バーでスリットを入れる



クリステンセンでスリットを広げセメントを壊す



セメントが壊れ少し浮き上がったら仮歯用鉗子(CRGR)で除去する

【メタルコアの場合】




★「直」と「90°」の2種類のクリステンセンを頬舌的に逆回転でトルクを加えセメントを崩し、コアを除去する

■ クラウンリムーバー ゴールドスタイン

バーでスリットを入れたクラウンと歯牙を分断し完全に除去するときに使用します。


直角に付いたハンドルによって、歯牙の破折を引き起こす力は加えず、クラウンだけにトルクがかかるように設計されています。

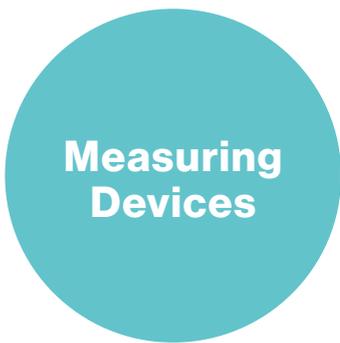

測定用デバイス

■ ゲージ


ゴールドスタイン直		
Goldstein, Straight		
パートコード	標準価格	取寄品
GCR0	6,100円	
前歯部のクラウン除去用		

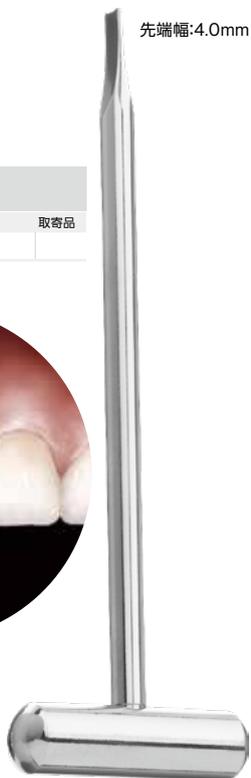

先端幅:4.0mm

先端幅:4.0mm

ゴールドスタイン45°		
Goldstein, 45°		
パートコード	標準価格	取寄品
GCR45	6,100円	
犬歯、小臼歯用(第1大臼歯も可)。		

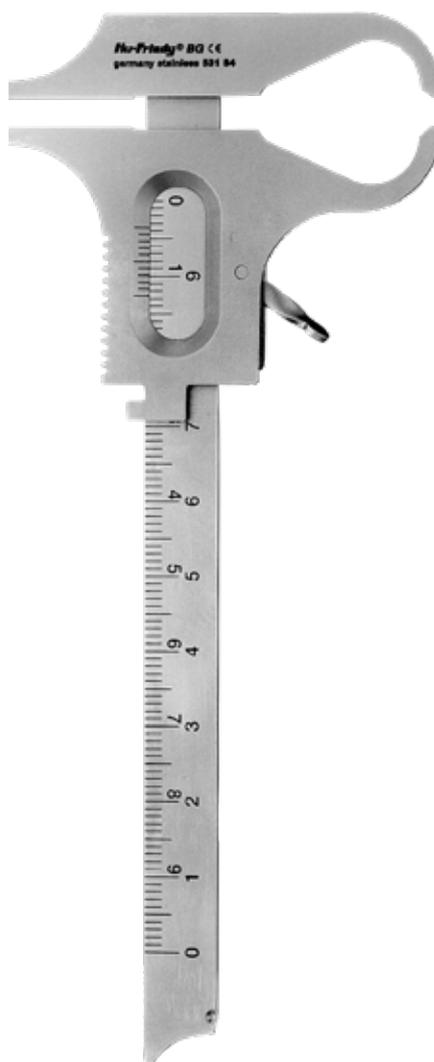


ゲージ ボーレイ		Boley Gauge
パートコード	標準価格	取寄品
BG	21,000円	☺

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

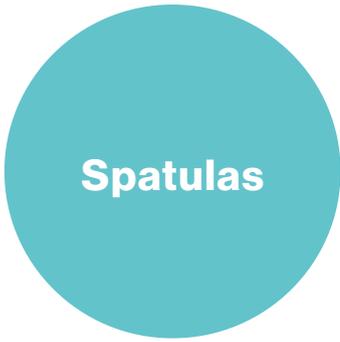

スパチュラ

■ セメントスパチュラ

セメントなどの材料の練和に使用します。



7.4 × 44mm

24		
パートコード	標準価格	取寄品
CS246	5,100円	
中粘度のセメント混和に適した柔軟性の高い作用部		



7.4 × 50mm

先端幅:2.2mm

ノバテック 6		6 Novatech
パートコード	標準価格	取寄品
CSNT6	6,600円	
長くフレキシブルなスパチュラとブレードのコンビネーション。ブレード部でセメントを移送します。		

CSNT6の作用部の端で、混和されたセメントをすくい充填します。



CSNT6の先端を用いると、形成面や補綴物に仮着用／最終合着用セメントを効率的に塗布できます。

■ スパチュラ



先端幅:7.5mm

先端幅:3.2mm

● ワックススパチュラ 7		
パートコード	標準価格	取寄品
WS7	6,100円	



12.5 × 24mm

10.7 × 22mm

ワックススパチュラ 31		
パートコード	標準価格	取寄品
SPT31	6,600円	

P.K.Thomas
Waxing
Instruments

PKトーマスワックスインスツルメント

ワックスアップ時に使用します。

■ ワックスインスツルメント



PKトーマス 1				P.K. Thomas 1
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKT1	5,100円	#41	丸柄	

溶解したワックスの流し込みに使用



PKトーマス 2				P.K. Thomas 2
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKT2	5,100円	#41	丸柄	

溶解したワックスの流し込みに使用



PKトーマス 3				P.K. Thomas 3
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKT3	5,100円	#41	丸柄	☺

やり状の先端
溝の形成や強調に使用



PKトーマス 4				P.K. Thomas 4
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKT4	5,100円	#41	丸柄	


外形形態の仕上げ、
窩洞歯面切線の余剰ワックス除去に使用



PKトーマス 5				P.K. Thomas 5
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKT5	5,100円	#41	丸柄	☺

ワックスアップ後に咬頭の凸形態を維持しながら余剰ワックスの除去が可能

注意:ワックスインスツルメントは、177°C以上の高温状態に置かないでください。また、極度の高温状態と冷却を繰り返すと、不具合や破損の原因となります。

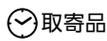

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



チューズエステティックゲージ

ステファン・チュー先生ご考案の短時間で的確に歯冠の長径と幅径の比率を判断するインストルメントです。


■ チューズエステティックゲージ



長短のアームで構成され、Tバーチップの使用が困難な叢生部位で、歯冠長径と幅径の計測が可能

水平および垂直アームで構成され、歯冠長径と幅径を同時に計測可能

プロポーション		Proportion Gauge
パートコード	標準価格	取寄品
PROGS	7,400円	☺

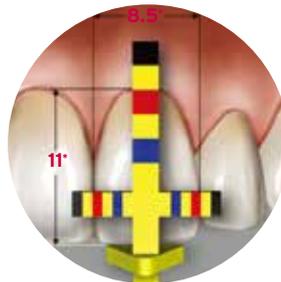

使用方法是こちらでご覧いただけます。
(英語)



交換チップインライン3入		In-Line
パートコード	標準価格	取寄品
INLINEREF	3,800円	☺

長短のアームで構成され、Tバーチップの使用が困難な叢生部位で、歯冠長径と幅径の計測が可能



交換チップTバー3入		T-Bar
パートコード	標準価格	取寄品
TBARREF	3,800円	☺


水平および垂直アームで構成され、歯冠長径と幅径を同時に計測可能




規定された計測値により、外科的歯冠長延長術中に、臨床的歯冠長と生物学的歯冠長(切縁から骨頂までの距離)の正確な計測が可能

クラウンレングズニング		Crown Lengthening
パートコード	標準価格	取寄品
CLGS	7,400円	☺

規定された計測値により、審美的な歯間乳頭再建に必要な、切縁・コンタクトエリア・骨頂の位置の正確な計測が、フラップの閉鎖・縫合前に可能

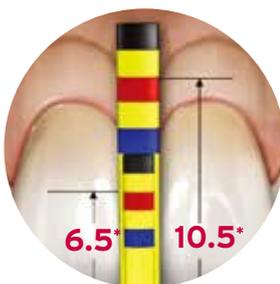

使用方法是こちらで
ご覧いただけます。
(英語)

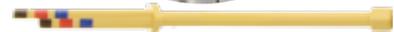

交換チップ BPLG 3入		BPLG
パートコード	標準価格	取寄品
BLPGREF	3,800円	☺

規定された計測値により、外科的歯冠長延長術中に、臨床的歯冠長と生物学的歯冠長(切縁から骨頂までの距離)の正確な計測が可能



交換チップ パピラ 3入		Papilla
パートコード	標準価格	取寄品
PAPREF	3,800円	☺

規定された計測値により、審美的な歯間乳頭再建に必要な、切縁・コンタクトエリア・骨頂の位置の正確な計測が、フラップの閉鎖・縫合前に可能



サウンディング		Sounding Gauge
パートコード	標準価格	取寄品
SOUNDGS	3,400円	☺



使用方法是こちらで
ご覧いただけます。
(英語)



専用ハンドル		Chu's Aesthetic Gauge Handle
パートコード	標準価格	取寄品
PROCLHDL	2,800円	☺

The Best In Practice

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](https://www.hu-friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年7月22日現在のものです。
販仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載
が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行って
いるため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY
©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-120J/2407 Restorative
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless
otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change
features of products, images and text at any time without notice.

【販売名 / 一般的名称 / 医療機器届出番号】

■コンポジット練成充填器 / 歯科用充填器 / 13B3X10195G10104 ■練成充填器 / 歯科用充填器 / 13B3X10195G10106 ■ハチエツ
ト / のみ / 13B3X10195G11101 ■マージントリマー / のみ / 13B3X10195G11104 ■エスカレーター / 歯科用エスカレーター /
13B3X10195G04101 ■咬合紙ホルダー / 歯科咬合紙用ピンセット / 13B3X10195G53101 ■カーパー / 歯科用練成充填形
成器 / 13B3X10195G14101 ■ジンジ/バルコードバッカー / 歯科用圧入充填器 / 13B3X10195G31102 ■クラウンリムーバー / 歯科用起
子及び剥離子 / 13B3X10195G13102 ■セメントス/パチュラ / 歯科用練成へら / 13B3X10195G40101 ■ワックス/パチュラ / 歯科技
工用形成器具 / 13B3X10195G33104 ■エステティックゲージ / 歯科技工用形成器具 / 13B3X10195G33101 ■ワックス/インスト
メント / 歯科技工用形成器具 / 13B3X10195G33102
●医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice