

ヒューフレディ スケーラー・検査 キャンペーン!

対象期間: 2025. 4/21(月) ▶ 6/20(金)

キャンペーン対象商品は**特別価格**にて
ご提供いたします。是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。
ご購入の際はお出入りの歯科商店に注文してください。

5つの質問で
グレイシーキュレットが
簡単に選べるよ!

LINE グレイシーキュレット
かんたんセレクト



ヒューフレディキャラクター
Sidekick(サイドキック)

チラシ内にわたしたちが隠れているよ!
全部で何体いるか数えてみてね!
答えは「個人防護具キャンペーン」の
チラシに載ってるよ!

※上記製品左上から PCVNCKIT6,
SAS17/18XE2, MIR5DSHD, MH6

掲載製品

- グレイシーキュレット
- シックルスケーラー
- ユニバーサルキュレット
- インプラントスケーラー チタン
- インプラケアII
- カラービュープローブ
- HDミラー・
ロジウムコーティングミラー
- エクスプローラー(探針)
- カラーコードプローブ
- ピンセット
- インストゥルメントシャープニング
・サイドキック
・ダイヤモンドシャープニングカード
・デュアルストーン

ヒューフレディキャラクター
Nevi(ネビィ)

HuFriedyGroup

HARMONY™

ハーモニー エルゴノミック スケーラー

Designed with TrueFit™ Technology

歯牙に加わる圧力を40.9%低減※

※ヒューフレディグループ製角柄ハンドル(#2)との比較での平均値
 ハーモニー エルゴノミック スケーラー及びキュレットは、
 スケーリング時に歯牙に加わる圧力を小さくできるため、
 患者様の快適さを高め、術者の疲労も軽減することができます。

表1: スケーリング時に歯牙に加わった圧力の平均値

ハンドルの種類	ピーク圧時点の平均値 (N)	ハーモニー エルゴノミック スケーラーハンドルとの差 (増分)
ハーモニー (#XE2)	1.20	—
角柄 (#2)	2.03	40.9%



シャープさがさらに長持ち!
 コーティングなしの高性能!!

刃物の調査機関CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association) の試験※1結果において、
エバーエッジ (EverEdge™) 2.0のカットティングエッジが試験用のシリコンストリップに加えた圧力は、
 開封時に約6ニュートン(約600g)、500回のストローク後も約7ニュートン(約700g)という結果でした。
 エバーエッジ (EverEdge™) 2.0のカットティングエッジが付与されたハーモニー (Harmony™) エルゴノミック
 スケーラーはシャープさが持続するため、軽い力で効率よくスケーリング操作ができ、術者は疲れにくく、
 患者様の負担も軽減されます。


※1: 測定用に調整されたシリコンストリップにブレードを反復して押し当て、ストリップを突き抜いた際の圧力を測定(加えられた圧力が低いほどブレードが鋭利なことを示し、ストロークによってブレードの鋭利さが低減すると、より多くの圧力を加える必要があるためニュートンの数値は増加する)

あらゆる方向から確実に
 素早い把持が可能



シリコングリップが従来品と比較して30%長くなり、
 より**確実且つ鋭敏に把持が可能**になりました。
 グリップ部分の幾何学模様はあらゆる方向から把持しても
 しっかりと操作できるように設計されています。

※従来のIMS シグネチャーグリップはサイズが異なるためご使用いただけません。

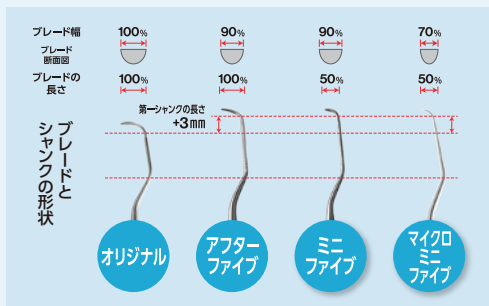グレイシーキュレット/シックルスケーラー 一覧表 (作業部の材質とハンドルのご紹介)



スタンダード: 細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。
 超音波スケーリング後の仕上げとして細かなスケーリングや
 ルートプレーニングに使用。
 リジッド: スタンダードシャンクに比べ太くて頑丈。
 比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。

作業部の材質	エバーエッジ 2.0 (EverEdge™ 2.0)		
	ヒューフレディグループがキュレット・スケーラーの エッジのシャープさをより持続するために開発 した優れた合金。 ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、 3段階の熱処理の温度・時間設定を改善、ブレードの表面処理を向上させ、パリの発生を抑制する合金です。		
ハンドルオプション	ハーモニー (Harmony™) #XE2  人間工学に基づく技術「TrueFit™テクノロジー」で設計されたハンドル。 6,600円	エバーエッジ (EverEdge™) #9E2  人間工学的に優れたハンドルデザイン。 しっかり把持できるダイヤモンドパターン。 (パープルのグリップを標準装着) 6,200円	
	オリジナル 現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、 グレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)
グレイシーキュレット	アフターファイブ 5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルと比較し 第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への 挿入が容易で組織への負担を軽減。	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)
	ミニファイブ 5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリ ジナルとアフターファイブの半分長さで、狭いポケットや根 分岐部での使用に適用。オリジナルと比較し第一シャンクが 3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で 組織への負担を軽減。	スタンダード 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14) ↑ハーモニーで新たに ラインナップされました!!	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)
	マイクロミニファイブ (シャンクが細くて硬いリジッドタイプ) 5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレード の長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルと比較し30% 細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。	リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	
		リジッド 1/2, 7/8, 11/12, 13/14	リジッド 1/2, 7/8, 11/12, 13/14
シックル	ネビィ	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
	衛生士用	H5/33, H6/H7	H5/33, H6/H7
	前歯用、臼歯用	204S, 204SD, モース 0/00	204S, 204SD, モース 0/00

把持力が57.3%低減*

※ヒューフレディグループ製角柄ハンドル(#2)との比較での平均値

軽い力でインスツルメントを把持できるため、反復動作による手の疲労や手根管症候群などのリスクを軽減することができます。

表2: スケーリング時の親指・人差し指・中指の総把持力の平均値 (歯牙に加わった圧力が最大値時)

ハンドルの種類	親指、人差し指、中指の総把持力の平均値 (kPa)	ハーモニー エルゴノミック スケーラーハンドルとの差 (増分)
ハーモニー (#XE2)	29.75	—
角柄 (#2)	69.69	57.3%



重すぎず軽すぎない、『バランスの良い』重さのハンドル

ハーモニー エルゴノミック スケーラーのハンドルはエパーエッジハンドル(#9E2)と同様『バランスの良い』重量感で、砂時計の形状をしたハンドルは術者の手によりフィットするよう設計されています。

信頼感のあるメタルハンドル

耐久性が高く洗浄が容易なメタルハンドルを採用しています。滑りにくい2重らせんデザインのハンドルは、手指感覚を向上、疲労を軽減します。



280万を超えるデータを収集

(世界各国のDHの方々が参加した試験結果の合計)





スケーリング時の手の動きをデータ化して、より把持しやすいようにデザインされたハンドル



シャープさがさらに長持ち!!
コーティングなしの高性能


イミュニティスチール (Immunity Steel™)

ヒューフレディグループで独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金です。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。

レジン8カラー (Resin 8 Colors) #C8E2	サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™) #7	サテンスチール (Satin Steel™) #6	角柄 #2
 レジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スケーラーの識別が容易。(ハンドルと同色のグリップを標準装着) 6,000円	 シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着) 5,800円	 力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。 5,600円	 8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。 5,200円
スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14) ※9/10はスタンダードのみ	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)		
スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)		
スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)		
1, 2, 3, 4	1, 2		
H5/33, H6/H7	H5/33, H6/H7		
204S, 204SD, モース 0/00	204SD		

※標準価格は全て税抜

グレーシーキュレット

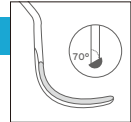

15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14)はシャングの角度を大きくしているため、対合歯に干渉される事なく、より良くフィットします。



1/2 前歯部
3/4 前歯部
5/6 ★ 前歯部及び小臼歯部
7/8 ★ 臼歯部の頬舌側面
9/10 臼歯部の頬舌側面 根分岐部
11/12 ★ 臼歯部の近心面
13/14 ★ 臼歯部の遠心面
15/16 (FIT11/12) 臼歯部の近心面
17/18 (FIT13/14) 臼歯部の遠心面



通常の11/12

通常の11/12では、近心面に平行になるように第一シャングを固定することが困難な場合があります。



15/16 (FIT11/12)

15/16 (FIT11/12)はシャングの角度を大きく取ったことにより、インストゥルメントのポジショニングが容易になり、固定点も近くに取れます。



通常の13/14


通常の13/14では、遠心面への到達が患者様の開口度によって制限されることがあります。



17/18 (FIT13/14)

17/18 (FIT13/14)はハンドルを咬合面と水平に近い角度で把持する事ができ、開口量の少ない患者様でも到達し難い遠心面に到達しやすくなります。

シクルスケーラー

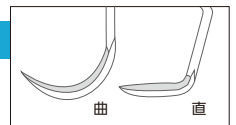

喫煙される患者さん等ステインが沈着しやすい方に…
医院に1本は必需品です!



ネビィ1(前歯用)★

コンパクトな鎌型とスプーン型の2種のブレード。前歯のステインや歯石を効率良く除去。

ネビィ2(臼歯用)

大きな屈曲と長めのブレードで、取り残しができやすい最後臼歯遠心面や歯間部へのアクセスが容易。

ネビィ3(臼歯用)★

コンパクトで細いブレードは狭小な歯間部に適用。緩やかな屈曲がついているので、特に臼歯部のスケーリング向き。

ネビィ4(臼歯用)

ネビィシリーズで最大サイズ且つ硬いリジッドタイプのブレード。長めのブレードは歯冠形態に沿わせながら、近遠心面への到達が可能。

衛生士用 H5/33

非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。前歯の歯頸部や歯間部のスケーリングに適用。

衛生士用 H6/H7

超薄型コントラアングルのデザイン。隣接歯間部に適用。シャングの角度により前歯および小臼歯に対応。

204S

臼歯歯肉縁上の隣接歯間部用。

204SD

コントラアングルのシャングデザインにより、臼歯部近遠心面に適用。

モース 0/00

叢生歯や細かい操作に向いている前歯部用の小型ブレード。

ヒューフレディで克服しよう!
苦手シリーズもチェックしてね!
(YouTube)



ユニバーサルキュレット



マッコール 17/18

歯牙を包み込むようなブレードの形状。同じ作業部で遠心から近心まで使用可能です。



ランガー 1/2 ★

下顎臼歯用

ランガー 3/4

上顎臼歯用

ランガー 5/6

前歯用

ランガー 17/18

上下顎臼歯用

コロンビア大学型 2R/2L

コロンビア大学型 4R/4L

臼歯部で高度に沈着してしまった歯石の除去に特に適用。

コロンビア大学型 13/14

浅いポケットの歯肉縁上・縁下の歯石除去、小児にも適用。



ランガー ミニファイブ 1/2 ★
下顎臼歯用



ランガー ミニファイブ 3/4
上顎臼歯用



ランガー ミニファイブ 5/6
前歯用



ランガー ミニファイブ

- 第一シャングは通常のランガーより3mm長く、5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザイン。
- ブレード幅が10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の損傷を軽減。
- ミニファイブ (Mini Five™) はブレードの長さが通常の半分サイズの、狭いポケットや根分岐部に適用。

※お求めの規格のハンドルの種類は7ページの注文書をご確認ください。


グレーシーキュレット バイोजェント

- 薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!
- 歯周治療の世界的名医 コーテリーニ先生ご考案!

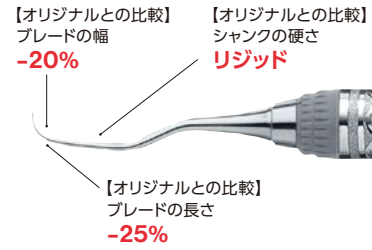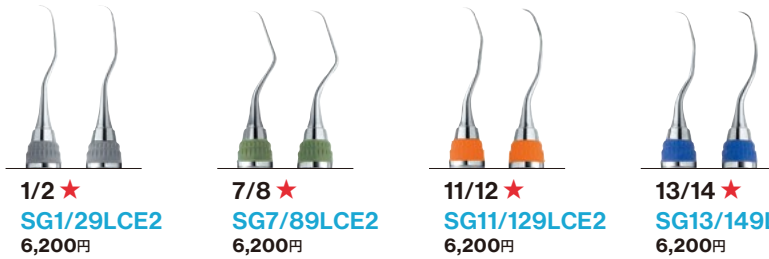

※グレーシーキュレット バイोजェントのハンドルはエバーエッジ(#9E2)のみになります。

インプラントスケーラー チタン

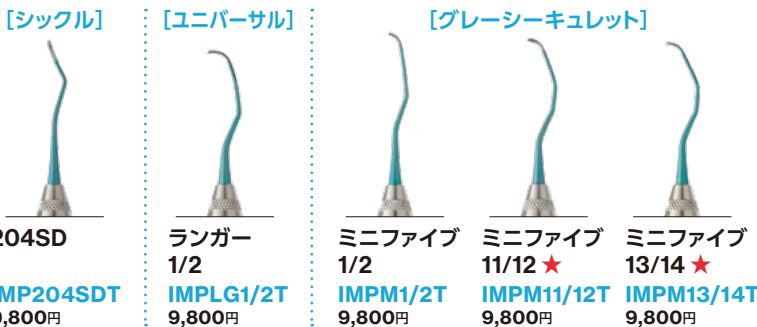

- 視認性の向上: 通常のスケーラーとの違いを一目で識別できるティール色陽極酸化チタンを採用
- シャープな切れ味を実現: 陽極酸化処理後に精巧に研磨し鋭利に仕上げたカットングエッジ
- シャーピング可能: シャーピングを行うことで、シャープさを復元することが可能 (チタンスケーラーのみに使用するストーンをご準備いただくことを推奨)
- 機能を強化: インプラントの歯石やバイオフィルムの除去などのメンテナンスが可能
- 人間工学的な使いやすさに配慮: ためでウォーターウェーブ柄のしっかりと把持出来るサテンスチールハンドルを採用




インプラケアII

チタン製のインプラント体やアパットメントを傷つけずに、プラークを除去できる、ディスポーザブルのレジンスケーラーです。(オートクレーブ滅菌してからご使用ください。)



[ユニバーサルキュレット]
ブレード相当部の先端が丸みを帯びているので、インプラント周囲の全てのエリアの清掃が行えます。

[シクルスケーラー]
ブレード相当部は先端に向かって細くなっており、歯冠修復部の除石に適用です。

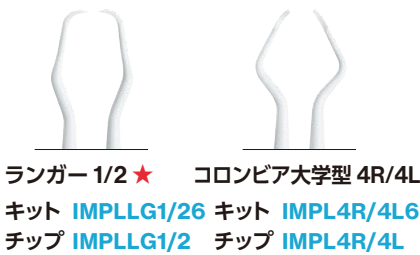

ランガー 1/2 ★ コロンビア大学型 4R/4L
 キット **IMPLLG1/26** キット **IMPL4R/4L6**
 チップ **IMPLLG1/2** チップ **IMPL4R/4L**


キット (ハンドル1本&チップ12組) **11,600円**
 チップ (チップ12組) **9,900円**



衛生士用 H6/H7 白歯用 204S
 キット **IMPLH6/76** キット **IMPL204S6**
 チップ **IMPLH6/7** チップ **IMPL204S**

ハンドル (単品) #6 **IMPHDL6** **2,000円**

カラービュープローブ

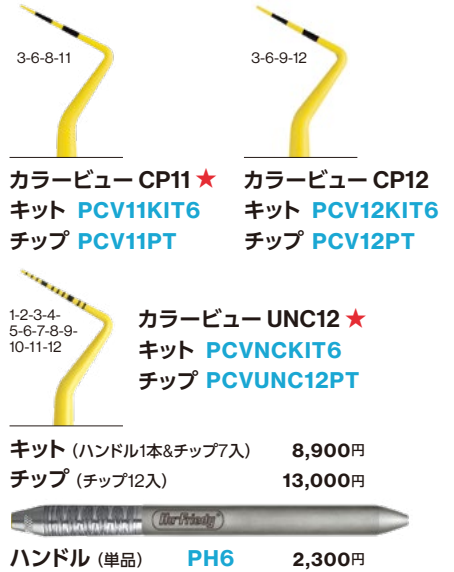

3-6-8-11 3-6-9-12

カラービュー CP11 ★ カラービュー CP12
 キット **PCV11KIT6** キット **PCV12KIT6**
 チップ **PCV11PT** チップ **PCV12PT**


1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 カラービュー UNC12 ★
 キット **PCVNCKIT6**
 チップ **PCVUNC12PT**

キット (ハンドル1本&チップ7入) **8,900円**
 チップ (チップ12入) **13,000円**

ハンドル (単品) **PH6** **2,300円**

HDミラー・ロジウムコーティングミラー

両面タイプはチークリトラクターとして使用しながら口腔内を照らすことが可能。ミラートップはダイレクトミラーのため2重3重に見えない。30°のオフセット。(176℃以下でオートクレーブ可)

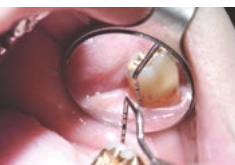

	片面3 φ20mm	片面4 ★ φ22mm	片面5 φ24mm	両面4 ★ φ22mm	両面5 φ24mm
1入	MIR3HD 1,500円	MIR4HD 1,500円	MIR5HD 1,500円	MIR4DSHD 1,700円	MIR5DSHD 1,700円
3入		MIR4HD3 4,000円	MIR5HD3 4,000円		
6入				MIR4DSHD6 9,700円	MIR5DSHD6 9,700円
12入		MIR4HD12 15,500円	MIR5HD12 15,500円		
ロジウム コーティング	3入	MIR4/3 2,900円	MIR5/3 2,900円	MIR4DS/3 4,000円	MIR5DS/3 4,000円

HDミラーとは...

- ロジウムコーティングのミラーより明るさが**38.5%**向上*
 - 他の表面ミラーより、明るさが**50%**向上*
 - 傷が付きにくく、長時間使用できる
- ※社内資料

コーンソケットハンドル



#1 **MH1** **2,300円**

#6 **MH6** **2,700円**

#7 **MH7** **2,700円**

エキスプローラー (探針)

特殊配合スチール合金「デュラスポンド」を使用、柔軟性と弾力性、さらに従来品よりも高い触覚感度を発揮し、高精度の診断を実現します。

この形状に曲げても折れないほどの弾力性!!




- 3A 歯肉縁上用
- #6 EXS3A6 2,300円
- #7 EXS3A7 2,500円




グレーシーキュレット11/12と同型の探針で歯肉縁下の歯石探知におすすめ

EXD11/12より第一シャングが3mm長いので、より深いポケットの探知におすすめ

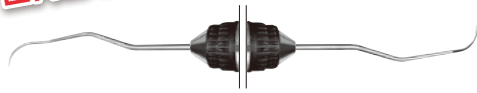


- 11/12 根面用
- #6 EXD11/126 3,100円
- #7 EXD11/127 3,300円

特に臼歯部隣接面のポケット内の歯石探査に適しています。1本で全顎の探査ができるデザインです。

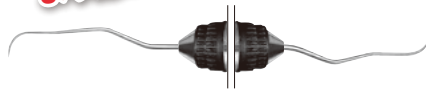

- アフターファイブ 11/12 深い根面用
- #6 EXD11/12A6 3,100円
- #7 EXD11/12A7 3,300円

EXD11/12より第一シャングが3mm長いので、より深いポケットの歯石探査に適しています。

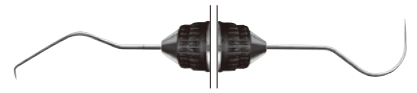

- 5 歯肉縁上及び縁下用
- #6 EXD56 3,100円
- #7 EXD57 3,300円



カラーコードプローブ

繰り返し使用しても、消えにくいマーキング (Qulix™) を採用しています。

圧倒的なマーキングの見やすさ!!!



- ネイバース Q2N
- #6 PQ2N6 6,400円
- #7 PQ2N7 6,600円
- #31 PQ2N 6,200円



基本の3-3-2-3のプローブ




- CP11
- #6 PCP116 4,400円
- #7 PCP117 4,600円
- #30 PCP11 4,200円



- CP12
- #6 PCP126 4,400円
- #7 PCP127 4,600円
- #30 PCP12 4,200円



- CPUNC12
- #6 PCPUNC126 4,400円
- #7 PCPUNC127 4,600円
- #30 PCPUNC12 4,200円

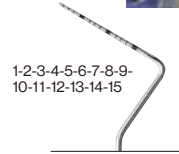

- CPUNC15
- #6 PCPUNC156 4,400円
- #7 PCPUNC157 4,600円
- #30 PCPUNC15 4,200円

【ハンドル 略称】 #6…サテンスチール #7…サテンスチールカラー (黒いシリコングリップ付) #30/#31…細丸

ピンセット



コーク型18JSII ギザなし DP18JS-II 3,600円



ピンセット 汎用 DPU17 4,200円

インストゥルメントシャープニング

電動タイプ

サイドキック ★

ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応。

SDKKIT 72,600円



サイドキックの使い方を動画でCHECK!!



カードタイプ

ダイヤモンドシャープニングカード

繰り返し使用しても平らな表面を維持! 超音波洗浄器で容易に洗浄・高圧蒸気滅菌にも対応! クレジットカードサイズのシャープナー!!



- 超細目 (EXTRA FINE) DSCXFINE 7,000円
- 細目 ★ (FINE) DSCFINE 7,000円
- 中目 (MEDIUM) DSCMED 7,000円

ストーン

デュアルストーン ★

極度に鈍化したスクレーラーの研磨や修正用の粗目の青色面と、日常のメンテナンス用の細目の白色面をひとつに組み合わせたセラミックストーン。

SSDGRIT 5,200円



スクレーラーやキュレットのハンドシャープニングの方法についてはこちら!



商品名		ハンドルの種類 標準価格	ハーモニー #XE2 6,600円	数量	エバーエッジ #9E2 6,200円	数量	レジン8カラー #C8E2 6,000円	数量	サテンスチールカラー #7 5,800円	数量	サテンスチール #6 5,600円	数量	角柄 #2 5,200円	数量
オリジナル	スタンダード	1/2	SG1/2XE2		SG1/29E2		SG1/2C8E2		SG1/27		SG1/26		SG1/2	
		3/4	SG3/4XE2		SG3/49E2		SG3/4C8E2		SG3/47		SG3/46		SG3/4	
		5/6	SG5/6XE2		SG5/69E2		SG5/6C8E2		SG5/67		SG5/66		SG5/6	
		7/8	SG7/8XE2		SG7/89E2		SG7/8C8E2		SG7/87		SG7/86		SG7/8	
		9/10	SG9/10XE2		SG9/109E2		SG9/10C8E2		SG9/107		SG9/106		SG9/10	
		11/12	SG11/12XE2		SG11/129E2		SG11/12C8E2		SG11/127		SG11/126		SG11/12	
		13/14	SG13/14XE2		SG13/149E2		SG13/14C8E2		SG13/147		SG13/146		SG13/14	
		15/16(FIT 11/12)	SG15/16XE2		SG15/169E2		SG15/16C8E2		SG15/167		SG15/166		SG15/16	
		17/18(FIT 13/14)	SG17/18XE2		SG17/189E2		SG17/18C8E2		SG17/187		SG17/186		SG17/18	
	フレジ	1/2	SG1/2RXE2		SG1/2R9E2		SG1/2RC8E2		SG1/2R7		SG1/2R6		SGR1/2R	
		3/4	SG3/4RXE2		SG3/4R9E2		SG3/4RC8E2		SG3/4R7		SG3/4R6		SGR3/4R	
		5/6	SG5/6RXE2		SG5/6R9E2		SG5/6RC8E2		SG5/6R7		SG5/6R6		SGR5/6R	
		7/8	SG7/8RXE2		SG7/8R9E2		SG7/8RC8E2		SG7/8R7		SG7/8R6		SGR7/8R	
		9/10	SG9/10RXE2		SG9/10R9E2				SG9/10R7		SG9/10R6		SGR9/10R	
		11/12	SG11/12RXE2		SG11/12R9E2		SG11/12RC8E2		SG11/12R7		SG11/12R6		SGR11/12R	
		13/14	SG13/14RXE2		SG13/14R9E2		SG13/14RC8E2		SG13/14R7		SG13/14R6		SGR13/14R	
		15/16(FIT 11/12)	SG15/16RXE2		SG15/16R9E2		SG15/16RC8E2		SG15/16R7		SG15/16R6		SGR15/16R	
		17/18(FIT 13/14)	SG17/18RXE2		SG17/18R9E2		SG17/18RC8E2		SG17/18R7		SG17/18R6		SGR17/18R	
グレイシーキュレット アフターファイブ	スタンダード	1/2	SRPG1/2XE2		SRPG1/29E2		SRPG1/2C8E2		SRPG1/27		SRPG1/26		SRPG1/2	
		3/4	SRPG3/4XE2		SRPG3/49E2		SRPG3/4C8E2		SRPG3/47		SRPG3/46		SRPG3/4	
		5/6	SRPG5/6XE2		SRPG5/69E2		SRPG5/6C8E2		SRPG5/67		SRPG5/66		SRPG5/6	
		7/8	SRPG7/8XE2		SRPG7/89E2		SRPG7/8C8E2		SRPG7/87		SRPG7/86		SRPG7/8	
		11/12	SRPG11/12XE2		SRPG11/129E2		SRPG11/12C8E2		SRPG11/127		SRPG11/126		SRPG11/12	
		13/14	SRPG13/14XE2		SRPG13/149E2		SRPG13/14C8E2		SRPG13/147		SRPG13/146		SRPG13/14	
		15/16(FIT 11/12)	SRPG15/16XE2		SRPG15/169E2		SRPG15/16C8E2		SRPG15/167		SRPG15/166		SRPG15/16	
		フレジ	1/2	SRP1/2RXE2		SRP1/2R9E2		SRP1/2RC8E2		SRP1/2R7		SRP1/2R6		SRPG1/2R
			3/4	SRP3/4RXE2		SRP3/4R9E2		SRP3/4RC8E2		SRP3/4R7		SRP3/4R6		SRPG3/4R
	5/6		SRP5/6RXE2		SRP5/6R9E2		SRP5/6RC8E2		SRP5/6R7		SRP5/6R6		SRPG5/6R	
	7/8		SRP7/8RXE2		SRP7/8R9E2		SRP7/8RC8E2		SRP7/8R7		SRP7/8R6		SRPG7/8R	
	11/12		SRP11/12RXE2		SRP11/12R9E2		SRP11/12RC8E2		SRP11/12R7		SRP11/12R6		SRPG11/12R	
	13/14		SRP13/14RXE2		SRP13/14R9E2		SRP13/14RC8E2		SRP13/14R7		SRP13/14R6		SRPG13/14R	
	15/16(FIT 11/12)		SRP15/16RXE2		SRP15/16R9E2		SRP15/16RC8E2		SRP15/16R7		SRP15/16R6		SRPG15/16R	
	スタンダード		1/2	SAS1/2XE2		SAS1/29E2		SAS1/2C8E2		SAS1/27		SAS1/26		SAS1/2
			3/4	SAS3/4XE2		SAS3/49E2		SAS3/4C8E2		SAS3/47		SAS3/46		SAS3/4
		5/6	SAS5/6XE2		SAS5/69E2		SAS5/6C8E2		SAS5/67		SAS5/66		SAS5/6	
		7/8	SAS7/8XE2		SAS7/89E2		SAS7/8C8E2		SAS7/87		SAS7/86		SAS7/8	
11/12		SAS11/12XE2		SAS11/129E2		SAS11/12C8E2		SAS11/127		SAS11/126		SAS11/12		
13/14		SAS13/14XE2		SAS13/149E2		SAS13/14C8E2		SAS13/147		SAS13/146		SAS13/14		
15/16(FIT 11/12)		SAS15/16XE2		SAS15/169E2		SAS15/16C8E2		SAS15/167		SAS15/166		SAS15/16		
17/18(FIT 13/14)		SAS17/18XE2												
フレジ		1/2	SAS1/2RXE2		SAS1/2R9E2		SAS1/2RC8E2		SAS1/2R7		SAS1/2R6		SAS1/2R	
	3/4	SAS3/4RXE2		SAS3/4R9E2		SAS3/4RC8E2		SAS3/4R7		SAS3/4R6		SAS3/4R		
	5/6	SAS5/6RXE2		SAS5/6R9E2		SAS5/6RC8E2		SAS5/6R7		SAS5/6R6		SAS5/6R		
	7/8	SAS7/8RXE2		SAS7/8R9E2		SAS7/8RC8E2		SAS7/8R7		SAS7/8R6		SAS7/8R		
	11/12	SAS11/12RXE2		SAS11/12R9E2		SAS11/12RC8E2		SAS11/12R7		SAS11/12R6		SAS11/12R		
	13/14	SAS13/14RXE2		SAS13/14R9E2		SAS13/14RC8E2		SAS13/14R7		SAS13/14R6		SAS13/14R		
	15/16(FIT 11/12)	SAS15/16RXE2		SAS15/16R9E2		SAS15/16RC8E2		SAS15/16R7		SAS15/16R6		SAS15/16R		
	フレジ	1/2	SMS1/2XE2		SMS1/29E2									
		7/8	SMS7/8XE2		SMS7/89E2									
11/12		SMS11/12XE2		SMS11/129E2										
13/14		SMS13/14XE2		SMS13/149E2										
ソニック フルスクリーン	ネビィ	1前歯用	SCNEV11XE2		SCNEV119E2		SCNEV11C8E2		SCNEV117		SCNEV11			
		2臼歯用	SCNEV12XE2		SCNEV129E2		SCNEV12C8E2		SCNEV127		SCNEV12			
		3臼歯用	SCNEV13XE2		SCNEV139E2		SCNEV13C8E2							
		4臼歯用	SCNEV14XE2		SCNEV149E2		SCNEV14C8E2							
	衛生士用	H5/33	SH5/33XE2		SH5/339E2		SH5/33C8E2		SH5/337		SH5/336		SH5/33	
		H6/H7	SH6/7XE2		SH6/79E2		SH6/7C8E2		SH6/77		SH6/76		SH6/7	
		204S	S204SXE2		S204S9E2		S204SC8E2							
		204SD	S204SDXE2		S204SD9E2		S204SDC8E2		S204SD7		S204SD6		S204SD2	
前歯用	モース 0/00	SM0/00XE2		SM0/009E2		SM0/00C8E2								
ユニバーサル キューレット	マッコール	17/18	SM17/18XE2		SM17/189E2									
		ランガー	1/2	SL1/2XE2		SL1/29E2		SL1/2C8E2						
			3/4	SL3/4XE2		SL3/49E2		SL3/4C8E2						
			5/6	SL5/6XE2		SL5/69E2		SL5/6C8E2						
	17/18	SL17/18XE2		SL17/189E2		SL17/18C8E2								
	コロンビア 大学型	2R/2L	SC2R/2LXE2											
		4R/4L	SC4R/4LXE2		SC4R/4L9E2		SC4R/4LC8E2							
	13/14	SC13/14XE2		SC13/149E2		SC13/14C8E2								
	ランガー ミニ ファイブ	1/2			SL1/2MF9E2									
		3/4			SL3/4MF9E2									
5/6				SL5/6MF9E2										
バイオ ジェット	フレジ	1/2			SG1/29LCE2									
		7/8			SG7/89LCE2									
		11/12			SG11/129LCE2									
		13/14			SG13/149LCE2									

LINEでもっと便利に、簡単に!

グレイシーキュレット
かんたんセレクト!



ヒューフレディ スケーラー・検査キャンペーン 注文書

掲載製品全て特別価格!! 期間: 2025年4月21日(月)~6月20日(金)

※標準価格は全て税抜

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量	
インプラント スケーラー チタン	204SD	IMP204SDT	9,800	
	ランガー 1/2	IMPLG1/2T	9,800	
	ミニファイブ 1/2	IMPM1/2T	9,800	
	ミニファイブ 11/12	IMPM11/12T	9,800	
	ミニファイブ 13/14	IMPM13/14T	9,800	
インプラケアII	キット ハンドル 1本 チップ 12組	ランガー 1/2	IMPLLG1/26	11,600
		コロンビア大学型 4R/4L	IMPL4R/4L6	11,600
		衛生士用 H6/H7	IMPLH6/76	11,600
		臼歯用 204S	IMPL204S6	11,600
		ランガー 1/2	IMPLLG1/2	9,900
	チップ 12組	コロンビア大学型 4R/4L	IMPL4R/4L	9,900
		衛生士用 H6/H7	IMPLH6/7	9,900
		臼歯用 204S	IMPL204S	9,900
	ハンドル(単品) #6	IMPHDL6	2,000	
	カラービュー プローブ	キット ハンドル 1本 チップ 7入	CP11	PCV11KIT6
CP12			PCV12KIT6	8,900
UNC12			PCVNCKIT6	8,900
チップ 12入		CP11	PCV11PT	13,000
		CP12	PCV12PT	13,000
		UNC12	PCVUNC12PT	13,000
ハンドル(単品)		PH6	2,300	
ミラートップ HD コーティング		片面 1入	3 (φ20mm)	MIR3HD
	4 (φ22mm)		MIR4HD	1,500
	5 (φ24mm)		MIR5HD	1,500
	片面 3入	4 (φ22mm)	MIR4HD3	4,000
		5 (φ24mm)	MIR5HD3	4,000
	片面 12入	4 (φ22mm)	MIR4HD12	15,500
		5 (φ24mm)	MIR5HD12	15,500
	両面 1入	4 (φ22mm)	MIR4DSHD	1,700
		5 (φ24mm)	MIR5DSHD	1,700
	両面 6入	4 (φ22mm)	MIR4DSHD6	9,700
		5 (φ24mm)	MIR5DSHD6	9,700
	ミラートップ ロジウム コーティング	片面 3入	4 (φ22mm)	MIR4/3
5 (φ24mm)			MIR5/3	2,900
両面 3入		4 (φ22mm)	MIR4DS/3	4,000
		5 (φ24mm)	MIR5DS/3	4,000
コーンソケット ハンドル	#1	MH1	2,300	
	#6	MH6	2,700	
	#7	MH7	2,700	

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量		
エキス プローラー	片頭	3A #6	EXS3A6	2,300	
		#7	EXS3A7	2,500	
	両頭	11/12 #6	EXD11/126	3,100	
		#7	EXD11/127	3,300	
		アフター ファイブ 11/12 #6	EXD11/12A6	3,100	
		#7	EXD11/12A7	3,300	
		5 #6	EXD56	3,100	
	#7	EXD57	3,300		
		カラー コード プローブ	両頭	ネイバース Q2N #6	PQ2N6
	#7			PQ2N7	6,600
#31	PQ2N			6,200	
片頭	#6			PCP116	4,400
	CP11 #7			PCP117	4,600
	#30		PCP11	4,200	
	#6		PCP126	4,400	
	CP12 #7		PCP127	4,600	
#30	PCP12		4,200		
CPUNC 12	#6		PCPUNC126	4,400	
	#7	PCPUNC127	4,600		
	#30	PCPUNC12	4,200		
CPUNC 15	#6	PCPUNC156	4,400		
	#7	PCPUNC157	4,600		
	#30	PCPUNC15	4,200		
ピンセット	コーク型18JSII	DP18JS-II	3,600		
	ピンセット汎用	DPU17	4,200		
サイドキック		SDKKIT	72,600		
ダイヤモンド シャープニング カード	超細目	DSCXFINE	7,000		
	細目	DSCFINE	7,000		
	中目	DSCMED	7,000		
デュアルストーン		SSDGRIT	5,200		

現在一部の製品につきましては、ご発注を多くいただいているため、お届けまで時間を要する製品もございます。在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2025年4月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
 販売名: インプラケアII (一般的名称: 歯科用スケーラー) 医療機器届出番号: 13B3X10195G02103
 販売名: インプラントスケーラー (一般的名称: 歯科用スケーラー) 医療機器届出番号: 13B3X10195G02107
 販売名: エキスプローラー (一般的名称: 歯科用探針) 医療機器届出番号: 13B3X10195G05101
 販売名: カラーコードプローブ (一般的名称: 歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号: 13B3X10195G07101
 販売名: カラービュープローブ (一般的名称: 歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号: 13B3X10195G07103
 販売名: グレーナーキュレット (一般的名称: 歯周用キュレット) 医療機器届出番号: 13B3X10195G01101
 販売名: スケーラー (一般的名称: 歯科用スケーラー) 医療機器届出番号: 13B3X10195G02101
 販売名: ピンセット (一般的名称: ピンセット) 医療機器届出番号: 13B3X10195G34102
 販売名: ミラー (一般的名称: 歯鏡) 医療機器届出番号: 13B3X10195G22101
 販売名: ユニバーサルキュレット (一般的名称: 歯周用キュレット) 医療機器届出番号: 13B3X10195G01102
 【商標について】 以下はヒューフレディグループまたはその関連会社の商標です:
 Hu-Friedy, After Five, Colours, EVEREDGE, Harmony, Immunity Steel, Implacare, Micro Mini Five, Mini Five, Satin Steel, Sidekick, True Fit
 ●医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

ヒューフレディ オフィシャルSNSでは様々な情報を発信しております。

Instagram



Facebook



YouTube



LINE



ネビィとサイドキックの
LINE スタンプ販売中!



■ 歯科医院名

■ お名前

■ ご住所 〒

TEL

【歯科商店名】