

Universal Curettes


ユニバーサルキュレット

ユニバーサルキュレットとは?

ユニバーサルキュレットは、歯肉縁上および歯肉縁直下に沈着した、それほど強固ではない歯石除去に適したデザインのスクレーパーです。丸みを持たせた先端部と反転させたデザインにより歯肉縁下でも有効に除石することが可能です。

ユニバーサルキュレットの使用方法

ブレード部分はシャンクに対して 90°の角度が付けられており、二つの平行したカッティングエッジが丸みを持たせた先端部で接合するようになっています。多くの歯面の歯肉縁上および歯肉縁下での操作に適しています。

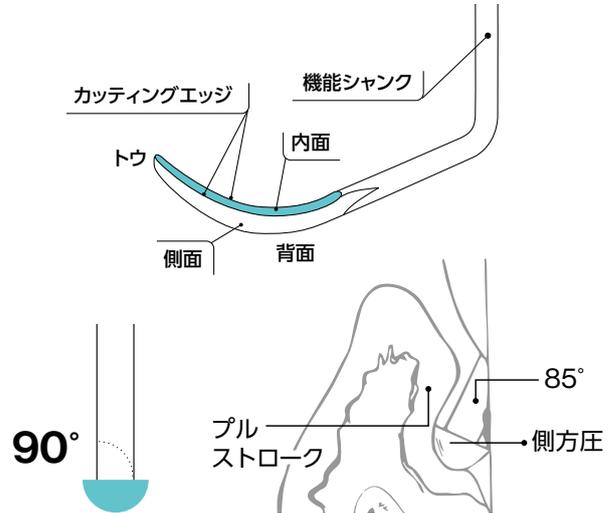

ユニバーサルキュレット ランガー



ランガーキュレットはグレイシーキュレットのシャンクのデザインとユニバーサルキュレットの両刃のブレードの組み合わせです。(ブレードの角度:90°)これらのインスツルメントですべての歯面のスクレーリングが可能です。歯周病専門医でコロムビア大学の前臨床教授のパートン・ランガー先生により1985年に開発されました。ランガーキュレットは多くの歯面フィットし、スクレーリングやルートプレーニング、そして歯周外科においてもご使用いただけるように、4本1セットでデザインされています。汎用のブレード部分のデザインにより、1本で近心面および遠心面に適用されます。

ランガー(オリジナル)



SL1/29E2

下顎臼歯用
¥6,200

SL3/49E2

上顎臼歯用
¥6,200


SL5/69E2

前歯用
¥6,200

SL17/189E2

上下顎臼歯用
¥6,200

【ランガー使用部位チャート】

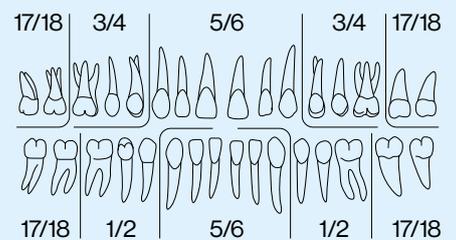

ランガー ミニファイブ



SL1/2MF9E2


下顎臼歯用
¥6,200

SL3/4MF9E2

上顎臼歯用
¥6,200

SL5/6MF9E2

前歯用
¥6,200

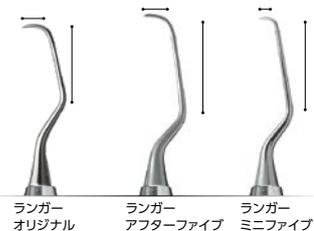

- アフターファイブ (After Five) およびミニファイブ (Mini Five) の第一シャンクは通常のランガーより3mm長く、5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザインです。
- ブレードが10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の腫脹を軽減します。
- ミニファイブ (Mini Five) はブレードがアフターファイブ (After Five) や通常のランガーの半分サイズで、狭いポケットや根分岐部に適しています。

Universal Curettes ユニバーサルキュレット

ユニバーサルキュレット コロンビア大学型

コロンビア大学型キュレットは、元々、1930年代にコロンビア大学のイサドール・ハーシュフェルト先生により考案されました。3種のコロンビア大学型デザインには、長年にわたり蓄積されてきた英知が結集しています。



前歯部に適用されるために、4R/4Lよりも短めのブレード部分を持ち角度は緩くなっています。 **SC2R/2L9E2**
前歯用
¥6,200



臼歯部で沈着してしまった歯石の除去に特に適用です。

SC4R/4L9E2
臼歯用
¥6,200



浅いポケットの歯肉縁上・縁下の歯石除去、小児にも適用です。

SC13/149E2
ユニバーサル
¥6,200

ユニバーサルキュレット マッコール 17/18



歯を包み込むようなブレードの形状。同じ作業部で遠心から近心まで使用可能です。



SM17/18XE2
¥6,600



ユニバーサルキュレット 早見表 ※このパンフレットに掲載されている品目でエパーエッジ2.0作業部が付与された3種のハンドルの早見表です。
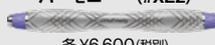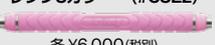
| ハンドルの種類 | | ハーモニー (#XE2) | エパーエッジ (#9E2) | レジン8カラー (#C8E2) |
|-------------|-------|---|--|---|
| 商品名 | |  各 ¥6,600 (税別) |  各 ¥6,200 (税別) |  各 ¥6,000 (税別) |
| ランガー | 1/2 | SL1/2XE2 | SL1/29E2 | SL1/2C8E2 |
| | 3/4 | SL3/4XE2 | SL3/49E2 | SL3/4C8E2 |
| | 5/6 | SL5/6XE2 | SL5/69E2 | SL5/6C8E2 |
| | 17/18 | SL17/18XE2 | SL17/189E2 | SL17/18C8E2 |
| ランガー ミニファイブ | 1/2 | - | SL1/2MF9E2 | - |
| | 3/4 | - | SL3/4MF9E2 | - |
| | 5/6 | - | SL5/6MF9E2 | - |
| コロンビア大学型 | 2R/2L | SC2R/2LXE2 | SC2R/2L9E2 | SC2R/2LC8E2 |
| | 4R/4L | SC4R/4LXE2 | SC4R/4L9E2 | SC4R/4LC8E2 |
| マッコール | 13/14 | SC13/14XE2 | SC13/149E2 | SC13/14C8E2 |
| | 17/18 | SM17/18XE2 | SM17/189E2 | SM17/18C8E2 |

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年10月1日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。■販売名/一般的名称/医療機器届出番号 ■ユニバーサルキュレット/歯周用キュレット/13B3X10195G01102 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です:Hu-Friedy ©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-192J/2410

HuFriedyGroup
The Best In Practice