

歯牙の把持力が20%UP^{※1}

Diamond Dusted Forceps

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

ヒューフレイディグループ製「抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト」は、
把持部内側に**ダイヤモンドダスト加工**を施したことにより
滑りにくく、歯牙を確実に把持します。^{※1}

薄いテーパ状の先端部は、**破折や侵襲のリスクを低減し**
歯牙へのアクセスと視野が向上します。

ハンドルに**ホールパターン**を採用したことにより従来品と
比較して**約35%軽量**になり^{※2}、使用中の快適さと
コントロールの良さを実現します。

また、**マット仕上げ**のため**ライトの乱反射を抑制**し
術野をより良くします。

※1: ヒューフレイディグループ製抜歯鉗子アトラウマとの比較

※2: ヒューフレイディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量と
ダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較



Diamond Dusted Forceps


抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

Get a Better GRIP

歯牙の把持力が**20%UP**※

※ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウメアとの比較

把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持します。

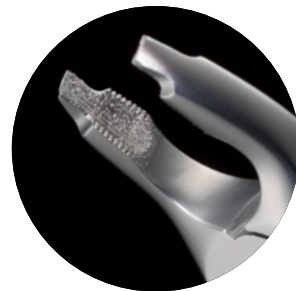


薄いテーパー状の先端部

薄いテーパー状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、また歯牙へのアクセスと視野が向上します。

従来品と比較して約**35%軽量**※

※ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較


穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。

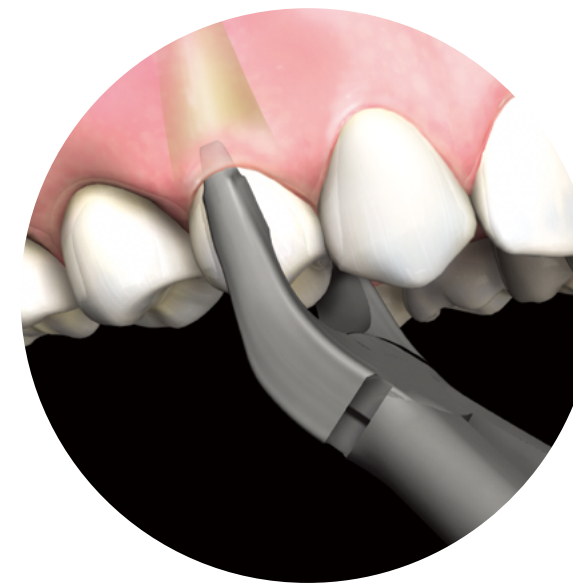

臨床動画 抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト『アピカル 35』を用いた上顎右側4番の低侵襲な抜歯



①歯軸と鉗子の軸を一致させ頬舌的にゆっくりと倒して歯槽骨を拡げる。少し動きが大きくなったら捻りを加える。(単根歯の場合)

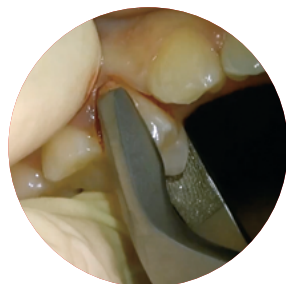

②力を入れすぎると患者さんが怖がってしまうため力をかけずにゆっくり動かし。



③ほとんど歯肉が傷んでおらず出血していない状態で抜去。

この症例の動画はこちらからご覧いただけます




画像・動画提供：
公立学校共済組合九州中央病院
顧問
堀之内 康文先生
歯科口腔外科部長・インプラントセンター長
佐々木 匡理先生

マット仕上げ


ライトの乱反射を抑制し、より良い視野にします。

※ヒンジインストルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。


上顎用

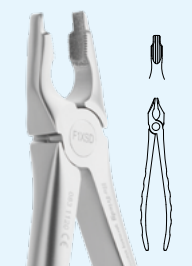


ダイヤモンドダスト
スタンダード 1
上顎切歯用
ギザ付
F1XS
39,600円

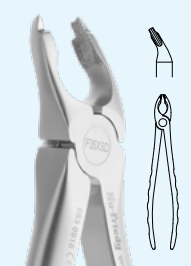


ダイヤモンドダスト
35
上顎犬歯・小臼歯用
ギザ付
F35XS
39,600円

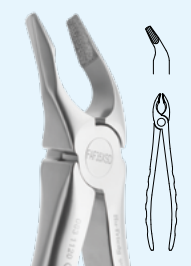


ダイヤモンドダスト
アピカル 35 ★
上顎犬歯・小臼歯用
FAF35XS
39,600円

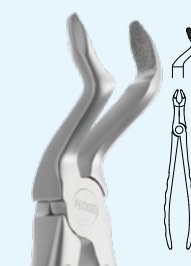

ダイヤモンドダスト
67 ★
上顎大臼歯用
F67XS
39,600円

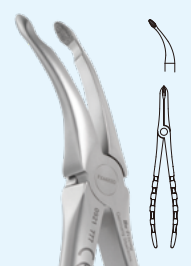

ダイヤモンドダスト
44 ★
上顎歯根用
FX44XS
39,600円

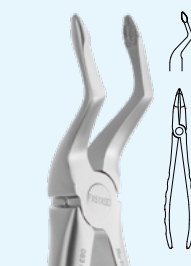

ダイヤモンドダスト
51
上顎歯根用
ギザ付
FX51XS
39,600円

下顎用



ダイヤモンドダスト
36
下顎切歯用
ギザ付
F36XS
39,600円




ダイヤモンドダスト
アピカル 36
下顎切歯・小臼歯用
FAF36XS
39,600円



ダイヤモンドダスト
13
下顎小臼歯用
ギザ付
F13XS
39,600円



ダイヤモンドダスト
21 ★
下顎大臼歯用
ギザ付
F21XS
39,600円

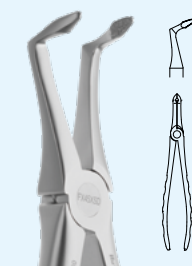

ダイヤモンドダスト
45
下顎歯根用
ギザ付
FX45XS
39,600円

ヒューフレディグループ 抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 注文書

使用部位		製品名	パートコード	標準価格 (税抜)	数量
上 顎	上顎切歯	スタンダード 1	F1XSD	¥39,600	
	上顎犬歯・小臼歯	35	F35XSD	¥39,600	
	上顎犬歯・小臼歯	アピカル 35	FAF35XSD	¥39,600	
	上顎大臼歯	67	F67XSD	¥39,600	
	上顎歯根	44	FX44XSD	¥39,600	
	上顎歯根	51	FX51XSD	¥39,600	
下 顎	下顎切歯	36	F36XSD	¥39,600	
	下顎切歯・小臼歯	アピカル 36	FAF36XSD	¥39,600	
	下顎小臼歯	13	F13XSD	¥39,600	
	下顎大臼歯	21	F21XSD	¥39,600	
	下顎歯根	45	FX45XSD	¥39,600	

ヒンジ製品の
毎日のお手入れに…



鉗子の日々のお手入れに
IMS潤滑スプレー 236ml

ILS 3,200円

IMS潤滑スプレー (ILS) はヒンジ部の
動きをスムーズにします。



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格は2025年11月1日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。販売名: 抜歯鉗子 (一般的名称: 抜歯用鉗子) 医療機器届出番号: 13B3X10195G08101 ●医療機器の分類: 一般医療機器 (クラスI)

ヒューフレディ オフィシャルSNSでは様々な情報を発信しております!!



■ 歯科医院名 ■ お名前 ■ ご住所 〒 - TEL - -	【歯科商店名】
---	----------------