

HuFriedyGroup Surgical Product Collection

ヒューフレディ サージカルコレクション



Instrumentation and
Procedural Products



掲載製品

- 持針器
- はさみ
- 縫合用プライヤー
- ティッシュプライヤー
- 抜歯鉗子ダイヤモンドダスト
- 抜歯鉗子プレジデンシャル
- 骨鉗子
- 止血鉗子
- ティッシュニッパー
- ルクセーティングエレベーター スリム
- ルクセーティングハイブリッド
- ルクセーティングエレベーター
- エレベーターバーナード
- エレベーター (ヘーベル)
- ルートチップエレベーター
- ボーンキュレット
- ボーンプラガー
- サイナスリフトインスツルメント
- ペリオドンタルチゼル (のみ)
- ファイル
- ペリオスチール
- ペリオドンタルナイフ
- トンネリングナイフ
- ペリオサージカルキュレット
- ペリオトーム
- シリンジ
- スカルペルハンドル
- リトラクター
- マウスギャグ (開口器)
- IMSカセット

【製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造販売元】 株式会社アルファメッド 〒106-0031 東京都港区西麻布3-6-4

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice

持針器

①




先端幅
約1.0mm

軽い力でロック!

マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ
全長: 18cm
SPNHDPVN
97,300円
ヨーロッパハンドルより
更に凸凹の少ない
スムーズハンドル

6-0
7-0
8-0

②

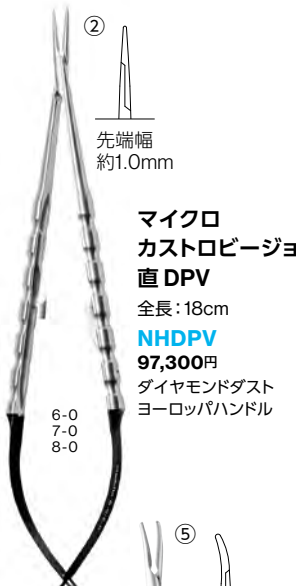


先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
直 DPV
全長: 18cm
NHDPV
97,300円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0

③

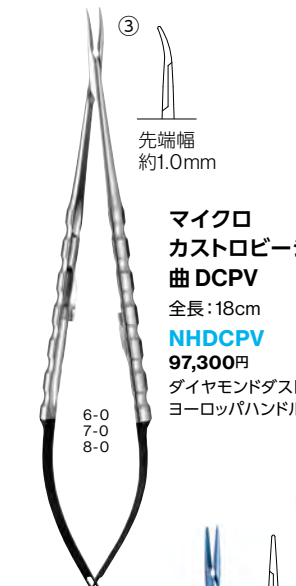

先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
曲 DCPV
全長: 18cm
NHDCPV
97,300円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0

④



先端幅
約1.7mm

マイクロ
カストロビージョ
直 DPVN
全長: 18cm
NHDPVN
97,300円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

4-0
5-0
6-0

**4-0、5-0対応の
マイクロ
カストロビージョ**

⑤



先端幅
約1.7mm

マイクロ
カストロビージョ
曲 DCPVN
全長: 18cm
NHDCPVN
97,300円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

4-0
5-0
6-0

**4-0、5-0対応の
マイクロ
カストロビージョ**

⑥



先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
直 チタン TMBH
全長: 18cm
NHTMBH
164,500円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0
9-0
10-0

**軽量で
高強度!**

⑦



先端幅
約1.8mm

カストロビージョ
直 5024R
全長: 18cm
NH5024R
87,400円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

6-0
7-0
8-0

⑧



先端幅
約1.5mm

カストロビージョ
曲 5024RC
全長: 18cm
NH5024RC
87,400円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0

⑨



先端幅
約1.5mm

カストロビージョ
コーテリー直
全長: 18cm
NH5024CORT
87,400円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより
先端が細くなっています

5-0
6-0
7-0
8-0

**NH5024Rより
細い先端で繊細な
縫合がしやすい**

⑩




先端幅
約2.4mm

カストロビージョ
シミオン 直
全長: 18cm
NH5024SIM
87,400円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより
大きめの先端

3-0
4-0

**3-0、4-0の
縫合針が把持できる
カストロビージョ
8番抜歯後の縫合に
おすすめ!**

【先端の形状】

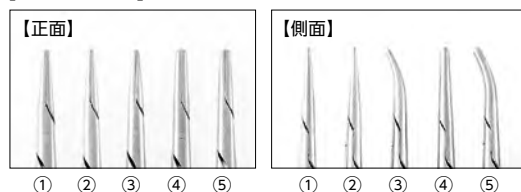

【ハンドルの形状】





基本のカストロ!

カストロビージョ 直
5020 ★
 全長: 14cm
NH5020
82,700円
 パーマシャープ
 (タングステンカーバイド付)



基本のカストロ!

カストロビージョ 曲
5021 ★
 全長: 14cm
NH5021
82,700円
 パーマシャープ
 (タングステンカーバイド付)

コンパクトな形状なので
 手が小さなドクターに
 おすすめです



ダーフ
5032
 全長: 11.5cm
NH5032
34,000円
 パーマシャープ
 (タングステンカーバイド付)



ホルセイ
5037
 全長: 13cm
NH5037
34,000円
 パーマシャープ
 (タングステンカーバイド付)

クライルウッド
5038 ★
 全長: 15cm
NH5038
34,000円
 パーマシャープ
 (タングステンカーバイド付)



ヒューフレディグループで
 最も売れている持針器!

メイヨー・ヘガー
5042
 全長: 16cm
NH5042
34,000円
 パーマシャープ
 (タングステンカーバイド付)




抜歯後の縫合が
 迅速に行える
 “はさみ付き持針器”



ギリーズ ファイン ★
 15cm
NHGILFINE
35,600円
 パーマシャープ (タングステンカーバイド付)

- はさみが付いているので、縫合後に介助なしで、縫合糸をカットできます。
- ロックがないので開閉が容易で、素早く縫合できます。
- 細い柄がしなるので、縫合針がしっかり把持できます。
- 人間工学的に3Dデザインされた把持部で、安定して把持しやすいです。

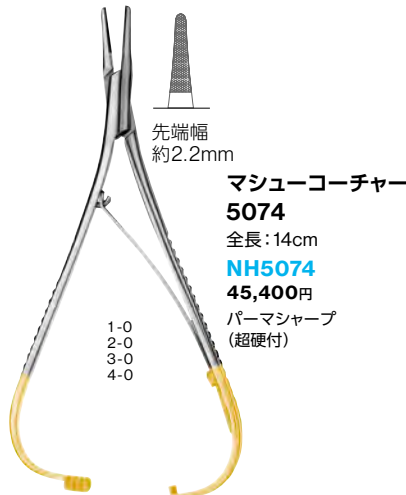

マッシュコーチャー
5074
 全長: 14cm
NH5074
45,400円
 パーマシャープ
 (超硬付)



マッシュ
 全長: 14cm
NHM
34,000円
 タングステンカーバイドなし

はさみ

タングステンカーバイドが貼付されたパーマシャープ、ブラックライン、スタンダードなど、様々なラインナップがあります。



歯肉のトリミングに...

軟組織の細かい切除や、術野マージンや移植用粘膜のトリミングに使用！やや屈曲した鋭利な作業端をもつ
微細な組織用
マイクロはさみ！！

マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ

全長：18cm
SPSPV
93,000円




45°
ギザなし
45°に傾いたはさみで
臼歯部遠心面でも
ピンポイント！

大臼歯遠心部の
難しい部分にも
容易にアクセスでき、
縫合糸カットの際など
アシスタントにも
やさしい！


マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ 45°

全長：18cm
SPSPV45
112,200円

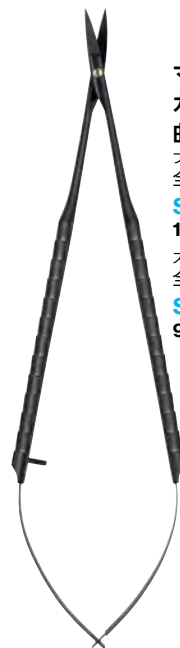

マイクロ
カストロビージョ
曲 PV ★

ブラックライン
全長：18cm
SPVX
112,200円
スタンダード
全長：18cm
SPV
93,000円

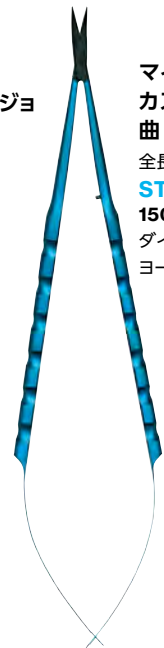

マイクロ
カストロビージョ
曲 チタン

全長：18cm
STMBH
150,200円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



アシスタントの方にも人気者！
臼歯部に届きやすい
複屈曲型！



ラグランジュ 曲 14 ★

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S14SCX 28,700円
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)
S14 17,600円



ゴールドマン
フォックス 曲 16

全長：13.5cm
隣接面での使用に適用
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S16SCX 28,700円
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)
S16 17,600円



アイリス 直 17

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S17SCX 28,700円
スタンダード(ギザなし)
S17 15,400円



アイリス 曲 18 ★

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S18SCX 28,700円
スタンダード(ギザなし)
S18 15,400円



パーマシャープ
ゴールドマン
フォックス 曲
5081

全長：13cm
ギザ付ブレード1枚
隣接面での使用に適用
S5081 46,300円



パーマシャープ
アイリス 直
5082

全長：11.5cm
ギザなし
S5082
46,300円



パーマシャープ
アイリス 曲
5083

全長：11.5cm
ギザなし
S5083
46,300円

コーテリーニ 曲 ★

全長：12cm
ギザ付ブレード1枚
「スーパーカット」シリーズの
はさみのブレードは、
一方は細やかなギザ付き、
もう一方はかみそりの刃のような
鋭い仕上げとなっており、
すべりを防止しながら
組織を切除できます。

スーパーカット
SCORTSC
19,800円



細かな部位への
アクセスに最適な
小さな作業部

ケリー 1

全長：16cm
ギザ付ブレード1枚
S1 17,600円



ヒューフレディ

13S
全長：12cm
先端が鉤状になっているので、
ピンセットで引っ張らなくても、
縫合糸がそのままカットできます。

S13S 17,600円

抜糸はさみ

縫合用プライヤー



マイクロサージカル サイナスライン

SP20SLEM 76,400円

GTR(組織再生誘導)法時などでおすすめ
先端部にダイヤモンドダスト加工



【マイクロサージカルサイナスライン使用中】
組織に対して直角に刺入できる
画像提供:矢野 孝星先生



マイクロサージカルコーン

全長:15cm

SPM20 73,700円

GTR(組織再生誘導)法時などでおすすめ
先端部にダイヤモンドダスト加工



【縫合用プライヤー コーン使用中】

縫合したい部位を把持したまま縫合できるので、
縫合の際に生じるズレを防止できます。

コーン 全長:15cm

SP20 14,200円

ティッシュプライヤー

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。パーマシャープ(TP5041, TP5042)は
先端に超硬(タングステンカーバイド)が付与されており、より滑りにくなっています。



細い先端部で
縫合糸や軟組織の
把持に...

縫合/結紮用だが、
軟組織の把持にも適用！
精細な作業端は
縫合糸をしっかり把持し
外科処置中の組織損傷
リスクを低減！

マイクロ用で有鉤タイプ！
細い先端がピッタリと
合うので、しっかり握める！

マイクロ用で有鉤タイプ！！
フラップやグラフトマージンを
不必要に傷つけることなく
口腔粘膜を確実に把持！！

ティッシュプライヤー マイクロスイスベリオ

全長:18cm

SPTPDAPV

69,400円

無鉤

組織損傷を最小限に抑える
先端デザイン

ティッシュプライヤー マイクロスイスベリオ アナトミカル

全長:18cm

SPTPDSSPV

69,400円

有鉤

マイクロ ダイヤモンドダスト DAPV 直 無鉤 ★

全長:18cm

TPDAPV

69,400円

マイクロ LCOSM 直 マルチ ★

全長:18cm

TPSLCOSM


69,400円

マイクロ LCOCMN 曲 マルチ

全長:18cm

TPSLCOCMN

69,400円

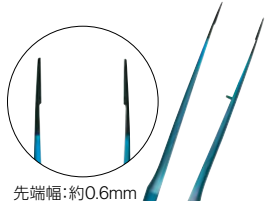


マイクロ チタン ASTMBH

直 無鉤

全長:約18cm

TPASTMBH

136,300円

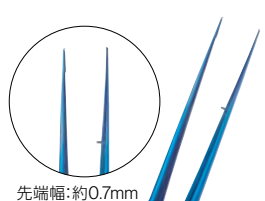

マイクロ チタン ダイヤモンドダスト STMBH

直 有鉤

全長:約18cm

TPSSTMBH

136,300円



ジェラルド1

無鉤

全長:18cm

TPG1

14,400円



アドソン 無鉤 全長:12cm

5041 パーマシャープ

先端幅:約1.4mm

TP5041 27,600円

41 スタンダード

先端幅:約1.3mm

TP41 11,300円



アドソン 有鉤 全長:12cm

5042 パーマシャープ

先端幅:約1.4mm

TP5042 30,900円

42 スタンダード

先端幅:約1.3mm

TP42 11,300円

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

潤沢に在庫を揃えておりますが、世界的大ヒット商品のため、お早目にお買い求めください。

歯牙の把持力が**20%UP**※

※ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウマとの比較
把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持します。

従来品と比較して約**35%軽量**※

※ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較
穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。

薄いテーパー状の先端部

薄いテーパー状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、また歯牙へのアクセスと視野が向上します。



マット仕上げ

ライトの乱反射を抑制し、より良い視野にします。

※ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。

臨床動画

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト『アピカル 35』を用いた上顎右側4番の低侵襲な抜歯



①歯軸と鉗子の軸を一致させ
頬舌的にゆっくりと倒して
歯槽骨を揺るがす。
少し動きが大きくなったら
捻りを加える。(単根歯の場合)



②力を入れすぎると患者さんが
怖になってしまうため
力をかけずにゆっくり動かす。



③ほとんど歯肉が傷んでおらず
出血していない状態で抜去。


この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます

YouTube




画像・動画提供：
公立学校共済組合九州中央病院
顧問
堀之内 康文先生
歯科口腔外科部長・インプラントセンター長
佐々木 匡理先生


上顎用

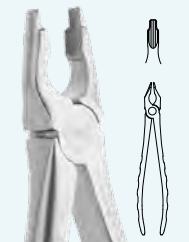


ダイヤモンドダスト
スタンダード1
上顎切歯用、ギザ付
F1XSD 44,400円

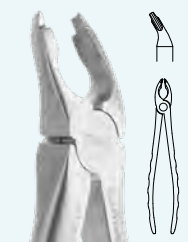


ダイヤモンドダスト
35
上顎犬歯・小臼歯用、ギザ付
F35XSD 44,400円

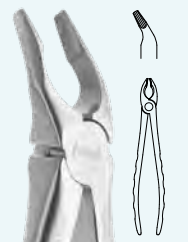


ダイヤモンドダスト
アピカル 35 ★
上顎犬歯・小臼歯用
FAF35XSD 44,400円

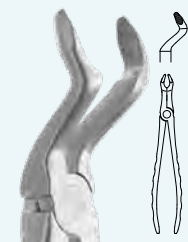

ダイヤモンドダスト
67 ★
上顎大臼歯用
F67XSD 44,400円

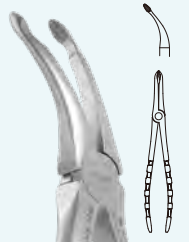

ダイヤモンドダスト
44 ★
上顎歯根用
FX44XSD 44,400円

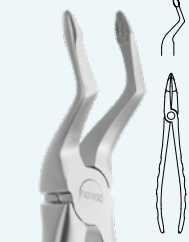

ダイヤモンドダスト
51
上顎歯根用、ギザ付
FX51XSD 44,400円


下顎用




ダイヤモンドダスト
36
下顎切歯用、ギザ付
F36XSD 44,400円




ダイヤモンドダスト
アピカル 36
下顎切歯・小臼歯用
FAF36XSD 44,400円

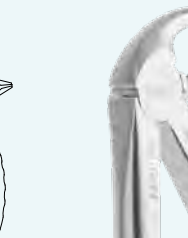


ダイヤモンドダスト
13
下顎小臼歯用、ギザ付
F13XSD 44,400円

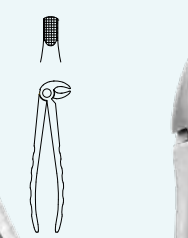

ダイヤモンドダスト
21 ★
下顎大臼歯用、ギザ付
F21XSD 44,400円

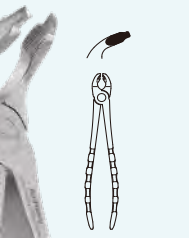

ダイヤモンドダスト
45
下顎歯根用、ギザ付
FX45XSD 44,400円

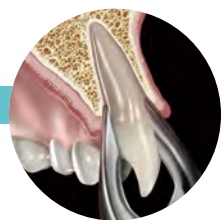

抜歯鉗子 プレジデンシャル

歯牙を抜去するために使用します。ヒューフレディ社製の抜歯鉗子プレジデンシャルシリーズは鍛造されたステンレス鋼を使用しているため耐久性が高く、インスツルメントに均等に圧力が加わるようにヒンジ部は精巧に製作され仕上げられています。ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。

**クライヤー
ユニバーサル 150**
上顎前歯・小白歯
F150 27,400円

**クライヤー
ユニバーサル 151**
下顎前歯・小白歯
F151 27,400円

10S
上顎大白歯
F10S 27,400円

ハリス 17
下顎大白歯
F17 27,400円

一般成人の方であれば、この4本で全顎対応

**スリムタイプの
残根鉗子**

**ヒューフレディ
300 ★**
上顎残根 ギザ付
F300
33,100円

**ヒューフレディ
301 ★**
下顎残根 ギザ付
F301
33,100円

**ヒンジ製品の
毎日のお手入れに...**

**鉗子の日々のお手入れに
IMS潤滑スプレー 236ml**
ILS 3,400円
IMS潤滑スプレー (ILS) はヒンジ部の動きをスムーズにします。

骨鉗子

歯槽骨のトリミング・骨整形・軟組織の除去に使用します。

1.5mm

ミニフリードマン ★
全長: 14.5cm
RMF 46,300円

2.0mm

ミニフリードマン 90°
全長: 14.5cm
RMF90 62,900円

2.8mm

クレイマー・ネビンズ
全長: 14.5cm
RKN 60,700円

3.5mm

**ダブルジョイントにより、
軽い力で大きな切除力が
得られます**

**ベイヤー
ダブルアクション**
全長: 18cm
RBEY 71,600円

止血鉗子

止血、小さな歯根の除去、不安定な器材の固定等様々な用途に対応可能です。

**ホルステッド・
モスキート
曲 3**
全長: 12cm
H3 10,800円

**ホルステッド・
モスキート
直 4**
全長: 12cm
H4 10,800円

ティッシュニッパー

軟組織への外科的アプローチ時に、歯間部の歯肉整形が適切に行えるよう滑らかに操作できる鋭利な小型ニッパーです。

**ゴールドマン
フォックス**
全長: 10cm
NIPS 28,400円

ルクセーティングエレベーター スリム



... 2mm幅で**13%**
3mm幅で**20%スリム***

特 徴

- 13~20%スリム*な先端!
- 歯槽骨に沿わせながら歯周靱帯を切断することにより低侵襲なエキストを実現
- 視認性の良いブラックラインコーティング

※通常のルクセーティングエレベーターとの比較

スリム2S

2mm 直

BL (ブラックライン)

ELSLIM2SSX

13,500円

スリム3S

3mm 直

BL (ブラックライン)

ELSLIM3SSX

13,500円

スリム2C ★

2mm 曲

BL (ブラックライン)

ELSLIM2CSX

13,500円

スリム3C ★

3mm 曲

BL (ブラックライン)

ELSLIM3CSX

13,500円

臨床動画

ルクセーティングエレベーター『スリム』を用いて臨在歯・骨への負担が低減された下顎左側6番の抜歯



この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます



画像・動画提供：中山雪詩先生

①バーで歯根分割を行い、
ルクセーティングエレベーター
『スリム』を回転させながら
歯周靱帯を切断し歯根に沿って
垂直方面に進める

②楔作用を利用し、ある程度進んだら
再度回転させながら歯周靱帯の
切断を繰り返し歯牙を脱臼

③鉗子を用いて愛護的に抜去

ルクセーティングハイブリッド

薄く適正な角度に屈曲した先端部と太いハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに、抜歯時に歯周靱帯の切断ができ、頬側歯槽骨の保存を可能にします。ブラックラインもご用意がございます。



曲 ★ 2.5mm

BL (ブラックライン)

EPTSMCX 16,400円

#6 (サテンスチール)

EPTSMC 15,200円



遠心用 S ★ 2.3mm

BL (ブラックライン)

EPTSMDX 16,400円

#6 (サテンスチール)

EPTSM 15,200円



近心用 S ★ 2.3mm

BL (ブラックライン)

EPTSMMX 16,400円

#6 (サテンスチール)

EPTSM 15,200円

残根の除去には曲、遠心用S、
近心用Sがあれば全顎対応可能です

残根や破折した
歯牙の抜去におすすめ



ブラックライン

キット

BL (ブラックライン) **EPTKITX** 132,800円

#6 (サテンスチール) **EPTKIT** 124,000円

サテンスチール



直 スペード 4.0mm 直

BL (ブラックライン)

EPTSSPX 16,400円

#6 (サテンスチール)

EPTSSP 15,200円



直 2.5mm

BL (ブラックライン)

EPTSMSX 16,400円

#6 (サテンスチール)

EPTSMS 15,200円



遠心用 L 4.0mm

BL (ブラックライン)

EPTLGDX 16,400円

#6 (サテンスチール)

EPTLGD 15,200円



近心用 L 4.0mm

BL (ブラックライン)

EPTLGMX 16,400円

#6 (サテンスチール)

EPTLGM 15,200円

ルクセーティングハイブリッドはキットも
ご用意しております。

ブラックラインキット(**EPTKITX**):左記7本
(BL)、IMSカセット インフィニティ(単品
定価21,000円)を含む

※ブラックラインキットには製品の特性上
ストーンは含まれません。

サテンスチールキット(**EPTKIT**):左記7本
(#6)、IMSカセット(単品定価17,400円)、
セラミックストーン円筒型(単品定価
5,600円)を含む

ルクセーティングエレベーター

ルクセーティングエレベーターは、歯周靱帯を切断するための薄くて鋭いブレードがついています。エレベーターのように「てこの原理」で使用するのではなく、揺らして歯根膜を切断しながら使用することで、隣接歯にかかる圧力を軽減します。

ブラックライン仕様!!
術野がより見やすく、
さらに切れ味が長持ちする
高性能のブラックコーティングを施しています!



クサビ効果で
侵襲の少ない
抜歯が可能

2S 2mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL2SX 13,500円

3S 3mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL3SX 13,500円

4S 4mm 直
BL (ブラックライン)
EL4SX 13,500円

5S 5mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL5SX 13,500円

2C 2mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL2CX 13,500円

3C 3mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL3CX 13,500円

4C 4mm 曲
BL (ブラックライン)
EL4CX 13,500円

5C 5mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL5CX 13,500円

エレベーター バーナード

薄いスパイア型の先端で、狭い歯根膜空隙にも挿入可能なシンデスモームです。ペリオームとしても、ルートチップエレベーターとしても使用できます。



ライト 6
BL (ブラックライン)
BER6X 15,700円



レフト 7
BL (ブラックライン)
BER7X 15,700円



11
BL (ブラックライン)
BER11X 15,700円

歯周靱帯を
切断しながら残根除去!!

エレベーター (ヘーベル)

基本のヘーベル



スペシャル
タイプ 1S ★
4.3mm 直
EL4032
9,800円



スペシャル
タイプ 3S
2.8mm 直
EL3024
9,800円



スペシャル
タイプ 4S ★
2.5mm 直
EL4031
9,800円



スペシャル
タイプ 1C ★
4.2mm 曲
EL3042
9,800円



スペシャル
タイプ 3C
3.0mm 曲
EL4014
9,800円




スペシャル
タイプ 4C ★
2.5mm 曲
EL3092
9,800円

ヘーベル、ボーンキュレット、
エキスカベーターの
シャープニングにおすすめ
ストーンの溝に沿わせて
ボーンキュレットや
エレベーターが研げます



アーカンサス
ストーン ベイツ 5 ★
中目(10×3.8×1.3cm)
SS5 15,700円

ヘーベルはストーンの溝に
エッジがびったり沿うよう
少し傾けて、やさしく
ブッシュストロークします。
※シャープニングオイルを
ご使用ください。

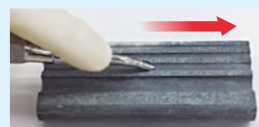

ルートチップエレベーター



ハイドブリンク 1
#502 (角柄) EHB1 8,600円



ハイドブリンク 2
#502 (角柄) EHB2 8,600円



ハイドブリンク 3
#502 (角柄) EHB3 8,600円

ボーンキュレット (鋭匙)

多量の軟組織を容易に除去できるようにデザインされています。


ブレードタイプで不良肉芽をしっかりと、素早く掻き取る鋭匙



ルーカスタイプ



ルーカス 86 ★
BL (ブラックライン) **CL86X** 11,000円
#6 (サテンスチール) **CL866** 9,800円

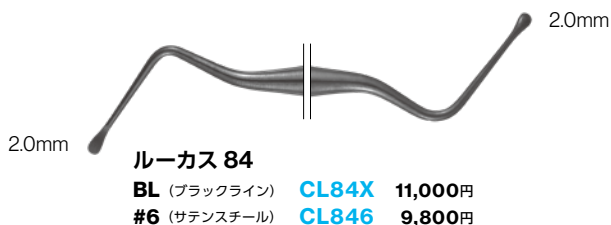


ルーカス 84
BL (ブラックライン) **CL84X** 11,000円
#6 (サテンスチール) **CL846** 9,800円




ルーカス 87
BL (ブラックライン) **CL87X** 11,000円
#6 (サテンスチール) **CL876** 9,800円


ミラータイプ

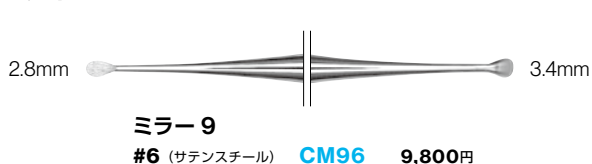


ミラー 9
#6 (サテンスチール) **CM96** 9,800円

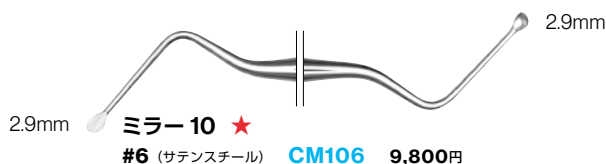

ミラー 10 ★
#6 (サテンスチール) **CM106** 9,800円

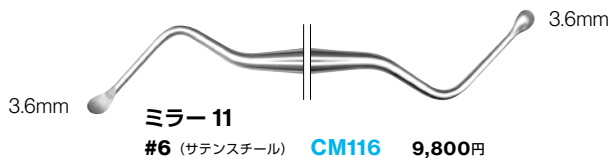

ミラー 11
#6 (サテンスチール) **CM116** 9,800円

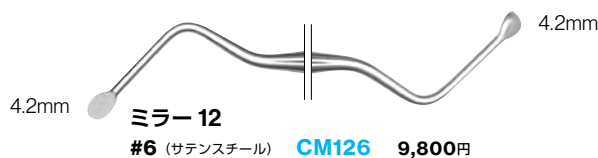

ミラー 12
#6 (サテンスチール) **CM126** 9,800円

ボーンプラガー



ボーンプラガー グリスデイル
BL (ブラックライン) **PLGGR1X** 8,100円



グリスデイルを使用して充填中

サイナスリフトインスツルメント




クレイマー・ネビズ 6577
IMP6577SCX 18,600円




クレイマー・ネビズ 6578
IMP6578SX 18,600円



アーバン 1
IMPURBAN16 13,900円

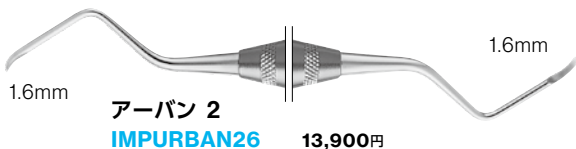

アーバン 2
IMPURBAN26 13,900円

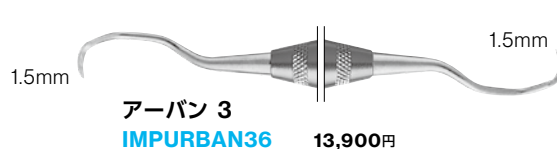

アーバン 3
IMPURBAN36 13,900円

ハンドルの種類

BL (ブラックライン)



#9 (エバーエッジ)



ペリオドンタルチゼル (のみ)

4.0mm



6.0mm

ブーザー 1/3 BL (ブラックライン) **PPBUSER13X** 13,000円
#6 (サテンスチール) **PPBUSE1/36** 11,600円



ペリオドンタルチゼル ブーザーは
先端部背面がカーブしており、
骨造成時の自家骨採取に適しています。

3.8mm



3.8mm

ロードス バック・アクション 36/37 ★

プッシュストロークで使用。歯牙に隣接した骨を外傷を引き起こすことなく除去できます。
特に最後臼歯の遠心面での使用に有効です。

#9 (エバーエッジ) **C36/379** 11,200円
#6 (サテンスチール) **C36/376** 9,900円

3.3mm




3.3mm

TG-O

プッシュストロークで使用。半円状の斜めの切り込みが両側に入れられています。

#6 (サテンスチール) **CTG-O6** 10,100円
#2 (角柄) **CTG-O** 10,100円

3.3mm

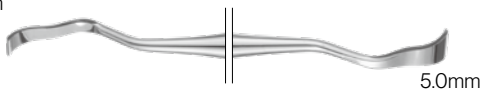


5.0mm

カークランド 13K/13KL

プッシュストロークで使用。アクセスが困難な臼歯部遠心における
切開に有効、フラップシンニング、歯肉切除・整形に有効。

#9 (エバーエッジ) **S13K/13KL9** 11,600円
#6 (サテンスチール) **S13K/13KL6** 10,100円

3.3mm

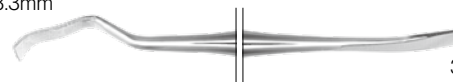


3.3mm

カークランド 13K/TG

#9 (エバーエッジ) **S13K/TG9** 11,600円
#6 (サテンスチール) **S13K/TG6** 10,100円

5.0mm

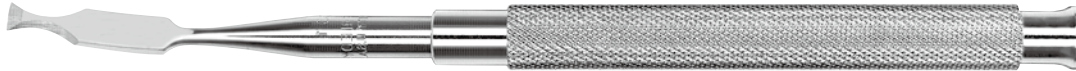

オッセンバイン 1 CO1 10,100円

オッセンバインは骨の形態修正に適しています。
半円状の斜めの切り込みが両側に入れられています。
フラップの引き起こしや二次口蓋フラップの除去にも使用できます。

5.0mm




オッセンバイン 2 CO2 10,100円



【オッセンバイン2使用例】

ファイル (やすり)

全方向に切削力を加えられる
クロスカット!

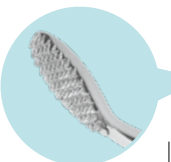

8.2x13.2mm



4.8x8.2mm


ボーンファイル ミラーコルバーン 1X #6 (サテンスチール) **BF1X6** 17,300円



ペリオドンタルファイル シュガーマン 1S/2S

近遠心用 (刃:2面)

#6 (サテンスチール) **FS1/2S6** 11,300円

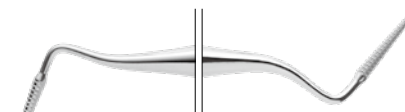

ペリオドンタルファイル シュガーマン 3S/4S

頬舌用 (刃:3面)

骨縁上および骨縁下ポケット内の肉芽組織の除去に適しています。

#6 (サテンスチール) **FS3/4S6** 11,300円



シュガーマン3S/4S使用中

#6 (サテンスチール)



ペリオスチール (骨膜剥離子)

組織の把持・保護・排除する際に使用します。


一般的な外科処置に際し、術中に生じる偶発的な損傷を軽減するため、また組織を保護するために使用します。



ソーセージテクニックの
マストアイテム!

ミニミー マイクロサージカル ★

BL (ブラックライン) PFIWDS1MKX 12,000円
#6 (サテンスチール) PFIWDS1MK 10,700円

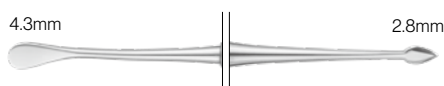

ステイグマン スプリッター


粘膜骨膜の剥離や挙上に使用します。
スベード型の先端は、穿孔が生じにくいように丸くなっています。

#SS (スムーズハンドル) PPSTEIG 16,000円



ブーザー ★


BL (ブラックライン) PPBUSERX 12,000円
#6 (サテンスチール) PPBUSER6 10,700円

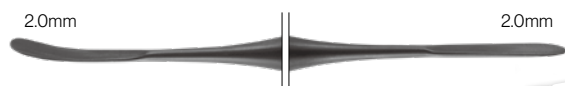

アレン 前歯用 ★

BL (ブラックライン) PPAELAX 16,000円
#6 (サテンスチール) PPAELA 15,200円

歯間乳頭など
繊細な剥離に
おすすめ

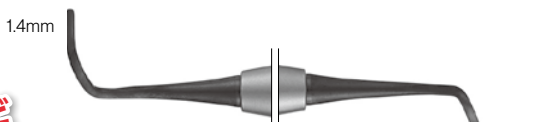


アレン 白歯用

BL (ブラックライン) PPAELPX 16,000円
#6 (サテンスチール) PPAELP 15,200円



ゴールドマンフォックス 14

BL (ブラックライン) P14X 12,000円
#6 (サテンスチール) P146 10,700円
#2 (角柄) P14 10,700円

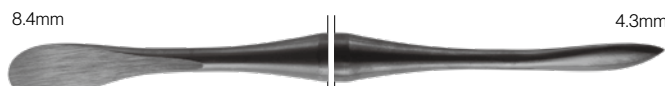


モルト 9 ★

BL (ブラックライン) P9X 12,000円
#6 (サテンスチール) P96 10,700円
#522 (角柄) P9 10,700円



プリチャード PR3


BL (ブラックライン) PPR3X 12,000円
#6 (サテンスチール) PPR36 10,700円

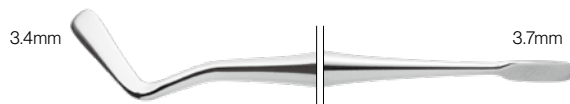

ハーシュフェルト 20

#6 (サテンスチール) P206 10,700円
#2 (角柄) P20 10,700円

ヒューフレディグループで
最も売れている
剥離子!

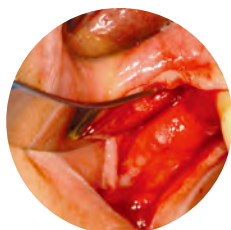

11.0mm ギザ付




使いやすい小さめの剥離子と、
滑りにくいギザ付きリトラクターが
対になっています。

1本で歯肉の剥離と排除が可能
ブラックラインは歯肉排除時に乱反射を抑制し、
より良好な術野を確保!!

ラバンカ 改良型3 ★

BL (ブラックライン) PPLABANC3X 17,300円
#6 (サテンスチール) PPLABANC36 16,000円

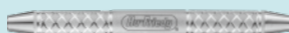


ペリオドンタルナイフ・トンネリングナイフ

切開や歯肉の豊隆形成や歯間部歯肉組織の切除に使用されます。



オルバン1/2 ★ 角度のついたブレードと複屈曲のシャンクで臼歯部に適用。隣接歯間部歯肉の切除にも使用。


BL (ブラックライン) **KO1/2X** 16,700円 #6 (サテンスチール) **KO1/26** 12,900円
#9 (エバーエッジ) **KO1/29** 14,500円

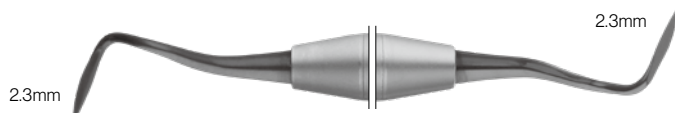

オルバン アレン改良型 1/2

KO1/2に比べ30%薄いデザイン。垂直的および水平的方向への骨膜上粘膜を切除。丸みを帯びた先端部により穿孔のリスクが低減。

BL (ブラックライン) **KO12KPO3AX** 16,700円
#9 (エバーエッジ) **KO12KPO3A9** 14,500円
#6 (サテンスチール) **KO12KPO3A6** 12,900円

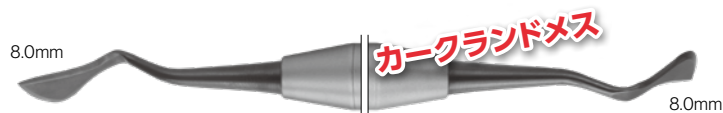

カークランド 15/16


歯肉除去や歯肉整形時の第一次斜切開用。特に臼歯部に適用。

BL (ブラックライン) **KK15/16X** 16,700円
#6 (サテンスチール) **KK15/166** 12,900円



アレン ★ ポケット底部から歯槽骨頂への付着を切断するため使用。(ポケット内の一次切開用)

BL (ブラックライン) **KPAX** 16,700円
#6 (サテンスチール) **KPA** 12,900円

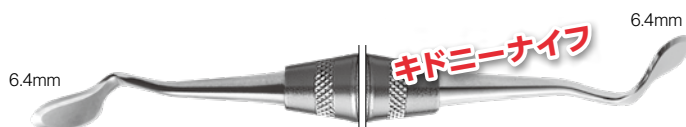

ゴールドマンフォックス 7

ヘビーシャンクタイプ - 長斜切開に適したブレード角度。楕円形のブレードなので臼歯部に適用。


#6 (サテンスチール) **KGF76** 12,900円



ゴールドマンフォックス 11


槍型(スピア)ポイント
臼歯部に適合しやすいブレード角度。

BL (ブラックライン) **KGF11X** 16,700円
#6 (サテンスチール) **KGF116** 12,900円

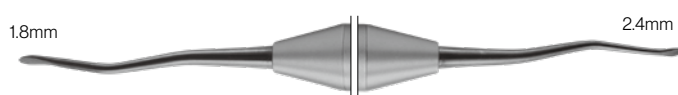


トンネリングナイフ 1

BL (ブラックライン) **TKN1X** 13,400円
#6 (サテンスチール) **TKN1** 12,300円

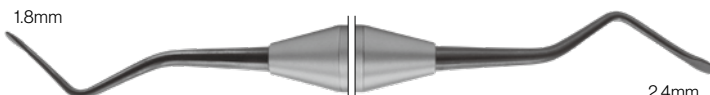


トンネリングナイフ 2

BL (ブラックライン) **TKN2X** 13,400円
#6 (サテンスチール) **TKN2** 12,300円

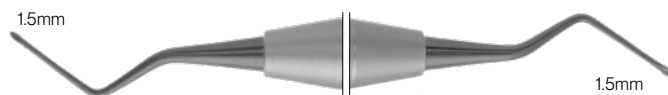


トンネリングインスツルメント クインシー 1

BL (ブラックライン) **FQUINCEY1X** 13,900円

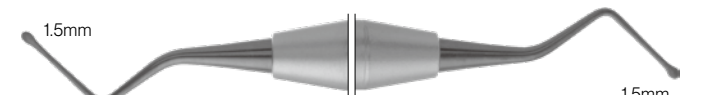

トンネリングインスツルメント クインシー 2

BL (ブラックライン) **FQUINCEY2X** 13,900円

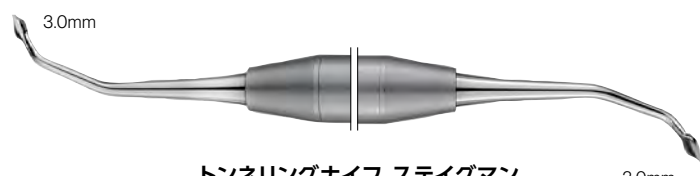


**トンネリングナイフ ステイグマン
ソフトティッシュスプリッター 改良型**

BL (ブラックライン) **TKSTEIG2** 16,400円



**トンネリングナイフ ステイグマン
ソフトティッシュスプリッター**

BL (ブラックライン) **TKSTEIG** 16,400円

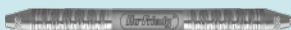

ペリオサージカルキュレット

従来のグレーシー・ユニバーサルキュレットより、シャンク及びブレードが太くてしなりにくいので、強固に付着した沈着物が手早く除去できます。両刃タイプなので、1本で全顎対応です。シャープニングは歯周用のキュレットと同様に行えます。




プリチャード 1/2
#9 (エバーエッジ)
SPR1/29 7,300円


クレイマー・ネビンズ 3 ★
#9 (エバーエッジ)
SKRA39 8,600円

ペリオトーム (歯周靱帯刀)

薄く鋭利な刃で歯周靱帯を切断することで、周囲の歯槽骨への損傷を抑えながら抜歯を容易にします。

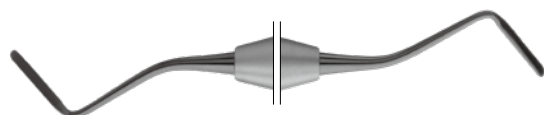

1 臼歯用
BL (ブラックライン) PT1X 8,300円
#6 (サテンスチール) PT1 7,800円

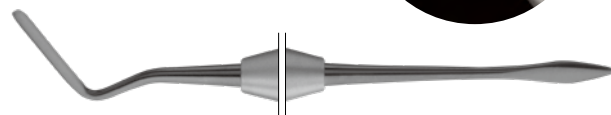

2 前歯用
BL (ブラックライン) PT2X 8,300円
#6 (サテンスチール) PT2 7,800円

シリンジ



サイナスリフト時の
骨補填におすすめ!!



ボーングラフト
シリンジ 7mm
内径 5.8mm。
目詰まりを防ぐため、
先端から充填します。
SYBG 29,000円

スカルペルハンドル (メスハンドル)

歯頸部に沿った切開がしやすい
ペンタイプのメスハンドル



ヨーロッパスタイル 5E ★ バランスのとれた丸柄のハンドルで、
ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。
また、シンプルなデザインのグリップで、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易です。
10-130-05E 12,500円



5 バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、
届きにくい部位などでの操作が容易です。
10-130-05 12,500円



5A 10-130-05A 12,500円



ミニブレード用 ★ SHDPV 30,000円

マイクロブレード用



ミニブレード用 チタン SHTMBH 37,000円
ダイヤモンドダスト ヨーロッパハンドル

ハンドルの
種類

BL (ブラックライン)
#9 (エバーエッジ)



#6 (サテンスチール)



リトラクター



サージカルリトラクター インプラント用

全長：23cm
IR 42,900円

ブラックラインは乱反射を抑制し、
より良好な術野を確保します！



ミネソタ大学型★

BL (ブラックライン) CRMX 6,100円
CRM 6,100円
(従来品)



コロンビア

CRC 6,100円

マウスギャグ (開口器)



モルト

小人用 ★ MGC 41,600円
幼児用 MGI 41,600円
※欧米サイズのため日本人には
一般成人の方でも「小人用」が適用です。

一人でも容易に着脱可能！

アシスタントさんがつかない時や訪問診療時など、
一人で処置しなければならない時、容易に開閉・
ロック解除ができる形状！スタッフ不足でも安心！

しっかり・安定のホールド！

噛む部分が広くしっかりホールドできるため、
顎に不随意運動がある患者さんなどに特に有効！
柄に適度な長さがあるため、一度開口すれば安定した
開口状態をキープ！

「落ちない」「取れない」「壊れにくい」

作業部にしっかりと装着されたシリコン製チップは、
口腔内で落下してしまったり、着脱時に取れてしまう
可能性が低く、患者さんが強い力で噛んでも壊れにくい
頑丈設計！



マウスギャグの装着方法は
こちらからご覧いただけます



感染管理 関連商品

IMS カセット シブネチャー シリーズ (インスツルメント・アクセサリは含まれません)

IMSカセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗浄剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。
丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインスツルメントをしっかりと固定します。

カストロビジョの収納におすすめ！
洗浄・滅菌時、破損を防止！



US/HP用 L ★

外形寸法：76mm × 203mm × 32mm
ハンドピース2〜3本または
超音波インサート5本が収納可能
IM60H8 ■ブルー 13,200円

外科器具の
管理におすすめ



16本用

外形寸法：203mm × 280mm × 32mm
16本のインスツルメントと付属品が収納可能
※ヒンジ用クリップは別売です
IM4160 ■レッド 21,800円
IM4168 ■ブルー 21,800円



20本用

外形寸法：203mm × 280mm × 32mm
20本のインスツルメントが収納可能
※ヒンジ用クリップは別売です
IM4200 ■レッド 21,800円
IM4208 ■ブルー 21,800円


剥離子やナイフなど棒状の
器具管理におすすめ！



20本用 ダブルデッカー

外形寸法：152mm × 246mm × 38mm
20本のインスツルメントと付属品が収納
可能。
IM9208 ■ブルー 27,600円

16本用カセットの空きスペースに
マット&シリコンストッパーセットを入れて
カストロビジョを収納できます！

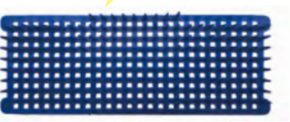

交換用S US/HP用 L

マット&シリコンストッパーセット
IMSカセット 16本用の空きスペースに
おすすめです ※ケースは含まれません
IM60H8RAIL ■ブルー 2,200円

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り
作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干
の誤差が生じることがあります。

【販売名／一般的な名称（医療機器届出番号）】■エレベーター／歯科用エレベーター／13B1X10238G03101 ■サージカルリトラクター／歯科
用開口器／13B1X10238G03101 ■サイナスリフトインスツルメント／歯科用インプラント手術器具／13B1X10238G09102 ■スカルペルハ
ンドル／ナイフハンドル／13B1X10238G32101 ■チークリトラクター／歯科用開口器／13B1X10238G30102 ■ディッシュブライヤー／歯
科治療用ピンセット／13B1X10238G20101 ■トンネリングナイフ／歯肉切除メス／13B1X10238G15101 ■はさみ／はさみ
13B1X10238G41101 ■はさみ 歯肉用／歯科用歯肉はさみ／13B1X10238G19101 ■ペリオサージカルキュレット／歯科用キュレット
13B1X10238G06102 ■ペリオスチール／歯科用起子及び剥離子／13B1X10238G13101 ■ペリオオーム／筋帯切開刀
13B1X10238G36101 ■ペリオドンタルチゼル／歯科用エキスカベーター／13B1X10238G04102 ■ペリオドンタルナイフ／歯肉切除メス
13B1X10238G15102 ■ペリオドンタルファイル／やすり／13B1X10238G24101 ■ボーンディッシュユニバーサル／手術用骨鉗子
13B1X10238G28101 ■ボーンキュレット／歯科用キュレット／13B1X10238G06101 ■ボーングラフトシリンジ／歯科用インプラント手術
器具／13B1X10238G09103 ■ボーンファイル／やすり／13B1X10238G24102 ■ボーンブリーダー／歯科用インプラント手術器具
13B1X10238G09108 ■マウスギャグ／歯科用開口器／13B1X10238G30103 ■ルートチップエレベーター／歯科用エレベーター
13B1X10238G03102 ■ルグセーティングエレベーター／歯科用エレベーター／13B1X10238G03103 ■ルグセーティングハイブリッド／歯
科用エレベーター／13B1X10238G03104 ■骨鉗子／手術用骨鉗子／13B1X10238G29102 ■止血鉗子／鉗子／13B1X10238G43103
■持針器／持針器／13B1X10238G16101 ■抜歯鉗子／抜歯鉗子／13B1X10238G08101 ■縫合用ブライヤー／歯科治療用ピンセッ
ト／13B1X10238G20102 ●医療機器の分類一般医療機器（クラスI）

ヒューフレディ サージカルコレクション 注文書

製品名		パートコード	標準価格(円)	数量
持針器	マイクロカストロピージョ	スイスベリオ	SPNHDPVN	97,300
		直DPV	NHDPV	97,300
		曲DCPV	NHDCPV	97,300
		直DPVN	NHDPVN	97,300
		曲DCPVN	NHDCPVN	97,300
		直チタンTMBH	NHTMBH	164,500
	カストロピージョ	直5024RRH	NH5024R	87,400
		曲5024RCRH	NH5024RC	87,400
		コーテリーニ直RH	NH5024CORT	87,400
		シミオン直RH	NH5024SIM	87,400
		直5020	NH5020	82,700
		曲5021	NH5021	82,700
	ダーフ	5032	NH5032	34,000
		ホルセイ	NH5037	34,000
		クライルウッド	NH5038	34,000
		メイヨー・ヘガー	NH5042	34,000
		マシューコーチャー	NH5074	45,400
		マシュー	NHM	34,000
はさみ	マイクロカストロピージョ	スイスベリオ	SPSPV	93,000
		45°	SPSPV45	112,200
		マイクロカスト	SPVX	112,200
		ロピージョ曲PV	SPV	93,000
		スタンダード	STMBH	150,200
		マイクロカストロピージョ曲チタン	S14SCX	28,700
	ゴールドマンフォックス曲14	スタンダード	S14	17,600
		BL	S16SCX	28,700
		スタンダード	S16	17,600
		アイリス直17	S17SCX	28,700
		スタンダード	S17	15,400
		アイリス曲18	S18SCX	28,700
	パーマシャープ	スタンダード	S18	15,400
		ゴールドマンフォックス曲5081	S5081	46,300
		アイリス直5082	S5082	46,300
		アイリス曲5083	S5083	46,300
		コーテリーニ曲スーパーカット	SCORTSC	19,800
		ケリー1	S1	17,600
縫合用プライヤー	縫合用ヒューフレディ13S	マイクロサージカルサイナスライン	SP20SLEM	76,400
		マイクロサージカルコーン	SPM20	73,700
		コーン	SP20	14,200
		マイクロスイスベリオ	SPTPDAPV	69,400
ブレイッシュ	マイクロスイスベリオ アナトミカル	マイクロスイスベリオ アナトミカル	SPTPDSSPV	69,400
		マイクロダイヤモンドダスト DAPV 直 無鉤	TPDAPV	69,400
		マイクロ LCOSM 直 マルチ	TPSLCOSM	69,400
		マイクロ LCOCMN 曲 マルチ	TPSLCOCMN	69,400
		マイクロチタンASTMBH 直 無鉤	TPASTMBH	136,300
		マイクロチタンダイヤモンドダストSTMBH 直 有鉤	TPSSTMBH	136,300
		ジェラルド1 無鉤	TPG1	14,400
		アドソン 無鉤	TP5041	27,600
		41 スタンダード	TP41	11,300
		アドソン 有鉤	TP5042	30,900
		42 スタンダード	TP42	11,300
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト	スタンダード1	35	F1XSD	44,400
		アピカル35	F35XSD	44,400
		67	FAF35XSD	44,400
		44	F67XSD	44,400
		51	FX44XSD	44,400
		36	FX51XSD	44,400
		アピカル36	F36XSD	44,400
		13	FAF36XSD	44,400
		21	F13XSD	44,400
		45	F21XSD	44,400
		45	FX45XSD	44,400
シブヤルシテン	クライヤー ユニバーサル	150	F150	27,400
		151	F151	27,400
		10S	F10S	27,400
		17	F17	27,400
IMS潤滑スプレー	ヒューフレディ	300	F300	33,100
		301	F301	33,100
骨鉗子	ミニフリードマン	90°	ILS	3,400
		90°	RMF	46,300
		90°	RMF90	62,900
		90°	RKN	60,700
止血鉗子	ペイヤーダブルアクション	曲3	RBEY	71,600
		直4	H3	10,800
ティッシュニッパー	ゴールドマンフォックス	2S	H4	10,800
		2C	NIPS	28,400
		3S	ELSLIM2SSX	13,500
		3C	ELSLIM2CSX	13,500
ルクセーティング ハイブリッド	ルクセーティングエレベーター	スリム	ELSLIM3SSX	13,500
		3C	ELSLIM3CSX	13,500
		曲	ELSLIM3CSX	13,500
		遠心用S	EPTSMCX	16,400
		近心用S	EPTSMC	15,200
		直 スペード	EPTSMDX	16,400
		直	EPTSMMD	15,200
		遠心用L	EPTSMMX	16,400
		近心用L	EPTSM	15,200
		直	EPTSM	15,200
		直	EPTSSPX	16,400
		直	EPTSSP	15,200
		直	EPTSMSX	16,400
		直	EPTSMS	15,200
		直	EPTLGDX	16,400
		直	EPTLGD	15,200
ルクセーティング エレベーター	ルクセーティングエレベーター	直	EPTLGMX	16,400
		直	EPTLGM	15,200
		直	EPTKITX	132,800
		直	EPTKIT	124,000
		直	EL2SX	13,500
		直	EL2CX	13,500
		直	EL3SX	13,500
		直	EL3CX	13,500
エレベーター バーナード	エレベーターバーナード	直	EL4SX	13,500
		直	EL4CX	13,500
		直	EL5SX	13,500
		直	EL5CX	13,500
		直	EL6CX	13,500
		直	EL6CX	13,500
		直	EL6CX	13,500
		直	EL6CX	13,500

製品名				パートコード	標準価格(円)	数量
エレベーター スペシャルタイプ	1S			EL4032	9,800	
	1C			EL3042	9,800	
	3S			EL3024	9,800	
	3C			EL4014	9,800	
	4S			EL4031	9,800	
	4C			EL3092	9,800	
アーカンサスストーンベイツ 5				SS5	15,700	
ルートチップエレベーター	ハイドブリック 1	#502		EHB1	8,600	
	ハイドブリック 2	#502		EHB2	8,600	
	ハイドブリック 3	#502		EHB3	8,600	
ボーン キュレット	ルーカス	86	BL	CL86X	11,000	
			#6	CL866	9,800	
		84	BL	CL84X	11,000	
			#6	CL846	9,800	
		87	BL	CL87X	11,000	
			#6	CL876	9,800	
	ミラー	9	#6	CM96	9,800	
		10	#6	CM106	9,800	
		11	#6	CM116	9,800	
12		#6	CM126	9,800		
ボーンブラガーグリスティール		BL	PLGGR1X	8,100		
サイナスリフト インスツルメント		クレイマー・ネビンス	6577	BL	IMP6577SCX	18,600
		6578	BL	IMP6578SX	18,600	
	アーバン	1	#6	IMPURBAN16	13,900	
		2	#6	IMPURBAN26	13,900	
		3	#6	IMPURBAN36	13,900	
ペリオ ドンタル	ブーザー 1/3	BL	PPBUSER13X	13,000		
		#6	PPBUSE1/36	11,600		
	ロードス バック・アクション 36/37	#9	C36/379	11,200		
		#6	C36/376	9,900		
	TG-O	#2	CTG-O6	10,100		
		#2	CTG-O	10,100		
	カークランド 13K/13KL	#9	S13K/13KL9	11,600		
		#6	S13K/13KL6	10,100		
	カークランド 13K/TG	#9	S13K/TG9	11,600		
		#6	S13K/TG6	10,100		
	オッセンバイン	1	#524	CO1	10,100	
		2	#524	CO2	10,100	
ファイル	ボーンファイルミラーコルバーン1X	#6	BF1X6	17,300		
	ペリオドンタルファイル シュガーマン	1S/2S 3S/4S	#6	FS1/2S6 FS3/4S6	11,300 11,300	
ペリオ スチール	ミニミー マイクロサージカル	BL	PFIWDS1MKX	12,000		
		#6	PFIWDS1MK	10,700		
	ステイグマンズブリッター	#SS	PPSTEIG	16,000		
	ブーザー	BL	PPBUSERX	12,000		
		#6	PPBUSER6	10,700		
	アレン 前歯用	BL	PPAELAX	16,000		
		#6	PPAELA	15,200		
	アレン 臼歯用	BL	PPAELPX	16,000		
		#6	PPAELP	15,200		
	ゴールドマンフォックス 14	BL	P14X	12,000		
		#6	P146	10,700		
		#2	P14	10,700		
	モルト 9	BL	P9X	12,000		
		#6	P96	10,700		
		#522	P9	10,700		
	ブリチャード PR3	BL	PPR3X	12,000		
		#6	PPR36	10,700		
ハーシュフェルト 20	#6	P206	10,700			
	#2	P20	10,700			
ラバンカ 改良型 3	BL	PPLABANC3X	17,300			
	#6	PPLABANC36	16,000			
ペリオ ドンタル ナイフ	オーバン 1/2	BL	KO1/2X	16,700		
		#9	KO1/29	14,500		
		#6	KO1/26	12,900		
	オーバン アレン改良型 1/2	BL	KO12KPO3AX	16,700		
		#9	KO12KPO3A9	14,500		
		#6	KO12KPO3A6	12,900		
	カークランド 15/16	BL	KK15/16X	16,700		
		#6	KK15/166	12,900		
	アレン	BL	KPAX	16,700		
		#6	KPA	12,900		
	ゴールドマンフォックス 7	#6	KGf76	12,900		
	ゴールドマンフォックス 11	BL	KGf11X	16,700		
		#6	KGf116	12,900		
	トンネリングナイフ 1	BL	TKN1X	13,400		
		#6	TKN1	12,300		
トンネリングナイフ 2	BL	TKN2X	13,400			
	#6	TKN2	12,300			
トンネリングインスツル メント クインシー	BL	FQUNCEY1X	13,900			
	B6	FQUNCEY2X	13,900			
トンネリングナイフステイグマン ソフトティッシュブリッター	改良型 SS	TKSTEIG2	16,400			
	SS	TKSTEIG	16,400			
ペリオ サージカル キュレット	ブリチャード 1/2	#9	SPR1/29	7,300		
	クレイマー・ネビンス 3	#9	SKRA39	8,600		
	1日歯用	BL	PT1X	8,300		
ペリオ トーム		#6	PT1	7,800		
	2 前歯用	BL	PT2X	8,300		
		#6	PT2	7,800		
シリンジ	ボーングラフトシリンジ ヨーロッパスタイル 5E	7mm	SYBG	29,000		
ハス ンカ ル ベル	5			10-130-05E	12,500	
	5A			10-130-05	12,500	
				10-130-05A	12,500	
	ミニブレード用			SDHPV	30,000	
	ミニブレード用 チタン			SHTMBH	37,000	
サージカルリトラクター		インプラント用	IR	42,900		
デーク リトラクター	ミニソタ	BL	CRMX	6,100		
	大型型		CRM	6,100		
	コロニア		CRC	6,100		
マウスギャグ		モルト	小児用 幼児用	MGC MGI	41,600 41,600	
カセ ット	IMSカセット シグネチャー	US/HP用 L ブルー		IM60H8	13,200	
		16本用 レッド		IM4160	21,800	
		16本用 ブルー		IM4168	21,800	
		20本用 レッド		IM4200	21,800	
		20本用 ブルー		IM4208	21,800	
		20本用 ダブルデッカー ブルー		IM9208	27,600	
	交換用 SUS/HP用 L マット&シリコンストップパーセット ブルー			IM60H8RAIL	2,200	